

ニプロカテラン針G A

再使用禁止


【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は、液の注入又は排出を目的に注射筒などと共に用いる単回使用の滅菌済み注射針であり、針管、針基から構成されている。

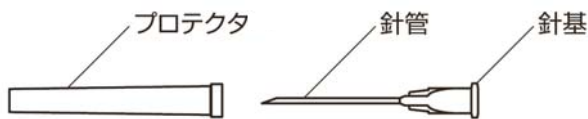

2. 材質

針管：ステンレス鋼
針基：ポリプロピレン

【使用目的又は効果】

注射筒等を用いて注射用医薬品を注入する。

【使用方法等】

- *1. 個包装が密封されていることを確認します。
- 2. 個包装を開封し、注射針を個包装内から取り出します。
- 3. 注射針をシリンジにしっかり付けます。
- 4. プロテクタをまっすぐ引いて外し、使用します。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

1. 誤って手指等に針を刺さないよう取扱いには十分注意してください。
2. 針基に過剰な負荷をかけないでください。また、接続時はプロテクタで針基に過剰な回転負荷をかけないでください。
[針管又は針基が破損するおそれがあります。]
3. プロテクタを外すときは、針先がプロテクタに触れないよう注意してください。[プロテクタが針に触れると、針先が変形し、穿刺しづらくなるおそれがあります。]
4. 注射針をバイアルや輸液容器等のゴム栓に穿刺する場合は、なるべく刺通面に垂直に刺し、横方向に力を加えたり、同一部位に穿刺されることがないように注意してください。
5. アンブル等の薬液容器壁面に注射針が当たらないよう注意してください。[針先が変形し、穿刺しづらくなるおそれがあります。]
6. 接続部に薬液又は血液を付着させないでください。[接続部の緩み等が発生するおそれがあります。]
7. リキャップしないでください。[リキャップ自体に誤穿刺のおそれがあり、また、誤って斜めにリキャップすることで、針先がプロテクタを貫通するおそれがあります。]

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- *1) 個包装を輪ゴムでしばる等の負荷をかけた状態で長期間保管をしないこと。[包装に負荷がかかり、破損するおそれがある。]
- *2) 個包装での保管は、個包装が経時的に外的環境の影響を受けやすく破損することがあるため、十分注意すること。
- 3) 使用中は本品の破損、接続部の緩み、空気混入、液漏れ及び詰まり等について、十分注意すること。
- 4) 本品は合成樹脂製品のため、温度が低下するにつれて強度が低下することから取扱いには注意すること。[破損するおそれがある。]

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。
有効期間：滅菌後5年（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売（お問い合わせ先）
ニプロ株式会社
電話番号：06-6372-2331（代表）

製造（輸入先）
ニプロ（上海）有限公司
[NIPRO(SHANGHAI)CORPORATION LIMITED]
中華人民共和国
[People's Republic of China]



ニプロ株式会社