

スピーディ カテ

再使用禁止

【禁忌・禁止】


1. 再使用禁止
2. 包装が開封されている場合、又はポリビニルピロリドン等張液が乾燥している場合は、使用しないこと。[水分が蒸発してカテーテルが十分に潤滑されず、尿道粘膜を傷つける可能性がある。]

【形状・構造及び原理等】

材質：ポリウレタン

本品は、カテーテルに親水性コーティングが施され、包装内にポリビニルピロリドン等張液が封入された泌尿器用カテーテルである。

＜構造図（代表例）＞

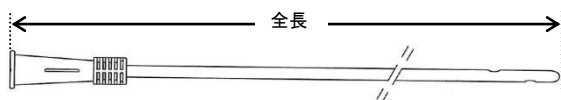

** ＜規格＞

種類	外径 (CH/Fr)	コネクタの 色	全長 (mm)	先端形状
ネラトン 男性用	8	青	393±10	2 孔 ストレート
	10	黒		
	12	白		
	14	緑		
チーマン 男性用	10	黒	393±10	2 孔 カーブ
	12	白		
ネラトン 女性用	6	緑	200±5	2 孔 ストレート
	8	青		
	10	黒		
	12	白		
	14	緑		
ネラトン 30	6	緑	300±10	2 孔 ストレート
	8	青		
	10	黒		
	12	白		

【使用目的、効能又は効果】

本品は、膀胱内に挿入し、導尿、採尿、膀胱洗浄等を行うための尿誘導用カテーテルである。

【品目仕様等】

本品は、JIS T 3214 に適合する品目仕様である。

【操作方法又は使用方法等】

本品の使用は 1 回限りで、再使用できません。

1. 包装を開封する前に、挿入の準備を整えておきます。
2. 手を良く洗って清潔にし、必要に応じて手袋を着用します。
3. 尿道口及びその周辺を消毒します。
4. 包装を開封する前に本品を水平にして、ポリビニルピロリドン等張液をむらなくカテーテルにいきたらせませす。
5. 包装をゆっくりと開封します。
6. 包装背面のシールを剥がして適当な水平面に貼りつけ、リング部分を手前に引いて包装を開封することもできます。

＜男性の場合＞

7. ペニスを片手で持ち、尿道が真っ直ぐになるように保持します。もう片方の手でカテーテルを持ち、約 2cm ずつゆっくりと挿入します。ペニスを強く握るとカテーテルを挿入しにくくなりますので、注意してください。

8. チーマンタイプの場合は、コネクタ上にあるチーマンのインジケータ（隆起した突起物）を上方に向けて水平に保持し、カテーテル先端のカーブを上方に向けて、尿道口より挿入します。
9. カテーテルが膀胱内に到達する直前に、括約筋による抵抗を感じます。
10. 尿が流出し始めるまでカテーテルを挿入してください。カテーテルを蓄尿バッグにつないで使用することもできます。

＜女性の場合＞

7. 片方の手で陰唇を開き、尿道口が見えるようにします。
8. もう一方の手でカテーテルを持ち、約 2cm ずつゆっくりと挿入します。
9. カテーテルが膀胱内に到達する直前に、括約筋による抵抗を感じます。
10. 尿が流出し始めるまでカテーテルを挿入してください。カテーテルを蓄尿バッグにつないで使用することもできます。

＜男女共通＞

11. 尿の流出が止まったら、カテーテルを 2～3cm ゆっくりと引き抜き、尿の流出の有無を再度確認します。尿の流出を認めたら、しばらく待ち、さらに 1～2cm ゆっくりと引き抜いてください。
12. 尿の流出が終わったら、ゆっくりとカテーテルを引き抜き、カテーテルを適切に処分します。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
 - ・本品を在宅等で患者若しくは家族が使用する場合には、本品の使用方法及び使用上の注意について、医療従事者が指導を行ってください。
 - ・他の医薬品や医療機器と併用する場合には、それぞれの添付文書を確認して使用してください。
 - ・本品は医家向け製品です。医療従事者の指導の下に使用してください。
 - ・膀胱が空になったら、すみやかにカテーテルを抜いてください。
 - ・発熱等の尿路感染症の症状が現れた場合には、すみやかに使用を中止し、適切な処置を行ってください。
 - ・カテーテル挿入時に患者が痛みを訴えた場合には、すみやかに使用を中止し、適切な処置を行ってください。
 - ・包装内のポリビニルピロリドン等張液で衣類等が汚れないよう、注意してください。
 - ・再使用又は再滅菌は行わないでください。
 - ・使用後は感染防止に留意し、すみやかに廃棄してください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法
 - ・包装の破損を防ぐため、重いものを上に置いたり、狭い場所に保管したりしないこと。
 - ・なるべく垂直な状態で保管しないこと。
 - ・水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿、凍結を避けて保管すること。
2. 使用の期限
直接の包装及び外箱を参照(自己認証による)。

【包装】

1 本/滅菌包装 (30 本/箱)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造 販売 業者：コロプラスト株式会社

住 所：東京都千代田区九段南 2-1-30

イタリア文化会館ビル

電 話 番 号：03-3514-4141

** 製 造 業 者：Coloplast Hungary KFT

コロプラスト ハンガリー ケーエフティ
(ハンガリー)

