

機械器具 40 医療用のこぎり  
一般医療機器 のこぎり 34821001

## フェザートリミングナイフ替刃

### 【警告】


- 非常に鋭利な刃物であるため、取り扱いに注意すること。

### 【禁忌・禁止】

- 生体への使用禁止。
- 専用ハンドル以外のハンドルへの取り付け禁止。
- 経時的な劣化等によって替刃が固定できなくなったハンドルへの取り付け禁止。

### 【形状、構造及び原理等】

形状と品番

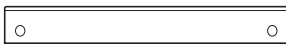No.130 

No.130R 

No.260



組成:カーボン鋼

### 【使用目的、効能又は効果】


手動式の器具で、解剖学的構造又は物体の一部を切断又は分離する目的で用いる器具。

### 【品目仕様】

専用ハンドルに替刃を取り付け使用する。  
(専用ハンドル) フェザートリミングナイフハンドル

### 【操作方法、使用方法等】

包装を開封して替刃を取りだし、専用ハンドルに装着して使用下さい。

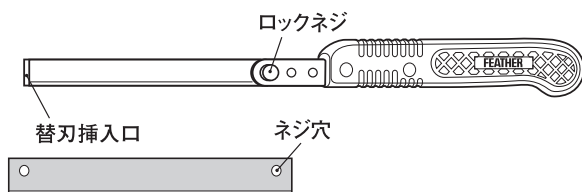

- 1.ロックネジをゆるめ、替刃を替刃挿入口から刃先を損傷しない様、ガイド背金にそって、替刃がとまるところまで入れてください。
  - 2.ロックネジと替刃のネジ穴を合わせ、ロックネジをしめてください。
- ※替刃をお取り替えになる場合はロックネジをゆるめ、替刃をゆっくりと抜き取ってください。
- ※鋭利な刃物です、刃先には十分ご注意ください。

### 【使用上の注意】

- 本品は、【使用目的、効能又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- 製品に破損などの異常が認められる場合は使用しないこと。
- 使用後は、ハンドルより取り外し感染防止に配慮して安全な方法で処分すること。

### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 高温・多湿、直射日光及び水濡れを避けて室温で保管すること。
- 耐用年数: 使用後1年 (未使用品保証期間5年)
- 製造年月日はロットナンバーにより明示。

LOT 00 00 0000

製造年西暦下2桁 製造月 製造バッチ

### 【包装】

個別包装(10枚入):防錆紙  
販売単位箱(50枚入):ボール紙(表面ビニール塗布加工)

### 【製造販売業者及び製造業者等の氏名又は名称及び住所等】

<製造販売元>フェザー安全剃刀株式会社 美濃工場  
岐阜県美濃市松森600-1 TEL.0575-33-1855  
<製造元>フェザー安全剃刀株式会社 本社  
大阪府大阪市北区大淀南3-3-70 TEL.06-6458-1631  
<お問い合わせ先>フェザー安全剃刀株式会社 東京支店  
メディカル商品部 TEL.03-3864-0917