

機械器具 27 医療用ミクロトーム
一般医療機器 単回使用ミクロトーム用刃 42440000

フェザーミクロトーム替刃

再使用禁止

【警告】


- 専用替刃は非常に鋭利な刃物であるため、取り扱いに注意すること。

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止。
- 生体への使用禁止。
- 専用ホルダー以外のホルダーへの取り付け禁止。
- 経時的な劣化等によって替刃が固定できなくなったホルダーへの取り付け禁止。

【形状、構造及び原理等】

主な形状:

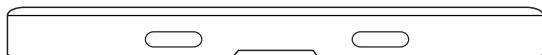

組成: ステンレス / カーボン / 高速度工具鋼 / 超硬合金

【使用目的、効能又は効果】

非常に鋭利な切刃をもつ平たい楔形の刃として設計された器具。
通常、パラフィンで固定した組織を超薄片に削るために使用するミクロトームに取り付けられている。本品は単回使用である。

【品目仕様】

専用ホルダーに替刃を取り付けることにより、ミクロトーム機本体への取り付けを可能にする。
(専用ホルダー) フェザーミクロトームホルダー各種

【操作方法、使用方法等】

ディスペンサー又はケースより、替刃を取り出し専用ホルダーに装着し使用する。

【使用上の注意】

- 本品は単回使用である為、切れ味が悪くなった替刃は使用しないこと。
- 替刃が専用ホルダーに固定できたことを確認し、使用すること。
- 本品は【使用目的、効能又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- 製品に破損などの異常が見られる場合は使用しないこと。
- 廃棄の際は、感染防止に配慮して安全な方法で処分すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 高温・多湿、直射日光を避けて室温で保管すること。
- 耐用年数: 使用後1年 (未使用品保証期間5年)
- 製造年月日はロットナンバーにより明示。

LOT 00 00 0000

製造年西暦下2桁 製造月 製造バッチ

【包装】

個包装・販売単位箱: ボール紙

入数: 個包装に表示

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

＜製造販売元＞フェザー安全剃刀株式会社 美濃工場
岐阜県美濃市松森600-1 TEL.0575-33-1855

＜製造元＞フェザー安全剃刀株式会社 本社
大阪府大阪市北区大淀南3-3-70 TEL.06-6458-1631

＜お問い合わせ先＞フェザー安全剃刀株式会社 東京支店
メディカル商品部 TEL.03-3864-0917