

機械器具 40 医療用のこぎり
一般医療機器 手動式ギブスカッター 16341000

フェザーバンデージスニップ

【警告】


- 非常に鋭利な刃物であるため、取り扱いに注意すること。

【禁忌・禁止】

- 本品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。
- 無理な切断はしないこと。

【形状、構造及び原理等】

形状:

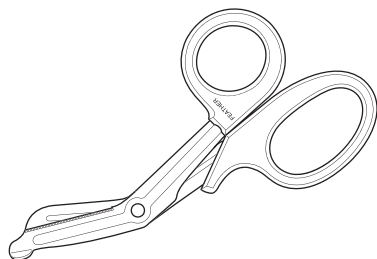

組成:刃部／刃物用特殊ステンレス鋼
グリップ／耐熱樹脂

原理:回転軸のある2枚の刃を閉じることによって材料を切断する。

【使用目的、効能又は効果】


はさみ様の手持型器具。2枚の刃の遠位端から転心まで様々な顎状の構造をとり、ギブスを形状するための石膏又は合成材料を切断することができる。はさみ様の機構をなす片方の刃の先端は、通常、患者の損傷を防ぐため鈍くなっている。

【品目仕様】

オートクレーブ、及びエチレンオキサイドガスによる滅菌処理が可能である。

【操作方法、使用方法等】

包装から取り出し、顎状の刃が下になるように手に持ち、はさみ様に切断して下さい。

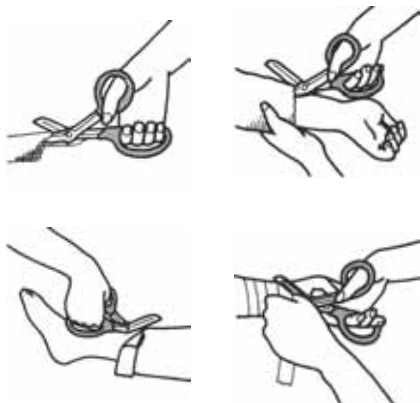

【使用上の注意】

- 本品は、【使用目的、効能又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- 刃先に損傷を認めた場合や、切れなくなった場合は使用を中止すること。
- 製品に破損などの異常が見られる場合は使用しないこと。
- 滅菌は、【保守点検に係わる事項】に従い行うこと。
- 廃棄の際は、感染防止に配慮して安全な方法で処分すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 高温・多湿、直射日光を避けて室温で保管する。
- 耐用年数 使用後1年 未使用品保証期間5年。
- 製造年月日はロットナンバーにより明示。

LOT 00 00 0000

製造年西暦下2桁 製造月 製造バッチ

【保守点検に係わる事項】

■使用後に洗浄する場合

- 蒸留水あるいは滅菌水で洗い流してください。
- 病院の指定する洗剤の使用方法に従い蛋白質その他の汚れを入念に洗浄してください。
- 洗浄後は、直ちに蒸留水あるいは滅菌水で洗浄液を入念にすすいでください。
- 洗浄水を拭き取り、完全に乾燥させてください。
- 損傷の無い事を確認してください。
- 消毒液による消毒が可能です。容量、用法については、各消毒液取扱説明書に従って行って下さい。

■滅菌処理を行う場合

- 製品を適当な滅菌バック等に入れてください。
- 適当なオーブントレー又は、滅菌籠等に乗せてください。
- バリデート(有効性確認)された、高圧蒸気滅菌装置(摂氏135℃まで)、エチレンオキサイド滅菌装置を使用し、装置の手順に従い又は病院における滅菌の手順に従い滅菌してください。
- 滅菌された製品は、適切な方法で次回使用まで保管してください。

【包装】

個別包装(1本入):PE

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

<製造販売元>フェザー安全剃刀株式会社 美濃工場
岐阜県美濃市松森600-1 TEL.0575-33-1855

<製造元>フェザー安全剃刀株式会社 本社
大阪府大阪市北区大淀南3-3-70 TEL.06-6458-1631

<お問い合わせ先>フェザー安全剃刀株式会社 東京支店
メディカル商品部 TEL.03-3864-0917