

線形加速器システム MHI-TM2000

【警告】

1. 医師及び法的有資格者以外は使用しないこと。
2. 線量パラメータが放射線治療計画装置へ正しく入力されていることを確認し使用すること。
3. 線量評価パラメータを定期的に確認すること。
4. インタロック等の安全装置を無効化しないこと。
5. 装置の改造・分解修理は行わないこと。

【禁忌・禁止】

適用対象（患者）

1. 患者自身の状態によって、患者本人を危険な状態にすると判断される場合は使用しないこと。
2. 患者が植込み式医療機器（ペースメーカー、除細動器、脳脊髄刺激装置等）を用いている場合は、その機器への直接照射は行わないこと。
3. 荷重（160Kg）をこえる患者への使用は行わないこと。

使用方法

1. 本装置は防護型ではないので、装置近くでの可燃性及び爆発性の気体を使用しないこと。
2. レーザポインタ（アイソセンタ表示器）のレーザビームを直視しないこと。レーザビームによって眼球損傷を起こすことがある。
3. 指定された機器以外の装置を接続した場合、所定の EMC 性能を発揮できない恐れがあるので指定機器以外は接続しないこと。

【形状・構造及び原理等】

＜構成品＞


本製品の構成は以下からなる。

- I 装置本体
- II カウチ
- III オペレータコンソール
- IV イメージャコンソール
- V パルス電源盤
- VI システム制御盤
- VII イメージャ電源盤
- VIII イメージャ制御盤
- IX カウチ制御盤
- X オプション品
 - ・イメージャシステム
 - ・EPID システム
 - ・位置照合装置
 - ・カウチ天板傾動装置
 - ・追尾照射システム

※詳細は、装置付属の取扱説明書を参照してください。

形状

＜形状・構造＞

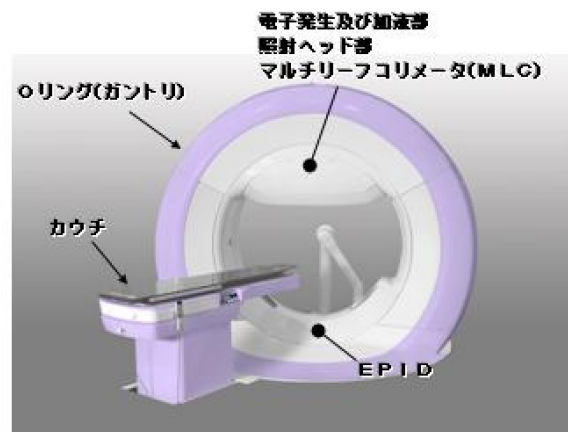

※詳細は装置付属の取扱説明書「第 2 章」を参照してください。

＜電気定格＞

(1) 標準品による電氣的定格

	定格電圧	交流/ 直流	周波数	消費電力
パルス 電源盤	3 相 3 線 200V	交流	50/60Hz	31kVA
	単相 2 線 100V	交流	50/60Hz	1.1kVA
イメージ ジャ 電源盤	3 相 3 線 200V	交流	50/60Hz	12kVA

(2) オプション品追加による電氣的定格

1) イメージャシステムを追加した場合

	定格電圧	交流/ 直流	周波数	消費電力
パルス 電源盤	3 相 3 線 200V	交流	50/60Hz	31kVA
	単相 2 線 100V	交流	50/60Hz	1.1kVA
イメージ ジャ 電源盤	3 相 3 線 200V	交流	50/60Hz	12kVA x 2 系統

2) 位置照合装置を追加した場合、以下の電気系統が追加となる

	定格電圧	交流/ 直流	周波数	消費電力
位置照合 装置 (制御 盤)	単層 2 線 200V	交流	50/60Hz	1kVA

＜保護の分類 保護の形式＞

電撃に対する保護の形式	クラス I 機器、永久設置形機器
電撃に対する保護の程度	B 形装着部

取扱説明書を必ずご参照ください。

作動・動作原理

腫瘍等の放射線治療が必要な病変を有する患者の放射線治療を行うことを目的とし、放射線治療を専ら担当する医師、又は診療放射線技師などが使用するものであり、高エネルギーのX線を発生することができる O リング型ガントリ方式の線形加速器システムである。
作動原理、安全機能は、以下のとおりである。

<治療ビーム発生及び照射原理>

1. 本装置で発生させることができる放射線は X 線であり、電子発生及び加速部の加速管により 6MeV まで加速された電子ビームを、X 線ターゲットに入射させて 6MV の高エネルギーX線に変換する。
2. 変換された X 線は、電子ビームの進行方向に指向性を持つものの、全周に渡って X 線を放出するため、照射ヘッド部のコリメータによりアイソセンタの方向以外に放射されるX線を遮蔽する。
3. 照射ヘッド部のコリメータを通過した X 線は、同照射ヘッド部のフラットニングフィルタ（平坦化フィルタ）を通すことによって X 線の線量分布を平坦化させ、さらにマルチリーフコリメータ（MLC）を通すことによって任意の形状に成形し、照射ターゲット（病巣）周囲の正常組織への照射を抑え、治療ビームとして使用する。このため、IMRT（強度変調放射線治療）への対応も可能となる。
4. 治療ビームは、O リング（ガントリ）に搭載されたパン・チルト装置のアイソセンタ補正機能により、その照射方向が微調整されて、カウチ上の位置決めされた患者に照射される。
5. ここで治療ビームは、O リング（ガントリ）の走行フレームが任意の位置に停止後、あるいは走行しながら照射ターゲット（病巣）に向けて照射されるため、O リングフレームなどの機械部品は剛性を高くし、装置の機械的なたわみを小さくする構造となっている

◇追尾照射機能の原理

リアルタイムに体内の照射ターゲットの位置を検出、あるいは推定し、治療ビームが照射ターゲットに一致するよう、パン・チルト装置を使って治療ビームの照射方向を調整しながら照射を行う。

【使用目的、効能又は効果】

使用目的

高エネルギーのX線を用いて腫瘍等の放射線治療のため使用される。

【品目仕様等】

<特性、性能又は機能>

項目	仕様
1. 使用可能な公称エネルギー及び吸収線量率	
(1) 公称 X 線エネルギー	6MV
(2) 定格治療距離における使用可能な吸収線量率（X 線線量率）	固定照射 500cGy/min 運動照射 100～500cGy/min (連続) 追尾照射

項目	仕様
	100～500cGy/min
2. 使用可能な放射線照射野	0.25cm×0.5cm ～ 15cm x 15cm
3. 定格治療距離	100cm
4. 使用可能なフィルタ	フラットニングフィルタ(平坦化フィルタ)
5. 線量モニタシステム	
(1) 線量モニタシステム再現性 線量モニタ単位の吸収線量に対する比の最大変動係数	±0.5%以下
(2) 線量モニタシステム直線性 線量モニタ単位の比例定数を掛けた値と吸収線量値との間の最大偏差	±2%以下
(3) 線量モニタシステム角度位置依存性 異なる角度位置の R（平均値）の最大値と最小値の差	±3%以内
(4) 線量モニタシステム校正の安定性 1)高吸収線量照射後の安定性 2)1 日内の安定性 3)1 週間内の安定性	1) ±2%以内 2) ±2%以内 3) ±2%以内
(5) 線量モニタシステム吸収線量の範囲	1～19999cGy
6. 放射線照射野の均一性	
(1) 正方形 X 線照射野	
1)平坦度 (照射野 5cm×5cm～最大放射線照射野) 標準測定深において、平坦化領域内の最小吸収線量に対する放射線照射野全ての点の中で最大の吸収線量との最大比	1) 106%以下
2)角度位置による線量分布の偏差 架台及び照射野限定システムの全ての角度位置に対して標準測定深で平坦化領域内 1 点の吸収線量の放射線ビーム軸上の吸収線量に対する比の最大偏差	2) ±3%以下
3)対称性 放射線ビーム軸に対称な 2 点での吸収線量の最大比	3) 103%以下
4)吸収線量の最大比 最大深部線量深の放射線ビーム軸に直角な面で、放射線ビーム軸上の最大吸収線量に対する放射線照射野内の吸収線量の最大比	4) 107%以下
7. 放射線照射野の表示	
(1) 数値照射野表示 定格治療距離における放射線照射野の寸法と放射線照射野数値表示間の最大差	±3mm 以内
(2) 光照射野表示器	
1) 定格治療距離における光照射野辺縁と、放射線照射野辺縁の主軸上の最大距離	1) ±2mm 以内
2) 定格治療距離の 1.5 倍における光照射野辺縁と、放射線照射野辺縁の主軸上の最大距離	2) ±4mm 以内
3) 定格治療距離における光照射野の中心と、放射線ビーム軸の最大距離	3) ±2mm 以内

取扱説明書を必ずご参照ください。

項目	仕様
4) 定格治療距離の1.5倍における照射野の中心と、放射線ビーム軸間の最大距離	4) ±4mm 以内
(3) X線照射野の再現性 1) 同じ数値照射野表示によるX線照射野寸法の最大と最小の差 2) 同じ数値照射野表示による照射野の辺縁とX線照射野辺縁の最大距離	1) ±2mm 以内 2) ±2mm 以内
(4) 放射線ビーム軸の指示 患者への入射点の指示 放射線ビーム軸と放射線ビーム軸の指示された位置間の差の最大値	±1mm 以内
(5) アイソセンタからの放射線ビーム軸の最大変位	±0.3mm 以内
(6) アイソセンタの指示 アイソセンタ位置を指示する器具の指示とアイソセンタ位置の最大差	±0.5mm 以内
(7) 対向する放射線照射野の一致 対向する放射線照射野軸のアイソセンタにおける軸間の最大変位	1mm 以内
8. 患者治療台（カウチ）の動き (1) カウチの上下動時における水平方向変位差	2mm 以内
(2) 治療台（カウチ）の剛性 前後方向 1) カウチ引込（荷重 30kg）と引出（荷重 135kg）でのカウチ高さの最大差 左右方向 2) カウチ天板の面の水平面からの横振りの最大角度 3) カウチ天板の高さの最大変動（カウチ左右移動時）	1) 5mm 以下 2) 0.5° 以下 3) 5mm 以下
(3) カウチ移動量	標準: x 軸: ±150mm y 軸: 1600mm z 軸: 637mm オプション(カウチ天板傾動装置付き) x 軸: ±150mm y 軸: 1600mm z 軸: 687mm
(4) 動く部分 カウチ移動速度（利用可能な速度）	x 軸: 15mm/s 10mm/s 5mm/s y 軸: 50mm/s 25mm/s 10mm/s z 軸: 30mm/s 15mm/s 5mm/s
(5) 動く部分 停止操作による静止距離（最大速度時）	10mm 以内
(6) 商用電源中断時の停止距離（最大速度時）	10mm 以内
(7) カウチ天板傾動装置移動速度（オプション）	ピッチ: 0.43° /s ロール: 0.95° /s

項目	仕様
(8) カウチ天板傾動装置動作範囲（オプション）	ピッチ: ±2.7° ロール: ±4°
9. Oリング（ガントリ）の動き (1) 回転目盛り ゼロ位置の最大角度偏差 Oリング旋回目盛によって指示されるゼロ位置と下垂によるゼロ位置との最大差	±0.5° 以内
(2) Oリング型ガントリ動作範囲	ガントリローテーション: ±180° リングローテーション: ±60°
(3) 動く部分 Oリング型ガントリ動作速度（利用可能な速度）	ガントリローテーション: 最大 7° /s 最低 0.2° /s リングローテーション: 最大 3° /s 最低 0.2° /s
(4) パン&チルト装置動作範囲	パン軸: ±2.5° チルト軸: ±2.5°
(5) パン&チルト装置動作速度	パン軸: 9° /s チルト軸: 9° /s
(6) アイソセンタの回転変動	±0.1mm 以内
(7) 動く部分 Oリング型ガントリの停止操作による静止距離（最大速度時）	2° 以内
(8) Oリング型ガントリの商用電源中断時の停止距離（最大速度時）	2° 以内
10. X線安全性 (1) X線照射中のファントム表面での吸収線量	吸収線量が最大になる深さでの吸収線量の50%以下
(2) 照射野限定器を透過する漏れ放射線（X線）	放射線ビーム軸上の吸収線量の1%以下
(3) 最大放射線ビーム外の漏れ放射線 1) 患者平面内の最大放射ビーム面積の外側 2) 加速管から 5cm 離れた患者が近づける場所	1) 放射線ビームと患者平面との交点の吸収線量の 0.2% 以下 2) 放射線ビーム軸定格治療距離での吸収線量の 0.5% 以下
(4) 待機状態及び準備状態での放射線の発生 1) 容易に接近できる加速装置の表面から 5cm 離れた任意の場所 2) 表面から 1m 離れた場所	1) 残留放射線なし 2) 残留放射線なし
(5) 患者平面の外側の漏れ放射線 患者平面を見込む立体角内を除く、電子銃から仮想線源までの電子軌道から 1m 離れた場所での漏れ放射線量	放射線ビーム軸上定格治療距離での最大吸収線量の 0.5% 以下
(6) 利用線錐以外の放射線量	利用線錐の放射線量の 1000 分の 1 以下
11. 運動照射（運動放射線治療） (1) 角度線量率	0.24～41.6cGy/度
(2) 回転方向	時計回り・反時計回り
(3) 架台回転依存性	±2% 以下
(4) 運動放射線治療の安定性 架台の回転角と、線量モニタ単位の設定値を角度当たりの線量モニタ単位の設定値で割って計算した	±3° 以下

取扱説明書を必ずご参照ください。

項目	仕様
角度との最大差	
12. イメージャ装置	
(1) 焦点皮膚間距離	450mm 以上
(2) 断層像の歪み	±1.5mm 以内
(3) CT の仕様	
1)コーン角	1) 9.0 度
2)ディテクタ寸法(ピクセルサイズ)	2) 0.42mm×0.42mm
3)スライス厚	3) 1, 2, 3mm (選択)
4)スライスピッチ	4) 0.5～10mm (0.5mm ピッチで選択)
5)視野	5) アイソセンタにおいて: 体軸方向: 160mm 体幅方向: 210mm
6)再構成アルゴリズム	6) Feldkamp 法
(4) X 線画像の撮像枚数	最大 14 枚/秒/台 最小 2 枚/秒/台
13. 位置決め精度	
(1) イメージャ装置 画像処理コントローラ位置照合精度	アイソセンタからのずれ 20mm 以内において: ±1.5mm 以内
(2) 位置照合装置 位置照合精度	±1.5mm 以内
(3) 総合位置決め精度	イメージャ装置で補正した位置と放射線ビーム軸との最大偏差: ±2.0mm 以内
14. 追尾照射	
(1) イメージャ装置動的位置検出精度	±1.5mm 以内
(2) 追尾照射の総合精度	±3.0mm 以内
15. 外部呼吸同期照射	
	遅れ時間 照射 ON 時: 0.1 秒以内 照射 OFF 時: 0.05 秒以内

＜安全性に関する項目＞

規格番号、年	表 題
JIS T 0601-1: 1999	医用電気機器 - 第 1 部 : 安全性に関する一般的要求事項
JIS T 60601-1-2: 2002	医用電気機器 - 第 1 部 : 安全性に関する一般的要求事項 - 第 2 節 : 副通則 - 電磁両立性 - 要求事項及び試験
JIS Z4705: 1993	医用電子加速装置 - 安全
JIS Z4714: 2001	医用電子加速器装置 - 性能特性
JIS Z4701: 1997	医用 X 線装置通則
医療用エックス線装置基準	平成 13 年 3 月 22 日 厚生労働省告示第 75 号

【操作方法又は使用方法等】

※詳細は装置付属の取扱説明書を参照してください。

使用方法

駆動電源投入後、デリリーチェックモードにて試照射の後、治療を行う。
治療は、事前に計画された治療計画に従って行うものであり、機器の操作は、リモコン、あるいはオペレータコンソ

ールのメイン操作卓、またカウチ（治療台）の機側操作スイッチにより、下記治療照射手順に従い行う。

＜治療照射手順＞

治療は、オペレータコンソールの操作室モニタから、クリニカルモードに従い操作を行う。
クリニカルモードでは、治療計画装置によって予め作成された治療計画情報を受け取り、この情報に基づいて治療を行う AUTO 治療モードと、治療計画情報によらず、全ての治療パラメータ（分割回数、線量、GANTRY ROTATION、RING ROTATION の位置、MLC 照射野形状）をオペレータコンソールの操作室モニタから入力、設定して治療を行う MANUAL 治療モードがある。

◇AUTO 治療モード

AUTO 治療モードでは、主に、事前に計画された治療計画に従って治療を行う。

- 治療計画で使用した CT 画像を位置照合装置に読み込み、セットアップコンソールにおいて、インプラントマーカ位置を指定し、呼吸同期情報を取得する。(追尾照射(ステレオ方式のインプラントマーカあり)の場合のみ)
- 操作室モニタの『Stand-by Mode 画面』でクリニカルモードの [Clinical] を選択する。
- 『Clinical Mode 画面 (患者選択)』で患者を選択し、照射門毎の治療情報、患者体表マークの種類を確認する。この時、患者のセットアップ方法も決定する。
- DOSE テストを実施する。(自動)
- 操作室モニタに『Clinical Mode 画面 (Laser 位置合わせ)』が表示される。
- リモコン、あるいはメイン操作卓の [G-AUTO] と [ENABLE]を同時に押して、オリング (ガントリ)を原点位置へ復帰させる。(必要に応じて実施)
- 事前セットアップ：作業 1
患者をカウチに乗せて、治療計画時の体位を再現した状態で、患者体表マークをレーザポインタ (アイソセンタ表示器) と一致させる。
- 事前セットアップ：作業 2
患者体表マークがレーザポインタ (アイソセンタ表示器) と一致していることを確認して、カウチ機側スイッチ、あるいはリモコンの [SET UP] と [COMP] (又は[COMPLETE]) を押す。
- 操作室モニタに『Clinical Mode 画面 (Image Guidance)』が表示される。
- リモコン、あるいはメイン操作卓の [G-AUTO] と [ENABLE] を同時に押して、オリング (ガントリ)を指定位置 (イメージャ装置の撮像開始位置) へ移動させる。
- 治療室内に患者以外の人がないことを確認して、治療室から退場してドアを閉める。
- 患者セットアップ方法に応じて、メイン操作卓の [X-RAY]、あるいは [CBCT] と [ENABLE] を同時に押す。([X-RAY]、[CBCT] は照射中黄色点灯、照射終了時消灯) (X-RAY での撮像では、イメージャ装置が 1 台の場合には、(9)から (12) の手順を 2 回実施する。)
- 1-SHOT、あるいは CBCT で撮像した X 線画像、あるいは断層像を、患者セットアップ方法に応じて、イメージャコンソール、あるいは位置照合装置で位置決め用画像(治療計画時に事前に撮影した X 線 CT 診断装置の患者 CT 画像、DRR 画像)と比較・照合する。

取扱説明書を必ずご参照ください。

- (14) カウチ機側スイッチ、リモコン、あるいはメイン操作卓の[R-AUTO]、[C-AUTO]、[G-AUTO] を [ENABLE] と同時に押して患者位置の補正を行う。(補正量がカウチによる補正量の閾値以下で、かつ治療計画情報でパン・チルト装置による補正が許可されている場合にのみ、2 回目以降の治療に限りパン・チルト装置で補正する場合がある。)
- (15) 呼吸同期情報を取得し、その相関性を確認する。(追尾照射の場合のみ)
 - a. メイン操作卓の [MONITOR ON] を押して、赤外線カメラ及び 2 台のイメージャ装置を使って、患者の呼吸信号 (赤外線反射ボディーマーカの位置) および 2 方向からの X 線画像を同時に連続的に取得する。(照射ターゲット、あるいはインプラントマーカがイメージャ画像で視認できる任意の位置で実施する。)
 - b. 位置照合装置のセットアップコンソールにおいて、一対の X 線画像中で照射ターゲット位置、あるいはインプラントマーカの位置を指定する。(視認できない場合は、イメージャ装置の撮像位置を変えて、a. をやり直す。)
 - c. 照射ターゲット、あるいはインプラントマーカ位置の時系列データと、呼吸信号の時系列データより、呼吸同期情報を取得する。
 - d. 位置照合装置のセットアップコンソールに表示されている X 線画像上で、a. の呼吸信号と c. の呼吸同期情報により計算された照射ターゲットの位置を見て、呼吸同期情報の相関性を確認する。
- (16) 操作室モニタに『Clinical Mode 画面 (照射)』が表示される。
- (17) リモコン、あるいはメイン操作卓の [G-AUTO] と [ENABLE] を同時に押して、O リング (ガントリ) の GANTRY ROTATION (走行)、RING ROTATION (旋回) を治療計画で設定された治療開始位置へ移動させる。(この時、MLC も治療計画で設定された形状に自動的に成形される。)
- (18) [LASER] と [FIELD] を押して、レーザポインタ (アイソセンタ表示器) と照射野投光器 (光照射野表示器) を点灯し、照射野と照射中心位置を目視で確認する。
- (19) 治療室内に患者以外の人がないことを確認して、治療室から退場してドアを閉める。
- (20) メイン操作卓の [MONITOR ON] を押して、赤外線カメラ及び 2 台のイメージャ装置を使って、患者の呼吸信号 (赤外線反射ボディーマーカの位置) および 2 方向からの X 線画像を同時に連続的に取得する。(追尾照射の場合のみ)
- (21) 位置照合装置のセットアップコンソールにおいて、一対の X 線画像中の照射ターゲット、あるいはインプラントマーカの位置を指定して、照射ターゲット、あるいはインプラントマーカの検出可否を確認してから、照射ターゲットの検出方法を決定する。(追尾照射の場合のみ)
- (22) 治療位置において、呼吸同期情報の相関性を確認する。(追尾照射の場合のみ)

[(22)-1) サロゲート方式の場合

- ・位置照合装置のセットアップコンソールに表示される X 線画像上で、(20) の呼吸信号と (15) c. の呼吸同期情報より計算された照射ターゲットの位置を見て、呼吸同期情報を確認する。
- ・相関性が認められると判断すれば、治療にこの呼吸同期情報を適用する。(11) DOSE テストを実施する。(自動)

[(22)-1) サロゲート方式の場合 [インプラントマーカがある場合]

- ・位置照合装置のセットアップコンソールに表示される X 線画像上で、呼吸信号 (インプラントマーカの位置) と (1) の呼吸同期情報より計算された照射ターゲットの位置を見て、呼吸同期情報の相関性を確認する。
- ・相関性が認められると判断すれば、治療にこの呼吸同期情報を適用する。

[インプラントマーカがない場合]

- ・位置照合装置のセットアップコンソールに表示される X 線画像上で、呼吸信号 (照射ターゲットの位置) と呼吸同期情報 (この場合、呼吸信号は照射ターゲットと一致するとした呼吸同期情報) より計算された照射ターゲットの位置を見て、呼吸同期情報の相関性を確認する。(検出した照射ターゲットの位置と実際の照射ターゲットの位置が合っていることを確認する。)
- ・相関性が認められると判断すれば、治療にこの呼吸同期情報を適用する。

- (23) メイン操作卓の [TRACKING ON] を押して、追尾照射機能を有効にする。(追尾照射の場合のみ)
- (24) メイン操作卓の [BEAM キースイッチ] を ENABLE 側に回す。
- (25) メイン操作卓の [BEAM ON] が自動点灯 (緑色) し、治療室でブザーが鳴動する。
- (26) [BEAM ON] を押して照射を開始する。([BEAM ON] は黄色点灯、ブザー鳴動) 照射を中断する場合は、[BEAM OFF] を押すか、[BEAM キースイッチ] を DISABLE 側に回す。
- (27) 設定線量に達すると照射は自動的に終了する。([BEAM ON] は消灯、ブザー消音)
- (28) [BEAM キースイッチ] を DISABLE 側に回す。次の治療門がある場合は、(17) の手順から繰り返す。
- (29) 全門終了すると『Clinical Mode 画面 (終了)』が表示される。(この時、MLC は自動的に全閉)
- (30) 操作室モニタに『Stand-by Mode 画面』が表示され、スタンバイモードに移行する。

◇MANUAL 治療モード

MANUAL 治療モードでは、オペレータコンソールから入力された治療パラメータに従って治療を行う。

- (1) 操作室モニタの『Stand-by Mode 画面』でクリニカルモードの [Clinical] を選択する。
- (2) 『Clinical Mode 画面 (患者選択)』で患者を選択する。
- (3) 『Clinical Mode 画面 (患者選択)』で、イメージャ装置の撮像方法 (X-RAY 撮像) を選択する。
- (4) DOSE テストを実施する。(自動)
- (5) 患者をカウチに乗せて、O リング (ガントリ) の中へ移動させる。
- (6) O リング (ガントリ) を原点位置へ移動させる。
- (7) カウチ機側スイッチ、あるいはリモコンの [SET UP] と [COMP] (又は [COMPLETE]) を押す。
- (8) O リング (ガントリ) をイメージャ装置の撮像位置へ移動させる。
- (9) 治療室内に患者以外の人がないことを確認して、治療室から退場してドアを閉める。
- (10) メイン操作卓の [X-RAY] を押す。([X-RAY] は照射中黄色点灯、照射終了時消灯) (イメージャ装置が 1 台の場合には、O リング (ガントリ) を次のイメージャ装置の撮像位置へ移動させて、再度実施する。)

- (11) イメージャコンソールで、イメージャ装置で取得した画像をもとに、照射ターゲット位置、大きさを確認する。
- (12) 操作室モニタの『Clinical Mode 画面 (Manual Parameter 設定)』で [LG 撮影] を選択する。
- (13) 操作室モニタの『Clinical Mode 画面 (Parameter 変更)』で LG 撮影パラメータ (オリング (ガントリ) 位置、線量) を入力する。
- (14) 操作室モニタの『Clinical Mode 画面 (Parameter 変更)』で、イメージャ装置で取得した画像をもとに MLC 形状を設定する。
- (15) リモコン、あるいはメイン操作卓の [G-AUTO] と [ENABLE] を同時に押して、オリング (ガントリ) を LG 撮影位置へ移動させる。
- (16) メイン操作卓の [BEAM キースイッチ] を ENABLE 側に回す。
- (17) メイン操作卓の [BEAM ON] が自動点灯 (緑色) し、治療室でブザーが鳴動する。
- (18) [BEAM ON] を押して照射を開始する。([BEAM ON] は黄色点灯、ブザー鳴動) 照射を中断する場合は、[BEAM OFF] を押すか、[BEAM キースイッチ] を DISABLE 側に回す。
- (19) 設定線量に達すると照射は自動的に終了する。([BEAM ON] は消灯、ブザー消音)
- (20) EPID モニタで、LG 撮影で取得した画像を確認する。
- (21) [BEAM キースイッチ] を DISABLE 側に回す。
- (22) 操作室モニタの『Clinical Mode 画面 (Manual Parameter 設定)』で [計画保存] を選択し、治療パラメータ (線量、GANTRY ROTATION、RING ROTATION の位置、MLC 照射野形状) を設定、保存する。
- (23) リモコン、あるいはメイン操作卓の [G-AUTO] と [ENABLE] を同時に押して、オリング (ガントリ) を治療位置へ移動させる。(必要に応じて実施)
- (24) 治療室内に患者以外の人がないことを確認して、治療室から退場してドアを閉める。
- (25) 操作室モニタの『Clinical Mode 画面 (Treatment)』で治療室内の状況を確認する。
- (26) メイン操作卓の [BEAM キースイッチ] を ENABLE 側に回す。
- (27) メイン操作卓の [BEAM ON] が自動点灯 (緑色) し、治療室でブザーが鳴動する。
- (28) [BEAM ON] を押して照射を開始する。([BEAM ON] は黄色点灯、ブザー鳴動) 照射を中断する場合は、[BEAM OFF] を押すか、[BEAM キースイッチ] を DISABLE 側に回す。
- (29) 設定線量に達すると照射は自動的に終了する。([BEAM ON] は消灯、ブザー消音) 次の門目がある場合は、(23) の手順から繰り返す。
- (30) 全門終了すると『Clinical Mode 画面 (終了)』が表示される。(この時、MLC は自動的に全閉)
- (31) 操作室モニタに『Stand-by Mode 画面』が表示され、スタンバイモードに移行する。

＜メンテナンス＞

1. 清掃保守点検

- 1) 装置は、次の使用に支障がないよう、必ず清掃等を行い清浄な状態で保管する
- 2) 清掃時の水、洗剤、消毒液等の使用は、装置の外表面のみとする
- 3) 液体が装置内部に入ると漏電などの事故の原因となるため、万一、装置内部に液体がかかったときには、す

ぐに電源を遮断し、清掃後十分に乾燥させてから装置を使用すること

2. 保守点検

- 1) 機器及び部品は、必ず定期点検を行うこと。
- 2) しばらく使用しなかった装置を再使用するときは、使用前に、装置が正常かつ安全に作動することを必ず確認すること。
- 3) メンテナンスモードを使用して、定期的に以下の点検、校正を行うこと。
 - ・照射機能の点検
 - ・撮像機能の点検
 - ・モニタ線量計の校正
 - ・赤外線カメラの校正

※故障の場合は、サービス担当者に、ご連絡下さい。

3. 保管環境

- ・温度範囲： 運転時 20℃～30℃
非運転時 0℃～40℃
- ・湿度： 30～75%、結露なきこと。
- ・大気圧： 700hPa ～ 1060hPa

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 本装置による放射線（電磁波又は粒子線）治療により、治療室内に持ち込まれた医用電子機器（人工呼吸器、輸液ポンプ、心電図モニタ、パルスオキシメータ等）に影響が及ぶことがある。（相互作用の項を参照）
2. 植込み型心臓ペースメーカ、又は植込み型除細動器の本体の植込み部に、パルス状の連続した X 線束を照射する検査を行う場合、これらの機器に不適切な動作が発生する可能性があります。検査や処置上やむを得ず、本体の植込み部位に X 線束を照射する場合には、植込み型心臓ペースメーカ、又は植込み型除細動器の添付文書の「重要な基本的注意」の項及び「相互作用」の項等を参照し、適切な処置を行うこと。
3. 取扱説明書に記載された装置の使用目的、運転、操作方法以外では使用しないこと。
4. 機器のモニタ線量計は定期的に校正すること。
5. 製造販売業者が指定した業者以外による保守、修理を実施しないこと。

相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）

併用注意（併用に注意すること）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
医用電子機器(人工呼吸器、輸液ポンプ、心電図モニタ、パルスオキシメータ等)	・放射線治療室内に持ち込むと、誤作動を引き起こす可能性がある。 ・処置上やむを得ず治療室内に持ち込む場合には、動作状況の監視を行うとともに、誤作動等の発生時に早急な対処ができるよう準備しておくこと。	放射線（電磁波又は粒子線）により、医用電子機器の回路に影響が及ぶことがある。
植込み型心臓ペースメーカ・植込み型除細動器	・植込み型心臓ペースメーカ又は植込み型除細動器の本体の植込み部位にパルス状の連続した X 線束を照射する検査を行う場合、これら	パルス状の連続した X 線束を照射する透視・撮影（数秒以内での連続した撮影、パルス透

取扱説明書を必ずご参照ください。

	の機器に不適切な動作が発生する可能性がある。 ・検査や処置上やむを得ず、本体の植込み部位にパルス状の連続したX線束を照射する場合には、植込み型心臓ペースメーカ又は植込み型除細動器の添付文書の「重要な基本的注意」の項及び「相互作用」の項等を参照し、適切な処置を行うこと。	視、DA撮影、DSA撮影、シネ撮影等）を行う場合、植込み型心臓ペースメーカ又は植込み型除細動器内部のC-MOS回路に影響を与えること等により、オーバーセンシングが起こり、ペーシングパルス出力が一時的に抑制されたり、不適切な頻拍治療を行うことがある。
電磁波を発生する機器	本装置の傍で携帯電話など電磁波を発生する機器の使用は、装置に障害を及ぼす恐れがあるので使用しないこと。	

妊婦、産婦、授乳婦への適用

＜次の患者には慎重に適用すること＞
妊婦、妊娠の疑いのある者、授乳中の者

その他の注意

- 1. 装置を廃棄する場合は、産業廃棄物となり、必ず地方自治体の条例・規則に従い、許可を得た産業廃棄物処分業者に廃棄を依頼すること。
- 2. 装置を点検するときは、必ず電源を切り、内部機器に触れないこと。（ネジ、ボルトで固定されているカバーを取り外さないこと。）
- 3. スイッチ類、特に安全に関するスイッチ類が正常に働かどうか、動作確認を行うこと。
- 4. 装置の動作前には、装置が患者やものに衝突しないか、よく周囲を確認すること。
- 5. 装置の操作前には、取扱説明書を良く読み理解しておくこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

有効期間・使用の期限（耐用期間）

7年〔自己認証（当社データ）による〕
※指定された保守点検を実施した場合の数値であり、使用状況、整備状況により変わります。

交換部品

主なものは、次の通り。

品目	交換頻度（目安）
吸気・排気フィルタ	1回／2年
冷却水フィルタ	1回／2年
UPS バッテリー	1回／2年
投光器ランプ	1回／年
加速管アセンブリ	1回／5年
モニタ線量計	1回／5年
EPID	1回／2年
サイラトロン	1回／5年
MLC モータ	1回／年
X線管（イメージャ装置）	1回／1.5年
FPD（イメージャ装置）	1回／3年

※交換頻度は参考値です。（上記の数値を保証するものではありません。）
※部品の中には一般市販部品も含まれ、型式変更などによる生産中止によって、耐用期間内であっても交換部品を供給できなくなる場合があります。
※交換部品については、弊社窓口又は弊社指定のサービス機関へお尋ねください。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

主なものは、次の通り。

項目	点検頻度	点検内容（概要）
外観	毎日	破損・変形・脱落の有無
		モニタの表示は正常か
		ランプ切れの有無
機械・制御盤	毎日	異臭・異常音の有無
ユーティリティ装置	毎日	温度・圧力は正常か
		漏れはないか
真空状態	毎日	真空度が保たれているか
作動状態	毎日	正しい線量が出るか
ユーティリティ装置	毎月	水量は適正か
SF6 ガス圧力	毎月	圧力は正常か
安全装置	毎月	正常に作動するか

※医療機器の保守点検については、医療法で定められています。
※使用開始前、運転終了後の点検の他にも、定期的な点検項目を定めて必ず点検を行ってください。
※本装置は、「特定保守管理医療機器」に該当します。
※本装置の安全使用のための責任者（医療機器安全管理責任者）を配置する必要があります。
※保守点検を実施した記録を作成・保存してください。
※点検内容については、装置付属の取扱説明書を参照してください。

業者による保守点検事項

※装置を長く安全に使用するために、定期点検を必ず行ってください。
※経験や専門的な知識・技術を要する定期点検については、弊社又は弊社が指定する業者に相談してください。
※主要な定期点検項目は次の通り。
・外装カバーの点検
・装置の内部清掃
・安全装置の動作確認
・装置の動作及び精度確認
・ユーティリティ装置の点検
※定期点検の内容については、装置付属の取扱説明書を参照してください。

問い合わせ先

三菱重工業株式会社 機械・鉄構事業本部（広島）
住 所：〒733-8553
広島県広島市西区観音新町四丁目6番22号
電 話：082-291-2153
ファックス：082-294-9888

取扱説明書を必ずご参照ください。

資料請求先

三菱重工業株式会社 機械・鉄構事業本部（広島）
住 所：〒733-8553
広島県広島市西区観音新町四丁目 6 番 22 号
電 話：082-291-2153
ファックス：082-294-9888

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：三菱重工業株式会社
住 所：〒733-8553
広島県広島市西区観音新町四丁目 6 番 22 号

製造業者：三菱重工業株式会社
機械・鉄構事業本部（広島）
住 所：〒733-8553
広島県広島市西区観音新町四丁目 6 番 22 号