

機械器具3 医療用消毒器
管理医療機器 エチレンオキシドガス滅菌器（JMDNコード：13740000）
特定保守管理医療機器（設置管理医療機器）

サクラ酸化エチレンガスカートリッジ式滅菌装置 EC-B

【警告】



- ・エチレンオキシド（酸化エチレン）は人体に対し有毒であり、強い燃焼性があるので取り扱いに注意する。
- ・ガスカートリッジは、適正な環境・状態で保管する。
- ・ガスカートリッジは、衝撃や熱を加えないように、また破損させないように慎重に取り扱う。
- ・ガスカートリッジを火中に投じない。

【禁忌・禁止】



- ・エキテック95以外のガスカートリッジを使用しない。
- ・装置の周囲に火気を近づけない。
- ・単独エアレーションの際は、ガスカートリッジをセットしない。
- ・装置内に引火性、爆発性の被滅菌物を入れて使用しない。
- ・医療用器材以外の物は滅菌しない。
- ・密閉された物は滅菌しない。
- ・放射線滅菌されたポリ塩化ビニール製品を再滅菌しない。

【形状・構造及び原理等】

【本体】

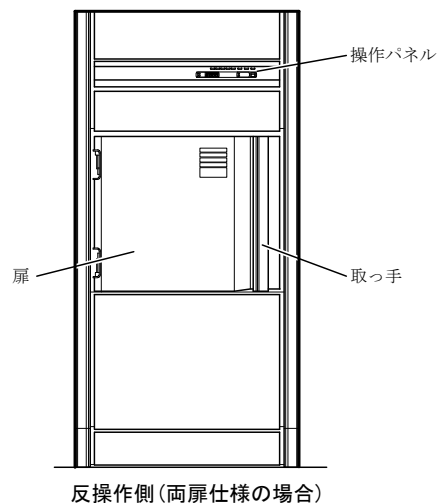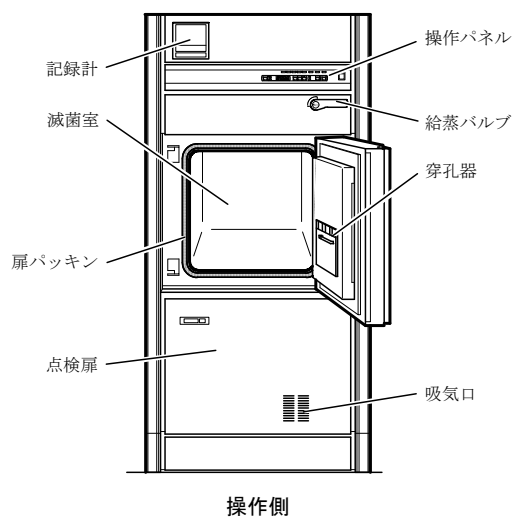

【操作パネル】

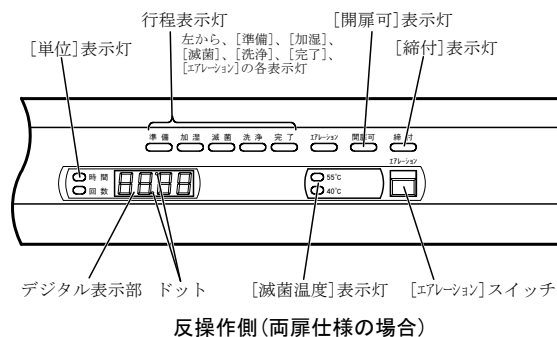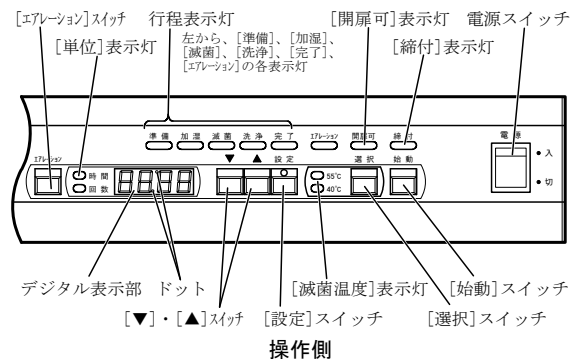

取扱説明書を必ずご参照ください。

〔必要とする設備〕

電源設備

周波数	50/60Hz
AC100V	15A 以上
AC200V 3φ	10A 以上
接地端子	D種以上

給蒸設備

圧力	0.3～0.4 MPa
容量	20 kg/h以上

給水設備

圧力	0.1～0.4 MPa
容量	5L/min 以上
温度	25℃ 以下

排気・排水設備

方式	単独屋外排気・排水
配管	SGP32A 以上

〔動作原理〕

エチレンオキシド(酸化エチレン)の入ったカートリッジを装置にセットする。

運転が開始されると、滅菌室内を真空ポンプで陰圧にした後、蒸気により被滅菌物の加温と加湿を行う。所定時間後、穿孔針がガスカートリッジに穴を開け、エチレンオキシドガスが滅菌室内に拡散して被滅菌物を滅菌する。設定した滅菌時間が経過したら、滅菌室内を減圧する動作と、大気圧近くまで圧力を戻す動作(フィルターを通した空気を入れる)を組み合わせてガスを排出する。

正常な運転状態から逸脱する場合は、エラーに応じた処置を装置が自動的に行った後、エラー表示及びブザーにより使用者に報知する

**【使用目的又は効果】

エチレンオキシド(酸化エチレン)ガスを用いて医療機器を滅菌すること。

**【使用方法等】

以下の手順の詳細は取扱説明書の第4章をご参照ください。

- ① 電源スイッチを「入」にする。
- ② 給蒸バルブを開く。
- ③ 扉を開き、扉パッキン、穿孔針を点検する。
- ④ 滅菌室に被滅菌物を入れる。
- ⑤ ガスカートリッジを、有効性を確認してから穿孔器にセットし、扉を閉じる。
- ⑥ 運転の条件設定を確認して、〔始動〕スイッチを押す。

自動運転が開始されます。滅菌・洗浄が終わり、エアレーションが終了すると、ブザーでお知らせします。

以降は、片扉仕様と両扉仕様の場合に分けて記述します。

《片扉仕様の場合》

- ⑦ 「開扉可」表示灯が点灯していることを確認する。
- ⑧ 扉を開き、被滅菌物を取り出す。
- ⑨ 使用済みのガスカートリッジを取り出す。
- ⑩ 扉を閉じる。
- ⑪ 給蒸バルブを閉じて、電源スイッチを「切」にする。

《両扉仕様の場合》

- ⑦ 反操作側で、「開扉可」表示灯が点灯していることを確認して扉を開く。
- ⑧ 被滅菌物を取り出して、反操作側の扉を閉じる。
- ⑨ 操作側で、「開扉可」表示灯が点灯していることを確認して扉を開く。
- ⑩ 使用済みのガスカートリッジを取り出す。
- ⑪ 操作側の扉を閉じる。
- ⑫ 給蒸バルブを閉じて、電源スイッチを「切」にする

【使用上の注意】

詳細は取扱説明書の第1章、第2章をご参照ください。

- ・エチレンオキシド(酸化エチレン)は、特定化学物質等のうち第2類物質に該当するため、労働安全衛生法で定める取り扱いをする。
- ・装置周辺は通風・換気を良くする。
- ・被滅菌物を取り出す前に、十分なエアレーションを行う。
- ・エアレーションを停止させたら、被滅菌物をただちに取出す。
- ・滅菌後の被滅菌物は換気の良い場所に置く。
- ・薬液や洗剤の付着した物は滅菌しない。
- ・サビ、ゴミ、油脂等を含まない蒸気、水を供給する。
- ・ドレーンの少ない蒸気を供給する。
- ・バイオロジカルインジケータを用いて、必要な滅菌条件を決定する。
- ・運転ごとに、バイオロジカルインジケータとケミカルインジケータを併用して滅菌のモニタリングをする。
- ・ガスカートリッジの有効性を確認する。

**【保管方法及び有効期間等】

*【使用環境】

周囲温度：10～40℃
相対湿度：30～85%RH（結露しないこと）
気圧：90～106kPa

〔耐用期間〕

耐用期間：製造出荷後 10年

条件：取扱説明書及び添付文書に記載された取扱注意事項あるいは保守・点検に係わる事項を順守し、定期的に日常点検・保守点検を実施すること。
点検結果により、下記に示す主要な構成部品や保守点検事項に記載された交換部品を必要に応じ交換すること。
保守部品として供給される主要な構成部品は下表の通り。

主要な構成部品名	使用耐用年数
真空ポンプ	5年
制御基板	4年
ヒーター	5年
記録計	5年

※ここに記載した装置の耐用期間及び主要な構成部品の使用耐用年数は保証期間ではなく、上記の条件を満たした場合での平均的な年数となるため、使用環境、使用方法などにより異なります。

取扱説明書を必ずご参照ください。

【保守・点検に係る事項】

〔使用者による保守点検事項〕

詳細は取扱説明書の第4章、第6章をご参照ください。

- ・滅菌室内 1週間に1回、水に濡らした布で清掃する。
- ・扉パッキン 1週間に1回、水に濡らした布で清掃し、傷等がないか点検する。
- ・ストレーナー 1週間に1回、滅菌室内のストレーナーを水で洗い、ゴミや汚れを落とす。
- ・給水ストレーナー 1ヶ月に1回、給水配管にあるストレーナーを清掃する。
- ・給蒸ストレーナー 1ヶ月に1回、給蒸配管にあるストレーナーを清掃する。
- ・吸気口フィルター 1ヶ月に1回、清掃済みのものと交換する。外したフィルターは水洗いする。
- ・外筒加温水 1ヶ月に1回交換する。
- ・ラインポンプストレーナー 1ヶ月に1回、外筒加温水交換時に、清掃を行う。

〔業者による保守点検事項〕

- ・扉パッキン 扉パッキンが傷ついたり、劣化したときに新品と交換する。
- ・穿孔針 6ヶ月ごと、または破損したときに新品と交換する。
- ・エアフィルター 1年に1回以上、新品と交換する。
- ・バッテリー デジタル表示部に、電圧低下を示す表示がされたら新品と交換する。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名 称：サクラ精機株式会社
電話番号：026-272-8381

製造業者

名 称：サクラ精機株式会社

取扱説明書を必ずご参照ください。