

## 機械器具 7 内臓機能代用器

### 管理医療機器 透析用血液回路セット 34999102

## NIKKISO 血液回路 (NK-A シリーズ)

### 再使用禁止

#### 【警告】

- 患者によっては透析中に、血圧低下等の重篤なショック症状が現れることがあるので、【使用上の注意】に特に注意すること。〔「使用注意」「有害事象」の項参照〕
- ヘパリンナトリウム等の血液凝固阻止剤を希釈、もしくは溶解して持続投与を行う場合には、ルアーロックタイプの注射筒や注入ラインを使用し、本製品と接続すること。〔注射筒等との接続が外れ、血液・補液等の漏れ、エア吸い込みのおそれがある。〕
- 動脈側血液回路及び静脈側血液回路上に輸液等の持続投与を行う場合には、ルアーロックタイプの輸液セット等を使用し、接続すること。ただし、接続外れ時に血液漏出等を防止できるアクセスポートを利用する場合は除く。〔輸液セット等との接続が外れ、血液・補液等の漏れ、エア吸い込みのおそれがある。〕

#### 【禁忌・禁止】


再使用禁止

#### 【形状・構造及び原理等】

- 本製品は、透析用血液回路セットの一部である。代表的構造図を以下に示す。
- 本製品は、チューブと各部品の組合せとなり、滅菌バッグごとに 1 セットが構成単位である。
- 本製品は主にポリ塩化ビニル(可塑剤:ジ・2-エチルヘキシルフタレート)を使用している。
- 本製品は高圧蒸気滅菌済、非発熱性である。
- 透析用血液回路セットの原理は、透析療法において患者から取り出された血液を、ダイアライザー等を通過させ、患者へ戻すものである。血液透析濾過療法又は血液濾過療法を行う際は、補助回路により補液を行う。

\*

| 部品           | 材料                                     |
|--------------|----------------------------------------|
| チューブ         | ポリ塩化ビニル                                |
| 各部品          | ポリ塩化ビニル、ポリプロピレン、ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタレート |
| アクセスポート(ゴム部) | 合成ゴム又はシリコンゴム                           |

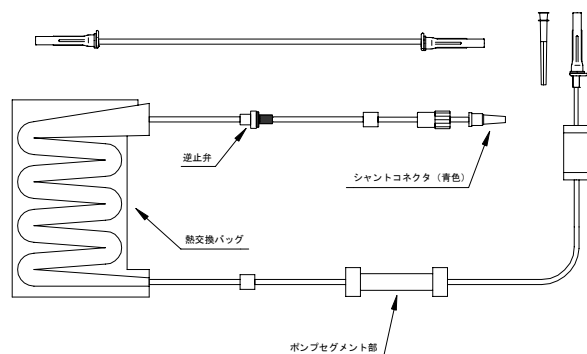

#### 【使用目的、効能又は効果】

血液透析の実施を目的としてダイアライザー等又は単回使用透析用針等に接続して、透析用監視装置等を用いて血液を循環させる目的で使用する。

#### 【品目仕様等】

- 補液ライン及び透析用補液洗浄セットに関する要求事項:  
JIS T 3248 4.8 に適合する。
- 血液回路補助用延長チューブに関する要求事項:  
JIS T 3248 4.9 に適合する。

#### 【操作方法又は使用方法等】

ここでは補助回路である本製品と併用して使用する透析用血液回路セットの使用法を示す。

##### 1. 準備するもの

- |                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| (1) 透析用血液回路セット(動脈側及び静脈側)           | 1 セット      |
| (2) 生理食塩液(洗浄用)                     | 1,000mL 以上 |
| (3) 抗凝固剤加生理食塩液(充填用)                | 500mL 以上   |
| (4) ソフトパック生理食塩液(パック式で通気装置を使用しないもの) | 必要量        |
| (5) 穿刺針                            | 必要数        |

- |                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| (6) ダイアライザー等                             | 1 本 |
| (7) トランスデューサ保護フィルタ<br>(ディスプレイ用) (圧モニター用) | 必要数 |
| (8) 廃液受け用バット                             | 1 個 |
| (9) 消毒済み鉗子及びトレイ                          | 必要数 |
| (10) 清潔な手袋                               | 1 組 |

##### 2. 洗浄及びプライミング

- 使用直前に使用期限内であることを確認の上、本製品を滅菌バッグから取り出す。
- 本製品の接続時には、破損や折れ等の変形がないことを確認し、汚染等が起こらないよう十分注意して接続する。
- 本製品とダイアライザー等との各接続部を接続後、増し締めし、緩みや脱落がないことを確認する。
- 血液ポンプに本製品のポンプセグメント部をセットした時は、ねじれ・たわみ・位置ずれがおこらないようにする。

- \* (5) 生理食塩液等で本製品内を洗浄し、十分にエア抜きをする。  
\* (6) プライミング中、生理食塩液等が液漏れしていないことを確認する。

##### 3. 透析開始

- 準備が完了していることを確認後、透析を開始する。

##### 4. 透析終了

- \* (1) 透析終了後は、生食置換返血法等を用いて返血を行う。

##### 5. 使用後

- (1) 使用済み製品は、周囲の環境を汚染しないよう十分な処置を講じた後に適切に廃棄する。

#### 【使用上の注意】

##### 1. 使用注意(次の患者には慎重に適用すること)

- 特に次の患者においては、状態に十分注意し、治療すること。〔有害事象に含まれる症状が現れる可能性がある。〕
- 低体重の患者
  - 高齢者
  - 妊産婦
  - 小児
  - 体重増加が大きく、短時間に急激な除水を必要とする患者
  - これまでに不均衡症候群を発生した患者
  - これまでに血液透析で血圧低下を経験した患者
  - アレルギーの既往症や過敏症反応の経験のある、あるいはおそれのある患者
  - 炎症反応・アレルギー反応・過敏症、あるいは感染症等により免疫機能が亢進している患者
  - 降圧剤を使用している患者
  - 本製品を初めて使用する患者

##### 2. 重要な基本的注意

- 全般
  - 本製品の使用に際しては、医師の指示に従って使用すること。
  - 本製品は使用患者の状態を考慮して使用すること。また、使用中は常に患者の状態を観察すること。
  - 使用する透析装置及びダイアライザー等の操作は、その機器の製造販売業者の添付文書及び取扱説明書等に従うこと。
  - 医薬品を使用する場合は、医薬品の添付文書を確認後使用すること。
- 本製品を用いて、脂肪乳剤及び脂肪乳剤を含有する製剤や油性成分、界面活性剤又はエタノール等の溶解補助剤を含む医薬品、および化学薬品等を使用する場合はコネクタのひび割れに注意し、異常がないことを適宜確認すること。ひび割れを発見した際は、回路交換等の適切な処置を行うこと。〔本製品の部品にポリカーボネート樹脂を使っている場合があり、破損するおそれがある。なお、過度な締め付けおよび繰り返しの締め付けは、ひび割れの発生を助長する要因となる。〕
- 本製品は可塑剤であるジ・2-エチルヘキシルフタレートが溶出するおそれがある。
- 対応装置:透析用監視装置、個人用透析装置
- 操作全般にかかわる注意
  - 本製品を鉗子で叩く等、強い衝撃を与えないこと。運送時には振動や衝撃を避けること。また、使用時は血液漏れ等、異常がないことを常時確認すること。〔本製品は、主にプラスチック部品で構成されているため、化学物質や衝撃等の影響で破損し、血液漏れ等が発生するおそれがある。〕
  - 本製品のコネクタに付属しているキャップにはシール性がないので、シールする場合には鉗子等を用いること。〔血液・補液等の漏れ、エア吸い込みのおそれがある。〕
  - 本製品の最高使用圧力は、陽圧 66.7kPa (500mmHg)、陰圧 66.7kPa (500mmHg) である。〔最高使用圧力を越えた場合、血液・補液等の漏れ、エア吸い込みのおそれがある。〕
  - チューブをクランプする場合、鉗子等で傷つけないよう注意すること。〔鉗子根本部又は先端部でクランプすると、チューブが破損し血液・補液の漏れ、エア吸い込みのおそれがある。〕
  - 本製品に組み込まれているクランプを閉じる場合は、チューブが確実に閉塞したことを確認し、常時観察できる状態で使用すること。〔完全に閉塞していない場合、血液・補液等の漏れ、エア吸い込みのおそれがある。〕

- 6) 本製品の使用中に、以下のような異常が発見された場合は、直ちに透析の中止、回路の交換等の適切な処置を行うこと。  
血液凝固、溶血、血液・補液等の漏れ、エアの吸い込み、本製品の破損等。
- \*\*** 7) コネクタを接続する際は、過度な力を加えないこと。[コネクタが変形し、外れなくなる、空回りする等、又はコネクタが破損し、血液・補液等の漏れ、エア吸い込み等のおそれがある。]
- (3) 洗浄及びブライミング
- 1) 包装や本体に破損等の異常が認められる場合や使用期限内でない場合は、使用しないこと。[無菌性が保持されていないおそれや、本製品の破損箇所からの血液・補液等の漏れ、エア吸い込みのおそれがある。]
- 2) 滅菌バッグ開封後は、他との接触をさせて取り出し、直ちに使用すること。[本製品が汚染され、菌が増殖するおそれがある。]
- 3) ブライミング時に液漏れ、エアの吸い込みがないことを確認すること。
- 4) 透析用針、輸液ライン等との接続部や開封前に接続されている延長チューブのように着脱可能な接続部及び注射筒等との接続部は、確実に接続を行い、使用中は接続部の緩み、外れに注意すること。なお、これらの接続部のロックリングは、外れを防止することを目的としているので、接続後、確実にロックリングを締めること。[接続が不十分な場合は、血液・補液等の漏れ、エア吸い込みのおそれがある。]
- 5) 血液ポンプにポンプセグメント部をセットするときは、血液ポンプの圧開度を適切に設定し、正しくセットすること。[調整が適切でない場合、送血・送液不良、血球の破壊、血液凝固のおそれがある。また、正しくセットしない場合、ポンプセグメント部亀裂及び送血・送液異常等のおそれがある。]
- 6) 本製品内のエア抜きは十分に行うこと。[エアが残っていると血液凝固の原因となる。また、空気塞栓等の重篤な障害の原因となる。]
- (4) 透析操作時
- 1) 血液が流れるライン・圧モニターライン等をクランプしている鉗子等を取り外し、異常のないことを確認した後、透析を開始すること。
- 2) 本製品の使用中、血液・補液等の漏れ、エアの吸い込み、本製品の各部位の破損やその他異常がないことを常時監視すること。また、シャント接続部を含む全ての接続部は常に目視で監視できるように、寝具等で覆わないこと。
- 3) 本製品の使用中はチューブの折れ、曲がりがないことを確認すること。[溶血、圧力異常による血液・補液等の漏れ、送血・送液異常のおそれがある。]
- 4) 血液透析ろ過、血液ろ過治療時に補液回路又はその接続部、熱交換バッグからの液漏れに注意すること。[液漏れが発生した場合、補液量の不足により過除水を引き起こすおそれがある。]
- \*** 5) ポンプセグメント部については、300mL/min 以上及び 24 時間以上の運転は避けること。[送血・送液異常やチューブ破損の原因となる。]
- 6) 透析用監視装置、個人用透析装置に表示された流量と実際の流量が異なる場合や経時的に流量が変化することがあるため、注意して使用すること。
- (5) 使用後
- 1) 「産業廃棄物等取締法」及び「医療廃棄物処理ガイドライン」等に従い、十分な処置を講じた後、一般廃棄物と区別して処理すること。[使用後は血液による汚染・感染のおそれがある。]

### 3. 不具合・有害事象

#### (1) 有害事象

一般的に透析中又は終了後に患者にいくつかの症状が起こることが報告されている。本製品使用中に、患者に万一異常な症状が認められた場合は、直ちに適切な処置を行うこと。

(例えば、血圧低下・血圧上昇・嘔気・嘔吐・胸痛・胸部不快感・気分不快・ショック・咳き込み・呼吸困難・悪寒・発熱・顔面紅潮・顔色不良・腹痛・下痢・頭痛・腰痛・背部痛・掻痒感・動悸亢進・頻脈・異常発汗・眼瞼浮腫・筋肉痙攣・耳鳴り・倦怠感・味覚異常・嗅覚異常・血小板減少・ヘマトクリット値上昇・ヘモグロビン量上昇・アルブミン濃度低下 等の症候あるいは症状)  
また、異常事態に備えて、透析中は常に患者の状態を観察すること。

#### 4. 高齢者への適用

高齢者へ使用する場合は、医師の指示のもとで慎重に行うこと。[循環器疾患等、合併症のある患者が多いため、透析中に不整脈や急激な血圧変動等を起こしやすい。]

#### 5. 妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用

妊婦又は妊娠している可能性のある婦人へ使用する場合には、医師の指示のもとで慎重に行うこと。[妊娠している患者の透析方法についての明確な指針は確立されていない。]

小児へ使用する場合は、医師の指示のもとで慎重に行うこと。[低血圧や不均衡症候群を起こしやすい。]

### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

貯蔵方法: 水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

使用期限: 滅菌日から 3 年以内に使用すること。(自己認証による)

### 【包装】

輸送包装単位: 1~240セット/箱

### \* 【主要文献及び文献請求先】

文献請求先

日機装株式会社 メディカル事業本部 営業推進部  
〒150-6022 東京都渋谷区恵比寿 4 丁目 20 番 3 号  
Tel. 03-3443-3751

### 【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等】

製造販売業者:

日機装株式会社  
〒150-6022 東京都渋谷区恵比寿 4 丁目 20 番 3 号  
Tel. 03-3443-3751

製造業者:

エム・イー・日機装株式会社  
(M.E.NIKKISO CO.,LTD.)  
タイ