

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
管理医療機器 経皮泌尿器用カテーテル 70264000
*(非血管系バルーン用加圧器 17541020)
*(汎用ストップコックバルブ 35375001)

ウロマックス バルーンカテーテル

(ウロマックス ウルトラ、ウロマックス ウルトラキット)

再使用禁止

【警告】

使用方法

- (1) アンコール インフレーター使用時は、コネクタ部分の接続が完全であることを確認して気泡が入らないようにすること。接続部分はすべて手で締めること。締めすぎると亀裂や漏れの原因となることがある。
- (2) アンコール インフレーター使用時は、システム内にエアが閉じ込められていないか慎重に検査確認し、注入前に完全にエアを除去すること。
- (3) アンコール インフレーターは、わずかに回転させるだけで圧力が大きく変化する。過剰な圧力を避けるために、圧力ゲージを継続的にモニタすること。
- (4) 偶発的な破損の発生を避けるため、アンコール インフレーターは注意して取り扱うこと。

【禁忌・禁止】

1. 適用対象(患者)

ウロマックス ウルトラキットに含まれる10mLプレッシャーゲージ付きインフレーターは、天然ゴムラテックスを使用している。天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがある。アレルギー反応を引き起こす患者には使用しないこと。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、適切な措置を施すこと。


2. 使用禁止

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、バルーンカテーテル及び付属品で構成されている。バルーンカテーテルの先端部に位置する円筒状のバルーンは内層、外層の2層構造で、高耐圧型になっており、放射状に膨張する。バルーン及びシャフトにはコーティングが施され、操作を容易にしている。

(1) バルーンカテーテル

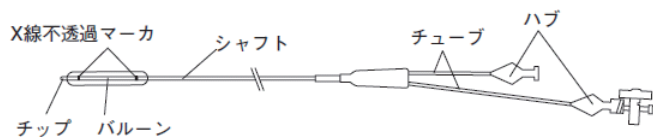

〈主な原材料〉

バルーン : ポリエチレンテレフタレート
コーティング : 親水性ポリマーコーティング、ポリエチレンコーティング

シャフト、チップ: ポリアミド(着色剤添加)


接着剤 : ウレタン系接着剤、紫外線硬化型接着剤

(2) 附属品

①ウイングツール



②ストップコック

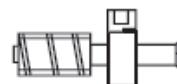


③プレッシャーゲージ付インフレーター


販売名: レビーン インフレーター

製造販売届出番号: 13B1X00043000004

③-1) 10mL(cc)プレッシャーゲージ付インフレーター(レビーン)

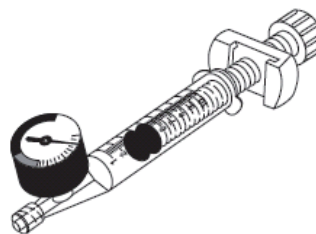


③-2) 接続チューブ

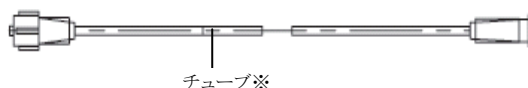

※ ポリ塩化ビニル

④プレッシャーゲージ付インフレーター


④-1) 20mL(cc)アンコール インフレーター (アンコール)

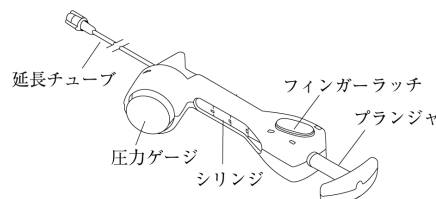

容量: 20mL(cc)

圧力ゲージ: 0~2600kPa(0~26ATMatm)

④-2 ストップコック

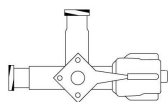

＜規格＞

シャフト 外径 (mm)	シャフト 有効長 (cm)	バルーン 有効長 (cm)	最大拡張圧 (kPa / atm)	バルーン 拡張径 (mm)
1.9 (5.8F)	75	4	2026/20	4
				5
				6
				7
				8
		6	1722/17	10
				4
				5
				6
				7
				5
				6
		10	2026/20	7

適合ガイドワイヤ径:0.97mm (0.038inch)

【使用目的、効能又は効果】

本品は、経皮的または経尿道的に尿管を拡張するバルーンカテーテルで、造影剤の注入を行うことができる。拡張目的部位に放射状の力を与えて拡張を行う。

【品目仕様等】

- (1) カテーテルの引張強度 (JIS T3247:2005の5.3項のとおり): カテーテルの任意の2所を3.9Nで引っ張ったとき、破断及びき裂を生じない。
- (2) カテーテル及びハブの接合部強度 (JIS T3247:2005の5.4項のとおり): カテーテル及びハブを把持し、4.9Nの力で引っ張ったとき、破断及びき裂を生じてはならない。
- (3) 拡張用バルーンの耐圧試験 (JIS T3247:2005の5.6項のとおり): 加圧器又はシリンジをハブに接続し、バルーンに規定圧 (最大拡張圧) の空気を注入して拡張したとき、バルーンの破裂又は漏れなどの異常があつてはならない。

【操作方法又は使用方法等】

●使用前の準備

本品を慎重に点検して、カテーテル又は滅菌包装のどちらも輸送中に損傷を受けていないことを確認する。損傷している場合には、その製品を使用しないこと。

バルーンから完全に空気を除去する。

- (1) ウイングツールをバルーン上の位置に残したままにし、ストップコックを開放の位置にセットし、ハブ (バルーンポート側) に取り付ける。
- (2) 10mL又は20mLのプレッシャーゲージ付インフレーター (以下、インフレーターという) をプランジャに押し付けた状態でストップコックに取り付け、インフレータの容量いっぱいまでプランジャを引いてその状態を保持し、ストップコックを閉じる。
- (3) インフレーターを取り外し、プランジャに押し付けた状態でストップコックに再度取り付け。ストップコックを開き(2)を再度行う。
- (4) ストップコックを開き、インフレータのプランジャの位置を確認することによって、バルーン及びチューブ (バルーンポート側) に異常がないかを確認できる。全ての接続が確実に行われ、バルーンが損傷していない場合は、手を離れた時に、

インフレータのプランジャがインフレータの底部まで自然に戻る。戻らない場合は、上記(1)～(3)を再度行って確認する必要がある。

- (5) バルーン内の真空状態を保つためにストップコックを閉にしたまま、インフレーターを取り外す。

●使用方法

(1) カテーテルの挿入

- ① 腎盂内で先端部をコイル状に巻き、ガイドワイヤを膀胱鏡下に配置する。
- ② ストップコックを閉じたままの状態、バルーンからウイングツールを取り外す。
- ③ ガイドワイヤ (適合ガイドワイヤ径: 0.97mm (0.038inch)) 上にバルーンカテーテルを前進させる。位置決めのためには、バルーン両端にあるX線不透過マーカを用いる。

(2) バルーンの拡張

X線透視下でバルーンを前に進め、拡張する狭窄部位にバルーンを配置する。バルーンはインフレーターで手動的に拡張することができる。


- ① インフレーターに生理食塩液で50%に希釈した造影剤を充填し、インフレーター及び接続チューブから空気を完全に除去する。
- ② ハブ (バルーンポート側) に接続したストップコックにインフレーターを取り付け、バルーン拡張用ルーメンにある空気をできるだけ除去する。
- ③ ストップコックを開き、拡張圧を確認しながらバルーンの拡張を開始する。
- ④ 拡張術が終了したら、バルーン内の造影剤を吸引し、バルーンを収縮させる。
- ⑤ ガイドワイヤルーメンからガイドワイヤを抜去し、造影剤を注入して造影を行い、拡張部位を確認する。

(3) カテーテルの抜去

- ① 造影による確認が終わったら、必要に応じて再度ガイドワイヤをハブ (ガイドワイヤポート側) から挿入する。
- ② バルーンが完全に収縮した後、カテーテルを反時計方向にゆっくり回すことにより、カテーテルシャフトの周囲にバルーンが折れたまま抜去が容易になる。
- ③ ガイドワイヤに沿わせて (ガイドワイヤを再度挿入した場合) ゆっくりとバルーンを抜去する。

●アンコールインフレータの使用方法

- ① 本品を片手で持ち、フィンガーラッチを押してプランジャのロックを解除する。
- ② プランジャを引き、シリンジに生理食塩液で50%に希釈した造影剤を充填する。
- ③ 5～8mL(cc)をシリンジ内に吸引し、真っ直ぐに立てた状態でシリンジ及び延長チューブからエアを除去する。
- ④ 本品のバルーンルアーポート上で液体のメニスカス (表面張力による凸面)を確認し、延長チューブをルアーポートに接続する。
- ⑤ 適切な容量までプランジャを引き戻し、フィンガーラッチを離しロックをする。これにより、カテーテルに陰圧を与え、バルーンを収縮した状態に保つことができる。
- ⑥ ロックした状態で、プランジャを時計回りに回転させて圧を上昇させる。プランジャを少しずつ回しながらボタンを押してフィンガーラッチを解除すると、減圧することができる。

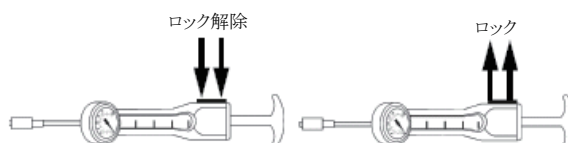

<使用方法に関連する使用上の注意>

- (1) カテーテルの挿入中あるいは抜去中に抵抗を感じたら、まず抵抗の原因を突き止め、適切な処置を行うまで、ガイドワイヤ又はバルーンカテーテルを前に進めないこと。
- (2) インフレーターはわずかな力を加えただけで非常に高い圧力を生じる可能性がある。弊社のプレッシャーゲージ付インフレーターを使用することを推奨する。
- (3) 推奨される最大拡張圧を超えないこと。最大拡張圧を超えて拡張させるとバルーンが破裂する可能性がある。
- (4) バルーン拡張中にバルーン内の著しい圧力低下が生じた場合や拡張中にバルーン破裂が生じた場合には、直ちに手技を中止すること。バルーンを慎重に収縮させ、再拡張は行わないこと。
- (5) カテーテルを通してガイドワイヤを抜去する際、又は内視鏡を通してカテーテルを抜去する際に抵抗が感じられた場合には、手技を中止すること。ガイドワイヤ、カテーテル又は周辺組織の損傷を防ぐために、一体にして抜去すること。
- (6) バルーンの親水性コーティングを無菌水又は生理食塩液等の生理溶液に約30秒間バルーンを浸けておくことにより活性化させること。
- (7) バルーンを金属部分を含むシステムに通す場合は注意を払うこと。バルーンの周囲にガーゼを巻きつけたり、乱雑に取り扱わないこと。また、乾いたガーゼ、無菌水や生理食塩液等以外の溶液で湿らせたガーゼでバルーンを拭かないこと。いずれも親水性コーティングを損傷させる可能性がある。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 本品は、一回限りの使用とし、再使用、再処理、又は再滅菌は行わないこと。[医療機器の構造上、支障が生じる可能性があるとともに、医療機器の故障、ひいては故障が原因となって患者の傷害、疾病あるいは死亡が引き起こされる可能性がある。また、医療機器が汚染される可能性とともに、患者の感染や交差感染が引き起こされる可能性がある。また、医療機器が汚染された場合、結果的に患者の傷害、疾病あるいは死亡につながる可能性がある。]
- (2) 本品は、エチレンオキシドガスによる滅菌済みの状態で供給される。滅菌包装が破損している場合は、本品を使用しないこと。
- (3) 本品の使用にあたっては、尿路拡張の専門的理論、臨床応用、及びこれらに関連するリスクについて、十分に理解しておく必要がある。
- (4) バルーンが結石のすぐそばにあるか又は結石と接触している状態で、バルーンを拡張させないこと。
- (5) ラベルの表示が不完全であったり、判読できない場合、本品を使用しないこと。
- (6) 包装が破損又は開封されている場合、本品を使用しないこと。
- (7) 脂溶性の医薬品等では、プレッシャーゲージ付インフレーター(レビーン)の接続チューブに使用されているポリ塩化ビニルの可塑剤であるフタル酸ジ(2-エチルヘキシル)が溶出するおそれがあるので、注意すること。
- (8) 本品及びガイドワイヤ(本品に含まれない)は損傷を受けやすい機器である。操作中に抵抗が感じられた場合、これらの機器を動かすことを中止して、その原因を調べること。
- (9) 輸送中に生じた損傷の有無を確認するために、使用前に点検すること。
- (10) 使用に関する特定の情報、最大拡張圧、注意事項、及び警告については、手技を開始する前に本添付文書をよく読むこと。(推奨される最大拡張圧を生体内で超過しないこ

と。)

- (11) 使用前に施術で使用する全装置の添付文書又は取扱説明書をよく読むこと。

2. 不具合・有害事象

本品の使用によって以下の有害事象が起り得るが、これらに限定されるものではない。

- (1) 組織外傷
- (2) 組織穿孔

3. その他の注意

使用後は、医療機関、行政及び地方自治体の定める規制に従って、製品及び包装を廃棄すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。有機溶媒、電離放射線あるいは紫外線などにさらさないこと。

2. 有効期間・使用の期限

本品は、包装上に記載されている「使用期限」までに使用すること。

【包装】

ウロマックス ウルトラ	バルーンカテーテル 1本
	ウイングツール 1個
	ストップコック 1個
ウロマックス ウルトラ キット	バルーンカテーテル 1本
	ウイングツール 1個
	ストップコック 1個
	プレッシャーゲージ付インフレーター (レビーン又はアンコール) 1個
	ストップコック 1個(アンコールのみ)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

** 製造販売業者:

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス
電話番号: 03-6853-1000

外国製造所:

アイルランド ボストン・サイエンティフィック アイルランド
リミティッド
[BOSTON SCIENTIFIC IRELAND LTD.]
アイルランド ボストン・サイエンティフィック コーク
リミティッド
[BOSTON SCIENTIFIC CORK LTD.]
米国 ナビリスト メディカル インコーポレイティッド
[Navilyst Medical, Inc.]