

機械器具 51 医療用尿管及び体液誘導管
管理医療機器 間欠泌尿器用カテーテル JMDN36125000

スピーディ カテ コンパクト

再使用禁止

【禁忌・禁止】


1. 再使用禁止
2. 封印シールが破損している場合、又はポリビニルピロリドン等張液が乾燥している場合は、使用しないこと。[水分が蒸発してカテーテルが十分に潤滑されず、尿道粘膜を傷つける可能性があります。]
3. 本製品は女性専用です。男性の尿道には長さが足りませんので、ご使用にならないでください。

【形状・構造及び原理等】

材質:ポリウレタン

本品は、カテーテルに親水性コーティングが施され、包装内にポリビニルピロリドン等張液が封入された泌尿器用カテーテルである。

<構造図>

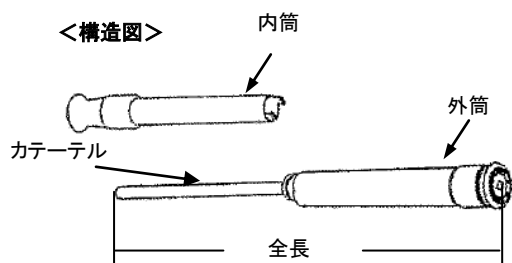

<規格>

種類名	外径 (CH/Fr)	全長(mm)	先端形状
ネラトン 女性用	8	140±5	2 孔 ストレート
	10	140±5	
	12	140±5	
	14	140±5	

【使用目的、効能又は効果】

膀胱内に挿入し、導尿、採尿等を行うための尿誘導用カテーテルである。

【品目仕様等】

本品は、JIS T 3214:2005 に適合する品目仕様である。


【操作方法又は使用方法等】

本品の使用は1回限りで、再使用できません。

1. 包装を開封する前に、挿入の準備を整えておきます。
2. 手を良く洗って清潔にし、必要に応じて手袋を着用します。
3. 尿道口及びその周辺を消毒します。
4. インナーチューブを下にして、垂直に製品を持ちます。(図 1)
5. 製品の下を持ち、ゆっくりと反対方向にねじって、シールを破ります。(図 2)
6. ゆっくりと外筒を内筒から引っ張り出します。完全に引っ張り出すとロックがかかります。外筒部分はカテーテルの持ち手になります。カテーテルは内筒の内側にあります。(図 3)
7. 外筒をしっかりと持ち、内筒をゆっくりとねじりながら、外筒から外し、カテーテルを出します。(図 4)



8. 内筒は廃棄するか、あとでカテーテルを入れて廃棄するために置いておきます。これでカテーテルの準備は完了です。
9. 片方の手で陰唇を開き、尿道口が見えるようにします。
10. もう片方の手でカテーテルを持ち、約 2 cm ずつゆっくりと挿入します。(図 5)
11. カテーテルが膀胱内に到達する直前に括約筋による抵抗を感じます。
12. 尿が流出し始めるまでカテーテルを挿入してください

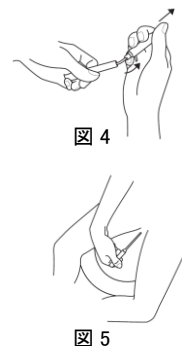

<カテーテルを抜くとき>

1. 尿の流出が止まったら、カテーテルを 1~2cm ゆっくりと引き抜き、尿の流出の有無を再度確認します。尿の流出を認めたら、しばらく待ち、さらに 1~2cm ゆっくりと引き抜いてください。
2. 膀胱が空になり尿の流出が終わったら、ゆっくりとカテーテルを引き抜き、カテーテルを適切に処分します。外しておいた内筒に使用後のカテーテルを入れて廃棄することもできます。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
 - ・本品を在宅等で患者若しくは家族が使用する場合には、本品の使用方法及び使用上の注意について医療従事者が指導を行ってください。
 - ・他の医薬品や医療機器と併用する場合には、それぞれの添付文書を確認して使用してください。
 - ・本品は医家向け製品です。医療従事者の指導の下に使用してください。
 - ・膀胱が空になったら、すみやかにカテーテルを抜いてください。
 - ・発熱等の尿路感染症の症状が現れた場合には、すみやかに使用を中止し、適切な処置を行ってください。
 - ・カテーテル挿入時に患者が痛みを訴えた場合には、すみやかに使用を中止し、適切な処置を行ってください。
 - ・包装内のポリビニルピロリドン等張液で衣類等が汚れないよう、注意してください。(ポリビニルピロリドン等張液は衣類に付着すると染みになる場合があります。)
 - ・再滅菌は行わないでください。
 - ・使用後は感染防止に留意し、すみやかに廃棄してください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法
 - ・包装の破損を防ぐため、重いものを上に置いたり、狭い場所に保管したりしないこと。
 - ・水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿、凍結を避けて保管すること。
2. 使用の期限
直接の包装及び外箱を参照(自己認証による)。

【包装】

1 本/滅菌包装 (30 本/箱)

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】**

製造販売業者名 :コロプラスト株式会社

住 所 :〒102-0074 東京都千代田区九段南
2-1-30 イタリア文化会館ビル

電 話 番 号 :03-3514-4141(代)

製造業者(製造国)

Coloplast A/S、コロプラスト エー/エス (デンマーク)

* Coloplast Hungary KFT、コロプラスト ハンガリー ケーエフティー
(ハンガリー)

