

歯科材料02 歯冠材料
管理医療機器 硬質レジン歯 70808000

デュラクロス

【禁忌・禁止】

本品又はメタクリレート系ポリマーに対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

形状：裏面の形態に記載

寸法：裏面の寸法に記載

組成：メタクリル酸エステル重合体、酸化ケイ素、顔料

構造：硬質レジン製のエナメル質層とアクリルレジン製のデンチン質層で構成される。

*試験方法：JIS T6506-2005

*【使用目的又は効果】

義歯に植立する硬質レジン製の既成人工歯

*【使用方法等】

- 1) 通法に従い、蠟堤上に排列して咬合調整を行います。
- 2) 通法に従い、義歯床用レジンを重ねし研磨します。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 1) アクリル系以外の義歯床用レジンを使用される場合は、メーカー指示による接着力を高める処置（アンダーカット付与）を基底面に行うこと。
- 2) エナメル部の形態修正を行った場合は、充分研磨すること。
硬質レジン歯は、従来のレジンに比べて、汚れが付着しやすい性質を持っています。研磨が不十分ですと、着色やプラーク付着の原因となります。
- 3) 強アルカリ性の石こう溶解材に浸漬しないこと。
- 4) 義歯床研磨にバレル研磨を使用する場合、過度の研磨により、形態や機能が損なわれるばかりでなく、チッピングや破折に至る場合があります。バレル研磨の際には、レジン歯部の保護を行うこと。
 1. ホットメルトによるレジン歯部の保護
 2. アルミ箔テープによるレジン歯部の保護

*【使用上の注意】

- 1) 重要な基本的注意
 - ① 本品の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状が現れた患者又は術者においては、直ちに使用を中止し、専門医の診断を受けさせるか、又は受けること。
 - ② 本品を研削する際には必ず保護メガネ等を着用し、破片が目に入らないように注意すること。
 - ③ 本品の研磨片が万一目に入った場合には、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。
 - ④ 義歯装着後、プラークなどが付着することがありますので入念に清掃するように患者さんを指導すること。
- 2) 不具合・有害事象
本品の使用に伴い、発赤、びらん、水疱、浮腫などの過敏症状が発生することがあります。

*【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・ 本品は、直射日光、多湿を避け、温度変化の少ない室温で保管すること。
- ・ 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ニッシン

住所：〒621-0001

：京都府亀岡市旭町樋ノ口88

電話番号：0120-571939（フリーダイヤル）

電話受付時間 月～金（祝日を除く）

午前10:00～午後5:00

製造元：日進歯科材料（昆山）有限公司

Nissin Dental Products (Kun Shan) Co., Ltd.

中国

発売元：株式会社モリタ

形態：

デユラクロス	前歯	上顎	SS形態（方形）	SS3	SS4	SS5	SS6
			SC形態（混合方形）	SC3	SC4	SC5	SC6
			TT形態（尖形）	TT3	TT4	TT5	TT6
			TC形態（混合尖形）	TC3	TC4	TC5	TC6
		下顎	OO形態（卵円形）	OO3	OO4	OO5	OO6
			OC形態（混合卵円形）	OC3	OC4	OC5	OC6
			SO形態（方・円形）	SO3	SO4	SO5	SO6
			T形態（尖形）	T3	T4	T5	T6
	臼歯	上顎下顎	C形態（混合長形）	C3	C4	C5	C6
			S形態（ショート形）	S28	S30	S32	
			M形態（標準形）	M28	M30	M32	
			S形態（四角形）	SS(4)	SM(5)	SL(6)	
		下顎	T形態（三角形）	TS(4)	TM(5)	TL(6)	
			O形態（丸型）	OS(4)	OM(5)	OL(6)	
			CL形態（混合ロング形）	CLS(4)	CLM(5)	CLL(6)	
			LR形態（標準形）	LRS(4)	LRM(5)	LRL(6)	
デユラクロスフイジオ	前歯	上顎	LL形態（ロング形）	LLS(4)	LLM(5)	LLL(6)	
			S形態（ショート形）	SS(28)	SM(30)	SL(32)	
			M形態（標準形）	MS(28)	MM(30)	ML(32)	
		下顎					
	臼歯	上顎下顎					
		下顎					

寸法：前歯(mm)

デユラクロス	上顎	形態	6 歯全幅径	左側中切歯の幅径	左側中切歯の長径
		SS3	38.5	7.5	9.5
		SS4	41.5	8.0	10.0
		SS5	44.5	8.5	11.0
		SS6	47.5	9.0	11.5
		SC3	41.0	7.5	9.5
		SC4	44.0	8.0	10.5
		SC5	47.0	8.5	11.0
		SC6	50.0	9.0	12.0
		TT3	39.0	7.0	9.5
		TT4	42.0	8.0	10.5
		TT5	45.0	8.5	11.0
		TT6	48.0	9.0	11.5
		TC3	39.5	7.0	10.0
		TC4	42.5	7.5	10.5
		TC5	45.5	8.0	11.5
		TC6	48.5	9.0	12.0
		OO3	40.0	7.5	9.5
		OO4	43.0	8.0	10.0
		OO5	46.0	8.5	11.0
		OO6	49.0	9.0	11.5
		OC3	40.5	7.5	10.5
		OC4	43.5	8.0	11.5
		OC5	46.5	8.5	12.0
		OC6	49.5	9.0	13.0
	下顎	SO3	31.5	4.7	8.5
		SO4	33.5	5.0	9.0
		SO5	35.5	5.3	9.5
		SO6	37.5	5.6	10.0
		T3	31.0	4.9	8.5
		T4	33.0	5.2	9.0
		T5	35.5	5.5	9.5
		T6	37.5	5.8	10.0
	下顎	C3	30.5	4.4	9.5
		C4	33.0	4.7	10.0
		C5	35.0	5.0	10.5
		C6	37.5	5.3	11.5

デユラクロスフイジオ	上顎	形態	6 歯全幅径	左側中切歯の幅径	左側中切歯の長径
		SS (4)	44.4	8.2	10.5
		SM (5)	47.4	8.7	11.1
		SL (6)	50.4	9.2	11.6
		TS (4)	44.4	8.2	11.0
		TM (5)	47.4	8.7	11.4
		TL (6)	50.4	9.2	12.5
		OS (4)	44.4	8.2	10.2
	下顎	OM (5)	47.4	8.7	10.5
		OL (6)	50.4	9.2	11.3
		CLS (4)	44.4	8.2	11.7
		CLM (5)	47.4	8.7	12.1
		CLL (6)	50.4	9.2	12.5
		LRS (4)	34.5	5.1	8.9
		LRM (5)	37.0	5.5	9.5
		LRL (6)	39.4	5.9	10.3
		LLS (4)	34.5	5.1	10.7
		LLM (5)	37.0	5.5	11.4
		LLL (6)	39.4	5.9	12.4


寸法：臼歯(mm)

デユラクロス	上顎	形態	片側4歯全幅径	第一小臼歯の長径
		S28	28.0	7.0
		S30	30.0	7.5
		S32	32.0	8.0
		M28	28.0	8.0
		M30	30.0	8.5
		M32	32.0	9.0
	下顎	S28	30.0	7.0
		S30	32.0	7.5
		S32	34.0	8.0
		M28	30.0	8.0
		M30	32.0	8.5
		M32	34.0	9.0
	下顎	SS (28)	28.0	7.7
		SM (30)	30.0	8.0
		SL (32)	32.0	8.8
		MS (28)	28.0	8.3
		MM (30)	30.0	9.0
		ML (32)	32.0	9.5
		SS (28)	30.0	7.2
		SM (30)	32.0	7.9
		SL (32)	34.0	8.5
		MS (28)	30.0	8.2
		MM (30)	32.0	8.4
		ML (32)	34.0	9.1

【頬・唇舌面輪郭】



左側上顎中切歯

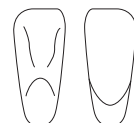

左側下顎中切歯



左側上顎第1小臼歯