

機械器具（30）結紮器及び縫合器
体内固定用組織ステープル（単回使用メス） JMDNコード：35615003
高度管理医療機器

再使用禁止

EES リニヤー カッター セレクタブルカートリッジ

【警告】

1. 本品使用後は、ステープルラインを十分に観察し、出血やリーク、エアリークなどがなく、適切にステープルが形成されていることを必ず確認すること。出血やリーク、エアリークが認められる場合は、速やかに電気メスや追加縫合等の適切な方法により処置を行うこと。
2. ファイヤ前に、本品に組織が均一に取り込まれていることを必ず確認すること。組織の不均一な取り込みはステープルの形成不全を引き起こし、縫合部で出血やリーク、エアリークを起こす原因となる。

【禁忌・禁止】


1. 再使用禁止。
2. 再滅菌禁止。
[再使用・再滅菌を行うと以下の恐れがあるため。]
・ 本品の構造的性能低下や機能不良による患者への影響の発生。（損傷、発病、死亡等）
・ 本品の汚染や患者の感染、患者間での感染症の伝染を含む二次感染による患者への影響の発生。（損傷、発病、死亡等）
3. 後述の「【形状・構造及び原理等】3. 製品コード」を確認し、形成されるステープルの高さを確認すること。選択したステープルの高さに圧縮するのに過度の力を要する組織や、容易に圧縮できる組織には使用しないこと。
4. 壊死、虚血部位には使用しないこと。
5. 大動脈には使用しないこと。
6. 中枢側及び末梢側の止血の事前準備がなされていない限り、本品を主要血管に使用しないこと。
7. 圧縮した際に組織損傷につながる肝臓や脾臓のような実質臓器には使用しないこと。
8. 外科的縫合が禁忌とされる症例には使用しないこと。
9. ステイプラーは、1回の手技中につきカートリッジの装填を12回まで行うことができる（合計12回までファイヤすることができる）が、それ以上の再装填は行わないこと。
10. 本品の原材料に感作又は金属アレルギーを示す可能性がある患者には使用しないこと。（ステンレス鋼はクロム等を含む。）

【形状・構造及び原理等】


1. 構成
本品は、組織に対してステープルを打ち込み、組織を縫合するためのステープルが充填されたカートリッジである。「本品専用のステイプラー」（別品目、後述の「3. 製品コード」を参照）に装填して使用する。消化器外科、婦人科、胸部外科等において、組織の切離・切除及び吻合・縫合に用いる縫合器であり、ステープルラインや組織の補強材と共に使用することができる。ステイプラーを操作することによってステープルが打ち出され、3列交互のステープルライン（縫合長）が2本（合計6列）形成される。同時に、カートリッジに内蔵されたナイフがステープルラインの間を走り、組織が切断される。

2. 各部の名称

<ステイプラー（別品目）>

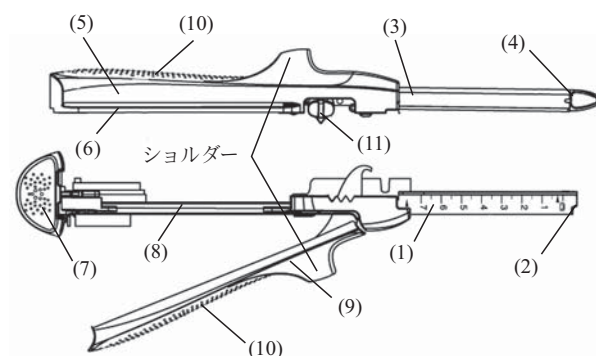

<カートリッジ>

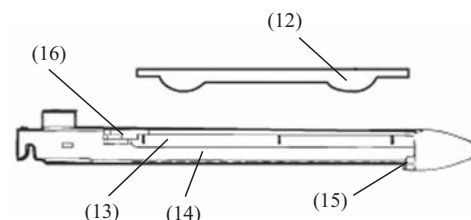

- (1) カートリッジフォーク（ステンレス鋼[※]）
- (2) アライメントスロット（ステンレス鋼[※]）
- (3) アンビルフォーク（ステンレス鋼[※]、ポリカーボネート[※]）
- (4) アンビルチップ（ポリアミド[※]）
- (5) アンビルハーフ
- (6) ロッキングリブ
- (7) ファイヤリングノブ
- (8) カートリッジハーフ
- (9) ロッキングレバー
- (10) グリッピング
- (11) ステープルハイトセレクター
- (12) ステープルリテイニングキャップ
- (13) カートリッジベース（液晶ポリマー[※]）
- (14) カートリッジトレイ（ステンレス鋼[※]）
- (15) アライメントタブ（液晶ポリマー[※]）
- (16) グリッピングサーフェス（液晶ポリマー[※]）

また、以下の部品がカートリッジに内蔵されている。

ステープル：チタニウム合金^{※※}
ナイフ：ステンレス鋼[※]
ドライバー：ポリエーテルイミド[※]

潤滑剤

ステアリン酸ナトリウム^{※※}
ジハイドロドデカフルオロペンタン[※]

[※]体液に接触する部分の原材料
^{※※}埋植される原材料

3. 製品コード

ステイプラー (別品目)	カートリッジ	ステイプル セレクト カラーの 位置	形成後の ステイプル の高さ (公称)	ステイプル 数	ステイプル ラインの長さ (公称)	カット ラインの長さ (公称)
NTLC55* ¹	SR55	ブルー	1.5 mm	88	61mm	58mm
		ゴールド	1.8 mm			
		グリーン	2.0 mm			
NTLC75* ¹	SR75	ブルー	1.5 mm	118	81mm	78mm
		ゴールド	1.8 mm			
		グリーン	2.0 mm			

*¹: [販売名: EES リニヤー カッター ステイプラー
(認証番号: 223AABZX00075000)]

【使用目的、効能又は効果】

本品は、外科手術（開腹・開胸手術等）において、組織に対してステイプルを打ち込み、組織を縫合するためのステイプルが充填されたカートリッジである。本品の使用で組織の縫合及び切離・切断が同時に行える。


【操作方法又は使用方法等】

本品ご使用前に必ず本添付文書をお読み下さい。


出血、リーク、エアリーク、破裂など臨床的トラブルを防ぐため、以下の手順に従って使用すること。使用前に、機器や付属品の適合性を確認すること（【使用上の注意】参照）。

操作方法


- (1) 無菌的にステイプラーとカートリッジを取り出す。破損防止のためステイプラー及びカートリッジを清潔区域に投げ出さないこと。
- (2) ロッキングレバーを完全に開いて、アンビルハーフとカートリッジハーフを分ける。

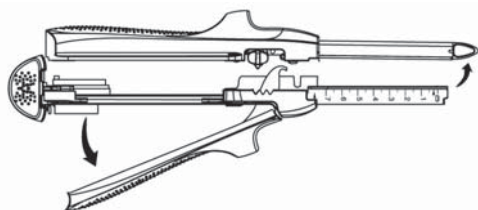


- (3) カートリッジのアライメントタブをアライメントスロットに差し込み、カートリッジを滑らせカートリッジフォークに合わせる。「パチン」という音がするまでカートリッジをしっかりはめ込む。

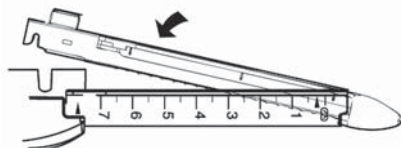


- (4) ステイプルリテイニングキャップの先端を持ち、上に持ち上げて外す。ステイプルリテイニングキャップは廃棄する。

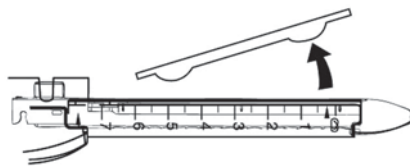


- (5) 縫合・切断予定部位の組織の厚みに合わせて、形成後のステイプルの高さを選択する。ステイプルハイトセレクトカラーインジケーター（ブルー、ゴールド又はグリーン）の色の位置に合わせることで、形成後のステイプルの高さを選択することができる。
- (6) 縫合・切断の際は、縫合・切断予定部位をアンビルフォーク及びカートリッジフォークで挟む。吻合の際は、アンビルフォーク及びカートリッジフォークをそれぞれ管腔の中に入れる。

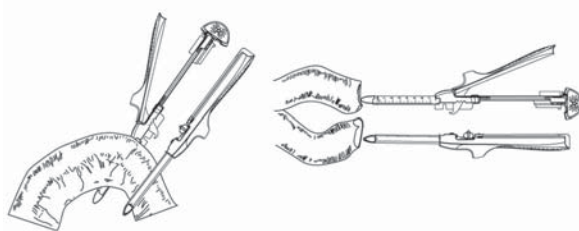


- (7) ロッキングレバーを完全に開いたまま、前方、中央、後方のいずれかから合わせてアンビルハーフとカートリッジハーフを組み合わせる。

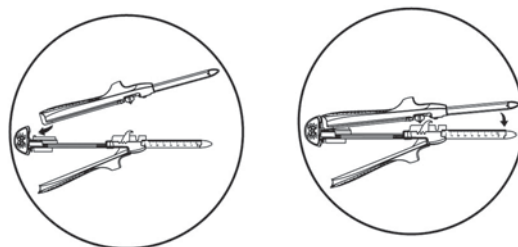


- (8) ファイヤする前に縫合・切断する組織の位置を調整するには、ロッキングレバーを半分まで閉じる。ステイプラーを組み合わせたままで位置の微調整ができる。

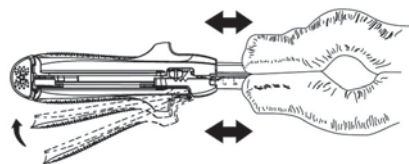


注意：アンビルフォークとカートリッジフォークの間で組織が均一に取り込まれていることを必ず確認すること。組織が重積すると、不完全なステイプル形成の原因となることがある。切離される組織は、カートリッジフォークの矢印の間に収まっていなければならない。矢印の外側にある組織は縫合範囲外である。

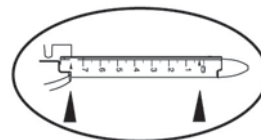


- (9) ステプラーを正しく組織に位置決めしたら、ロックingleバーを完全に閉じる。

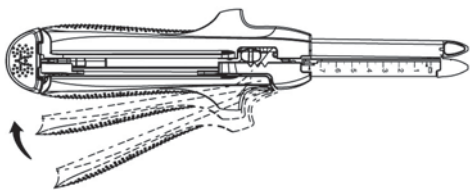


- (10) ステプラーを閉じた状態で、ファイヤリングノブを左右のいずれかに回転させる。

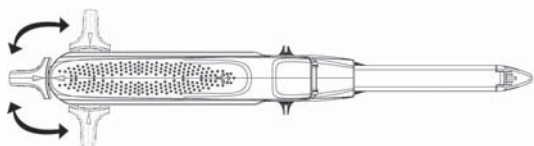

- (11) 親指をファイヤリングノブに添え、2本の指でショルダーを押さえる。ファイヤリングノブを完全に先端に押し出し、ファイヤする。

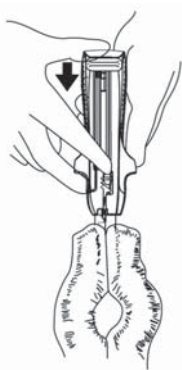


- (12) ファイヤリングノブを元の位置（本体に「Return Knob Here」と記載された位置）まで完全に戻す。

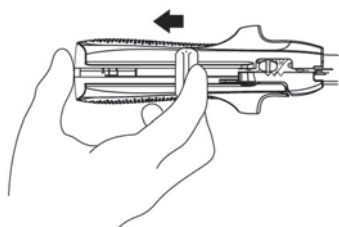


- (13) ロックingleバーを開き、アンビルハーフとカートリッジハーフを分け、組織から外す。ステープルラインが正しく形成されていることを必ず確認する。

カートリッジの交換


- (1) 無菌的にカートリッジを取り出す。破損防止のためカートリッジを清潔区域に投げ出さないこと。
(2) ファイヤリングノブが元の位置（本体に「Return Knob Here」と記載された位置）にない場合には、元の位置（本体に「Return Knob Here」と記載された位置）に戻す。

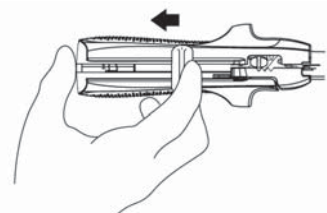

- (3) ロックingleバーを開いて、アンビルハーフとカートリッジハーフを分ける。
(4) グリッピングサーフェスを持ち上げ、カートリッジを外す。使用済みのカートリッジは廃棄する。

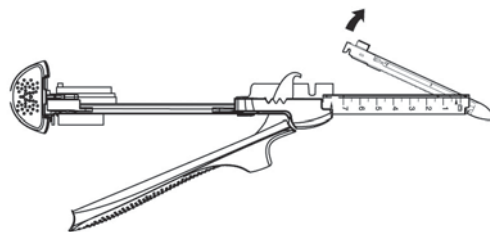

- (5) 新しい交換用カートリッジにステープルリテイニングキャップがついていることを必ず確認する。ステープルリテイニングキャップがついていない場合は使用せず、カートリッジを廃棄する。
(6) 新しいカートリッジのアライメントタブをアライメントスロットに差し込み、カートリッジを滑らせカートリッジフォークに合わせる。「パチン」という音がするまでカートリッジをしっかりはめ込む。ステープルリテイニングキャップを取り外して廃棄する。

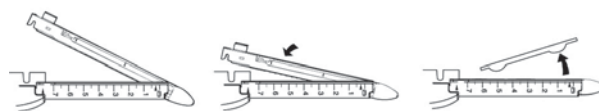

- (7) カートリッジの再装填が完了し、使用可能な状態になる。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 本書は「EES リニヤー カッター セレクタブルカートリッジ」の添付文書であり、外科的手術手技の参考書ではない。
(2) 低侵襲性手術は、適正な訓練を受け、その手技に精通している医師のみが行うこと。低侵襲性手術実施前には、手技、合併症、危険性に関する医学文献を必ず参照すること。
(3) レーザーや電気メス、超音波手術器具を使う場合、患者や医療従事者へのショックや熱傷、器具やその他の医療器械の損傷を避けるためその原理と技術をよく理解しておくこと。また、絶縁やアースが完全であることを必ず確認すること。耐水設計の表示がない限り、電気メスを液体に浸さないこと。
(4) ファイヤ前に、アンビルフォークとカートリッジフォークのずれがなく、組織が適切に挟み込まれていることを必ず確認すること。
(5) ファイヤ前に、組織の厚みを注意深く確認すること。
(6) ステープルラインに補強材を使用する場合、ロックingleバーを閉じる時、より強い力が必要になることがある。
(7) ステープルラインに補強材を使用する場合、ファイヤ時、より強い力が必要になったり、ファイヤ可能回数が減少したりすることがある。
(8) ステープルラインを交差させると本品の耐久性が損なわれることがある。
(9) カートリッジ装填後、カートリッジの表面を必ず確認すること。色付きのドライバーが見えた場合は新しいカートリッジと交換すること。ドライバーは、ステープルをステープルポケットから押し出し、組織を貫通したステープルは、アンビルフォークによって形成される。
(10) 組織あるいはステープルラインに補強材を使用する場合、補強材の製造元の添付文書及び取扱説明書に従うこと。
(11) ステープルの高さを選択する際、組織と補強材の合わせた厚みに基づいて選択すること。

- (12) カートリッジの交換前には、滅菌水に機器を入れ洗浄し、アンビルフォーク及びカートリッジフォークを拭き取り、前のファイヤ時のステイブルがアンビルフォークやカートリッジフォークに残らないようにすること。その後、必ず目視で確認し、アンビルフォークやカートリッジフォークにステイブルが残っていないことが確認できるまで本品を使用しないこと。
- (13) 主要な血管を縫合・切離する際は、中枢側及び末梢側の止血処置に関する基本的な外科手術の原則を遵守すること。
- (14) ステイブラーを適用部位に位置決めするとき、クリップやステント、ガイドワイヤー等障害物がアンビルフォークとカートリッジフォークの間にないようにすること。障害物の上からファイヤすると、不完全な切離や、不完全なステイブル形成の原因となる。
- (15) 厚い組織にファイヤする場合は、フォークを適切な位置で閉じた後、ファイヤする前に 15 秒間そのまま保持することでより良い圧縮とステイブル形成が得られる。
- (16) アンビルフォークとカートリッジフォークの間に組織が均一に取り込まれていることを必ず確認すること。組織が重積すると、不完全なステイブル形成の原因となることがある。切離される組織は、カートリッジフォークの矢印の間に収まっていなければならない。矢印の外側にある組織は縫合範囲外である。
- (17) ステイブルハイトセレクターによってステイブルの高さを選択する際には、病態や放射線治療のような患者に施された可能性のあるすべての術前処置を十分に考慮すること。特定の病状又は術前処置により、通常のステイブルの高さの選択の目安となる組織の厚みの範囲を外れるような変化が引き起こされる恐れがある。
- (18) ロッキングレバーを閉じることが困難な場合、ロッキングレバーを開いて本品の位置を再度調整し、取り込む組織の量を減らすこと。

2. 相互作用

(1) 併用注意

- 1) 低侵襲性手術器具は製造業者によって異なり適合しないことがある。これらを用いた時、予期せぬ結果を招き、使用者や患者に傷害を及ぼす恐れがあるため、異なる製造業者の器具や付属品を同時に使用する場合は、手術開始前にその適合性を必ず確認すること。

(2) 併用注意 (MR 環境下)

- 1) MR 環境下における安全性
非臨床試験において、体内に埋め込むチタニウム合金製のステイブルは MRI に条件付きで適合性があることが確認されている。ステイブルを使用された患者に対して、下記の条件下で MR スキャンすることができ。
 - ・ 3.0 Tesla 以下の静磁場
 - ・ 6.5 Tesla/m 以下の傾斜磁場強度
 - ・ 最大 1.8 W/kg の平均全身比吸収率 (SAR) での 20 分以下の MR スキャン
- 2) MRI に関連した温度上昇
非臨床試験では、下記条件下において、ステイブルラインには 0.4°C 以上の温度上昇がないことが確認されている。
 - ・ 3Tesla で、最大 1.8W/kg の平均全身比吸収率 (SAR)
 - ・ 送受信 RF ボディコイルを用いた 20 分間の連続 MR スキャン (パルスシーケンス毎)
- 3) アーチファクトに関する情報
撮影部位がステイブルライン付近または同一の部位にある場合、MR 画像の画質が損なわれる可能性がある。そのため、ステイブルによる画質低下を補正するために MR 画像の最適化が必要な場合がある。

最もステイブルラインの長い 75mm タイプを使用した時の無信号領域 (ワーストケース)：

パルスシーケンス	SE	SE	GRE	GRE
面配向	水平	垂直	水平	垂直
無信号領域 (mm ²)	554	30	707	70

3. 不具合・有害事象

本品の使用に伴い起こりうる不具合・有害事象として以下の様なものが考えられる。このような事象が発生した場合、症状に応じて追加縫合などの適切な処置を速やかに行うこと。

(1) 重大な不具合・有害事象

- 1) 出血
- 2) 縫合不全 (リーク、エアリーク)
- (2) その他の不具合
 - 1) ステイブル不完全形成
 - 2) ステイブルライン不完全形成
 - 3) 機器の破損

4. その他の注意

- (1) ファイヤ前に、ステイブルリテイニングキャップを必ず外すこと。
- (2) ファイヤ前の状態、及び／又はアンビルハーフとカートリッジハーフを組み合わせてロッキングレバーを閉じていない状態で、ファイヤリングノブを無理に動かさないこと。適切にファイヤできない恐れがある。ファイヤリングノブは、ロッキングレバーを閉じるまで回転させることはできない。
- (3) ファイヤリングは途中で止めないで必ず最後まで行うこと。ファイヤリングが不十分な場合、ステイブルの不形成・不完全形成の原因になることがある。
- (4) ファイヤ後、本品を開く前にファイヤリングノブを元の位置 (「Return Knob Here」 と記載された位置) に戻すこと。
- (5) ファイヤリングノブを元の位置 (「Return Knob Here」 と記載された位置) に戻さないと、本品を開くことができない。
- (6) ファイヤリングノブを元の位置 (「Return Knob Here」 と記載された位置) に戻した時、ナイフが露出していないことを必ず確認すること。
- (7) 本品を抜去する前に、組織がアンビルフォークとカートリッジフォークから離れていることを必ず確認すること。
- (8) カートリッジの交換中及び交換後は、ファイヤリングノブが元の位置 (「Return Knob Here」 と記載された位置) に戻っていることを必ず確認すること。
- (9) 体液が付着した器具は、感染防止のため、特別な廃棄手順が必要となる場合がある。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

- (1) 高温、多湿、直射日光及び水ぬれを避けて保管すること。
- (2) 包装材料に傷をつけたり、ピンホールを生じさせないように取扱うこと。
- (3) 製品の先入れ先出しを励行すること。
- (4) 製品に記載してある使用期限を必ず確認し、使用期限を過ぎたものは廃棄し使用しないこと。

2. 使用の期限

- (1) 使用期限は製品の包装に表示されている。[自己認証（当社データ）による]

【包装】

1 箱 12 個入り、1 個入り

【主要文献及び文献請求先】

文献請求先：

ジョンソン・エンド・ジョンソン 株式会社

〒 101-0065

東京都千代田区西神田 3 丁目 5 番 2 号

問い合わせ窓口 / 電話番号：03-4411-7905

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：

ジョンソン・エンド・ジョンソン 株式会社

〒 101-0065

東京都千代田区西神田 3 丁目 5 番 2 号

問い合わせ窓口 / 電話番号：03-4411-7905

製造業者：米国 Ethicon Endo-Surgery, INC.
Ethicon Endo-Surgery, LLC
エチコン エンドサージェリー社