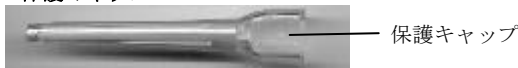


器 47 注射針及び穿刺針
管理医療機器 プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針 70204010
イントロカン セーフティ

再使用禁止**【禁忌・禁止】**

- ・ 再使用禁止
- ・ 内針をカテーテルに再挿入しないこと[カテーテルを傷つける可能性がある]
- ・ 高圧注入には使用しないこと [破損の恐れがある]
- ・ カテーテル及び内針には直接手を触れないこと
- ・ 保護クリップに触れないこと
- ・ 内針を曲げて使用しないこと
- ・ カテーテル内では、内針を前後に動かさないこと[カテーテルが折れたり、切断する可能性がある]
- ・ カテーテルを鉗子で挟んだり、爪でつぶすなどしないこと[カテーテルが折れたり、切断する可能性がある]
- ・ 屈曲部位にはカテーテルを留置しないこと[カテーテルが折れたり、切断する可能性がある]
- ・ 内針を抜き取る際には内針を途中で止めないこと[カテーテルが折れたり、切断する可能性がある]
- ・ 本品に使用されている原材料 (1 種、もしくはそれ以上) に対して過敏性を持つ患者には使用しないこと

【形状・構造及び原理等】**<構造図 (代表例) >****保護キャップ****末梢血管カテーテル (以下「カテーテル」と略す)****内針**

- ・ 固定用ウィング付カテーテルの規格もある。

<材質>

- ・ カテーテルチューブ：ポリウレタン
- ・ カテーテルハブ：ポリプロピレン
- ・ 針管：ステンレス鋼

【使用目的、効能又は効果】

本品は輸液等の静脈留置用に使用されるプラスチックカニューレ型のディスプレイザル留置針である。

本品には針刺し事故を防止する機能が付加されている。

【操作方法又は使用方法等】**<使用方法>**

1. 本品を包装より取り出す。
2. 内針針基を指でつまみ保護キャップをはずす。
3. 内針の刃面が上になるよう保持して、穿刺する。
4. 穿刺が成功すると、血液の逆流が直ちに透明な内針針基部分で確認できる。
5. 血管を確保したら内針針基を指で固定したままカテーテルだけを必要な深さまで進める。
6. カテーテル先端部の静脈を圧迫し、内針を引き抜き、カテーテルハブを輸液セット・輸血セットにしっかりと接続する。
7. カテーテルや輸液・輸血セット等のチューブをテープなどで固定する。

【使用上の注意】**<重要な基本的注意>**

1. 本品は、手技に習熟した医療従事者が、本品、及び併用する医薬品及び医療機器の添付文書を確認後使用すること。
2. 包装が破損、汚損している場合や、製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
3. 包装を開けたらすぐに使用し、使用後は感染防止に留意し安全な方法で処分すること。
4. カテーテル挿入から留置中、使用後の廃棄まで感染に留意し、取り扱いには注意すること。
5. カテーテルから抜き取った内針は、カテーテル内に再挿入しないこと。
6. 抜き取った内針は、感染に留意し、安全な方法で処分すること。
7. カテーテルを留置後、穿刺部位に静脈炎等が認められた場合は使用を中止すること。

<使用方法に関連する使用上の注意>

1. 血管の確保がスムーズに行えず、再度、穿刺しなおす場合は、新しい留置針を使用すること。
2. 血管を確保してからカテーテルハブ内に輸液セット等を接続するまでの間、カテーテル部を止血すること。
3. カテーテルから引き抜いた内針には針先を保護する保護クリップが付いていることを確認すること。
4. 内針を引き抜いた後は速やかに廃棄用の容器に廃棄すること。
5. 内針をカテーテルから抜き取る時は以下の点に注意すること。
 - 1) カテーテルから内針を抜き取る時、若干の抵抗がある。カテーテルが血管から抜けないように、カテーテルハブを指で固定しながら内針を抜き取る。万一、血管からカテーテルが抜けた場合は、新しい製品を使用すること。
 - 2) 万一、内針から保護クリップが外れカテーテルハブ内に残った場合は安全な方法で処理し、新しい製品を使用すること。
6. 保護キャップは内針針基を持って、片手で針先端側に向かってまっすぐ押し出すようにして外すこと。[カテーテルハブや内針との接触により、カテーテルがずれたり内針が曲がる可能性がある]

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】**<貯蔵・保管方法>**

- ・ 水濡れに注意し、直射日光および高温多湿を避けて保管すること。

<使用期限>

- ・ 本品は滅菌品で、使用期限は外箱に記載。[自社認証による]

【包装】

- ・ 50 本入/箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

- 製造販売元： ビー・ブラウンエースクラップ株式会社
 東京都文京区本郷 2-38-16
 問い合わせ窓口： マーケティング部
 TEL (03) 3814-2704
 製造元： ビー・ブラウン メディカル社 マレーシア
 B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd. Malaysia