

機械器具 06 呼吸補助器
管理医療機器 呼吸回路セット JMDNコード 70566000

ブリージングシステム

再使用禁止

【警告】


- ※ ◆ 本品を使用する際は、本品及び接続した呼吸回路等に閉塞やリークがないことを確かめてください[換気障害が生じる恐れがあります]。

【禁忌・禁止】

- ※ ◆ 再使用禁止。
- ※ ◆ 消毒・滅菌処理をしないでください[本品に変質等の品質上の不具合が生じる可能性があります]。

【形状・構造及び原理等】

- ※ 1. 構成
- ※ 本品は形状、寸法に示す部品で構成されている。
- ※ 2. 形状、寸法
- ※ 1) ラインチューブ・コネクタ(圧力ポートツキ)(51004575)

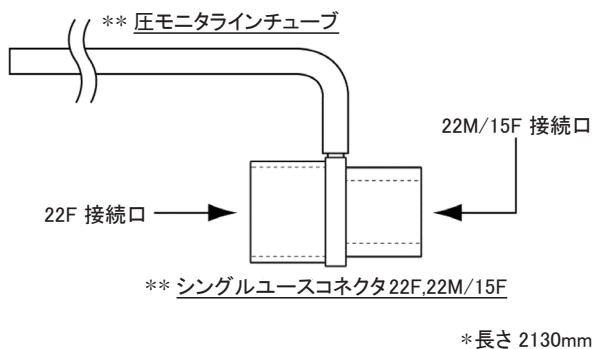

- ※ 3. 作動原理
- ※ 呼吸管等の内圧を測定するのに使用する。

【使用目的又は効果】

- ※ 人工呼吸器等に接続し、呼吸管理に用いる。

【使用方法等】

- ※ 1. シングルユースコネクタをYピースの呼気回路接続口と呼気回路の間など、接続したい場所に接続してください。
- ※ 2. 圧モニタラインチューブを人工呼吸器等の接続口に接続してください。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ※ ◆ 使用中に空気漏れ等の問題が発生した場合は、速やかに交換してください。
- ※ ◆ 圧モニタラインチューブに水滴が流入しないよう、圧モニタラインチューブ差込口が常に上になるように設置してください。(主要文献参照)
- ※ ◆ 圧モニタラインチューブに水滴が見られた場合には速やかに取り除いてください[水滴でチューブ内が閉塞し、アラームが誤作動したり、適正な換気が維持されない等の恐れがあります]。(主要文献参照)

- ※ ◆ 本品を人工呼吸器等に接続して使用する際は、呼吸回路にリーク及び分泌物による閉塞・流量抵抗の増大が生じていないことを確認してください。

＜その他の注意＞

- ※ ◆ 直射日光、高温、多湿な場所や、水濡れを避けて室温で保管してください。

【保管方法及び有効期間等】

- ※ <保管環境>
- 温度：-10～50℃
- ※ 湿度：15～95%(非結露)
- <使用期間>
- ※ 2週間を目安に使用してください(自己認証による)。

※ 【主要文献及び文献請求先】

- ※ (主要文献)
- ※ 薬食安発0825第2号/薬食機発0825第6号「人工呼吸器呼吸回路における気道内圧モニター用チューブに係る添付文書の自主点検等について」(平成21年8月25日、厚生労働省)
- ※ (文献請求先)
- ※ アイ・エム・アイ株式会社 レスピラトリ・ケア部
- ※ TEL: 03-6779-8414

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- ※ 製造販売業者の名称: アイ・エム・アイ株式会社
- ※ 製造業者名(国名): Vincent Medical (Dong Guan) Manufacturing Co., Ltd.
(ビンセントメディカル(ドングアン)マニファクチャリング社)(中国)