

機械器具 72 視力補正用レンズ
高度管理医療機器 挿入器付後房レンズ (JMDN コード: 35658400)

HOYA Vivinex アイサート

* (モデル XY1)

再使用禁止

【禁忌・禁止】

・使用方法について


- (1) 再使用禁止。
- (2) 再滅菌禁止。
- (3) 使用期限が過ぎている場合には、使用しないこと。
- (4) 包装の破損等により、製品の無菌性が損なわれていると考えられる場合には、使用しないこと。

【原則禁忌 (次の患者には適用しないことを原則とするが、特に必要とする場合には慎重に適用すること)】

- ・ 2 歳未満の小児 (「重要な基本的注意」の項参照)

【形状・構造及び原理等】


本品は、単回使用眼内レンズ挿入器に、後房レンズがあらかじめ装填された挿入器付後房レンズである。

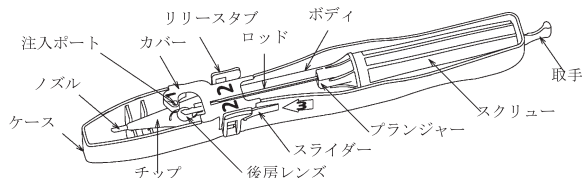

【材質】

紫外線吸収性黄色軟質アクリル樹脂
紫外線吸収剤: ベンゾトリアゾール系
着色剤: モノメチン系

* 【形状】

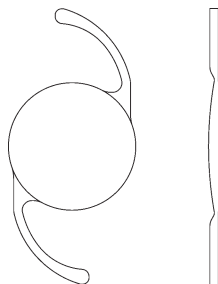

項目	モデル XY1
光学部径	mm 6.0
全長	mm 13.0

【原理】

本品は、ヒト混濁水晶体の置換及び屈折の補正の為に、水晶体の代用として挿入される眼内レンズである。

【使用目的、効能又は効果】

無水晶体眼の視力補正

【品目仕様等】


項目	単位	仕様
眼内換算主点屈折力	D	+20.0
結像性能	-	理論解像力の 60%以上

【操作方法又は使用方法等】


本品は滅菌済みディスプレイ製品であり、再使用はできない。無菌的に取り出し、術後の無水晶体眼に挿入する。

- ① 無菌的に滅菌バッグを開封し、取手を持ちながら本品を取り出す。


- ② 粘弾性物質注入ポート(刻印 1) から図 1 に示された点線内を満たすように眼科用粘弾性物質を注入する(図 1.)。この時レンズ光学部に粘弾性物質が十分に行き渡っていることを確認すること。

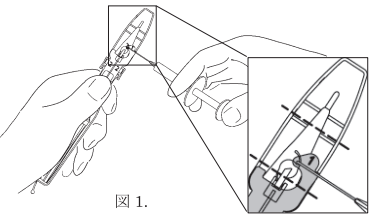


- ③ カバールのリリースタブ(刻印 2)を矢印の方向につまみながら持ち上げ、カバールをケースから取り外す(図 2.)。

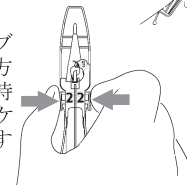

- ④ 挿入器のボディを親指で固定しながら、スライダをゆっくり矢印の方向(刻印 3)に完全に突き当たるまで移動させ、レンズを押し進める(図 3.)。押し進めた後の状態で 3 分以上放置しないこと。

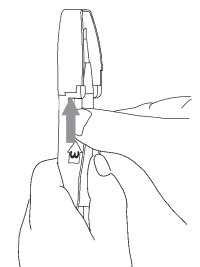

- ⑤ ケースから挿入器を取り外す(図 4.)。取り外し後は直ちに⑥に進むこと。

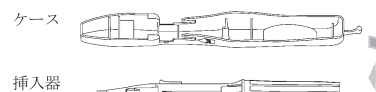

- ⑥ スクリューを時計回りに回転させる。その際、後方支持部(ループ)の先端がロッドによりレンズの光学部に向かってタッキングされること、また、レンズが前方に進むにつれ、前方ループの先端がレンズの光学部に向かってタッキングされること、およびロッドがレンズ後方縁のほぼ中央部を押していることを注意深く観察する(図 5.)。確認後は直ちに⑦に進むこと。タッキングが不適切な状態の場合、ロッドが左右どちらかによれている場合、および、ロッドの先端が光学部に乗り上げている、又はもぐり込んでいる場合は、使用を中止すること(図 6.)。

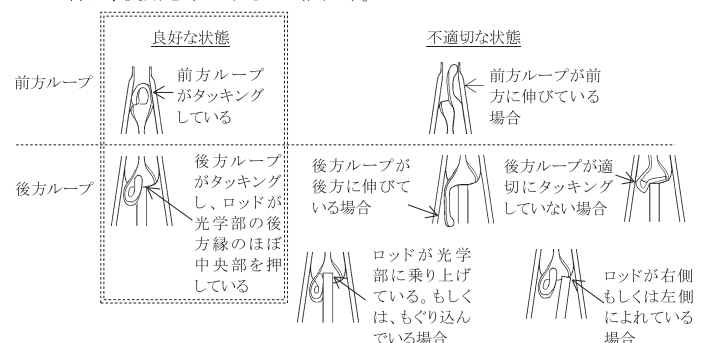
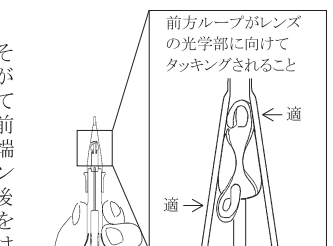


図 6.

- ⑦ ベベルダウンで、切開創から挿入器先端のノズルを囊内へ慎重に挿入する。

- ⑧ ゆっくりとスクリューを回転させて、囊内にレンズを放出する。その際、挿入器を回転させないこと。

【レンズパワー計算】 1) 2) 3)

A 定数及び前房深度予測値は参考値である。挿入レンズ度数を厳密に算定する場合には、使用している装置や、経験等に基づき、独自の数値を計算すること。

【A 定数及び前房深度予測値】

- ・ A 定数 : 118.9
- ・ 前房深度予測値 : 5.49mm (HofferQ 式)

【使用方法に関連する使用上の注意】

- (1) 本眼内レンズは後房に挿入すること。前房への挿入の安全性及び有効性は確認されていない。
- (2) 開封前に、眼内レンズの種類、度数及び使用期限について表示を確認すること。
- (3) 眼内レンズ及び挿入器に損傷、その他の異常がないことを挿入前に確認すること。破損している眼内レンズ、挿入器を使用した場合、組織の侵襲あるいは眼内レンズの固定状態に影響するおそれがある。
- (4) 眼内レンズ及び挿入器表面に異物や塵埃等付着物の無いことを挿入前に確認すること。
- (5) 本品は予めその使用方法に十分習熟してから使用すること。
- (6) 滅菌バッグから本品を取り出す際、本品を落下させないこと。
- (7) 粘弾性物質は使用に先立って室温(18～25℃を想定)に保つこと。
- (8) 粘弾性物質の注入量が少ないとチップ内壁の潤滑性が十分に得られず、レンズの放出挙動に異常が発生し、レンズの破損や眼組織を損傷する恐れがあるので注意すること。
- (9) スライダーの移動はゆっくりと行うこと。
- (10) スライダーを動かし始めたら逆方向には動かさないこと。
- (11) スクリューを回す際はゆっくりと行い、ロッドがレンズ後方縁のほぼ中央部を押していることを確認すること。
- (12) スクリューを回し始めたら逆方向には回さないこと。
- (13) レンズ挿入の際、レンズの表裏を反転させないこと。

【使用上の注意】

1. 使用注意(次の患者には慎重に適用すること)
 - (1) 2歳以上の小児
 - (2) 角膜内皮障害
 - (3) 緑内障
 - (4) ぶどう膜炎
 - (5) 糖尿病網膜症
 - (6) 網膜剥離
 - (7) 先天性眼異常
 - (8) 脈絡膜出血
 - (9) 浅前房
 - (10) 小眼球
 - (11) 角膜ジストロフィ
 - (12) 視神経萎縮
 - (13) 高眼圧
 - (14) 散瞳不良
 - (15) 弱視
 - (16) 角膜移植の既往のあるもの
 - (17) 虹彩炎
 - (18) 角膜異常
 - (19) 黄斑変性症
 - (20) 網膜変性症
 - (21) アトピー性疾患
 - (22) 偽落屑症候群及び毛様小帯脆弱例
 - (23) 毛様小帯断裂及び水晶体脱臼(亜脱臼を含む)
 - (24) 虹彩血管新生
 - (25) 重篤な術中の有害事象発生症例
 - (26) その他、全身的、眼科的理由により医師が慎重適応と判断した場合

2. 重要な基本的注意

- (1) 手術に先立ち、本眼内レンズ挿入の対象となる患者に、本眼内レンズの使用に伴って予期される効果と有害事象等について十分に説明すること。
- (2) 使用注意にあたる患者については、合併症の発生率が高くなる可能性や、十分な視力が得られない可能性があるため、十分な設備と使用経験を持つ眼科専門医のもとで、術後のフォローアップを含め適切に適用すること。
- (3) 小児については、小児の特性等について十分な知識と経験を有する眼科専門医のもとで眼内レンズ挿入術を行うこと。
特に 2 歳未満の小児においては、眼球のサイズから器具の挿入や操作が難しくなること、成長に伴う眼軸長の変化によって再手術の可能性が高くなることから報告されていることから、その旨を含めた十分なインフォームドコンセントを保護者に対して行うこと。
- (4) 活動期にあるぶどう膜炎や小児のぶどう膜炎患者については、外科的侵襲を加えることで、ぶどう膜炎の悪化や新たな合併症を引き起こすおそれがあるため、あらかじめ薬物治療を行い、炎症を鎮静化させた上で、眼内レンズ挿入術を行うこと。

3. 不具合・有害事象

眼内レンズ挿入術に伴い、以下のような不具合・有害事象が発生することがある。その際、レンズ挿入中止や摘出・再挿入が必要になる他、場合によっては、失明または不可逆的な視力障害等の重大な健康被害をきたすおそれがある。

【不具合】

- (1) レンズ光学部損傷(破損、キズ等)
- (2) レンズ支持部損傷(破損、脱落、変形、界面剥離等)
- (3) レンズ表面への異物付着
- (4) レンズ表面反射
- (5) レンズ光学部の変色・偽着色
- (6) レンズ混濁(グリスニングを含む)
- (7) レンズ脱臼
- (8) レンズ偏位
- (9) レンズ落下

【有害事象】

- (1) 角膜浮腫
- (2) 角膜炎(角膜びらんを含む)
- (3) 角膜内皮障害
- (4) 急性角膜代償不全
- (5) デスメ膜剥離
- (6) 結膜炎・結膜下出血
- (7) 前房出血
- (8) 前房蓄膿
- (9) 虹彩損傷
- (10) 虹彩炎(虹彩毛様体炎)
- (11) 虹彩癒着
- (12) 虹彩脱出
- (13) 瞳孔異常(ブロック、捕獲、変形、散大等)
- (14) ぶどう膜炎
- (15) 毛様小帯断裂
- (16) 毛様体炎膜
- (17) 後囊破損
- (18) 後発白内障
- (19) 硝子体炎
- (20) 硝子体出血・混濁
- (21) 硝子体脱出
- (22) 網膜組織(黄斑等)の剥離・円孔・裂孔等
- (23) 網膜剥離
- (24) 脈絡膜剥離
- (25) 脈絡膜出血
- (26) 黄斑浮腫・変性
- (27) 駆逐性出血
- (28) 眼内炎
- (29) フィブリン析出
- (30) 続発緑内障
- (31) 眼圧上昇(一過性眼圧上昇、高眼圧を含む)
- (32) 眼圧低下
- (33) 色視症
- (34) 視機能低下(視力・コントラスト感度)
- (35) 予想屈折値誤差
- (36) 創口閉鎖不全

4. その他の注意

- (1) 滅菌バッグ開封後は、無菌的に取り扱うこと。
- (2) 本品に同封されている眼内レンズ患者用カードに必要事項を記入し、患者に提供すること。他の医療機関を受診する際は、眼内レンズ患者用カードを提示するよう患者を指導すること。
- (3) 支持部にねじれ、強い衝撃など、無理な力が加わると折損する場合があるので注意すること。特に、狭すぎる切開創からレンズを無理に挿入しないこと。
- (4) 室内の温度によってはレンズが硬化する場合がある。また、保管温度によっても硬化する場合があるので、手術室(室温は 18～25℃を想定)に移動後は、30 分以上放置後、操作を行なうこと。
- (5) 輝点の発生⁴⁾に関しては、慎重な長期観察が必要と考えられる。注意して観察すること。
- (6) 使用後は、医療廃棄物として適切な方法で廃棄すること。

【臨床成績】⁵⁾

2009 年 7 月より 2011 年 8 月までに、国内の 3 施設にて、白内障患者 90 名 180 眼を対象として単盲検並行群間比較試験(本品レンズ、対照レンズ AF-1)が行われた。

《安全性》

＜安全性総合評価＞各被験者に関する安全性を、4 段階に分けて総合的に評価を実施した「安全性総合評価」の集計結果、本品レンズ群及び対照レンズ AF-1 群ともに「安全である」が 100%となり、有意差は検出されなかった。

＜後囊混濁発現率＞本品レンズ及び対照レンズの両方が挿入された被験者を対象とし、術後から 12 か月の観察期間中に 1 回でも細隙灯顕微鏡検査による後囊混濁が観察された眼を「後囊混濁あり」、それ以外の眼を「後囊混濁なし」とし、両群における後囊混濁発現率の比較を行った。本品レンズ群では 20.0%(15/75 眼)、対照レンズ群では 53.3%(40/75 眼)の割合で後囊混濁が発現した。両側有意水準 5%による比較有意差検定では $p<0.001$ を示したため、本品レンズが対照レンズに対して後囊混濁発現を有意に低減させたことが示された。

《有効性》

＜矯正視力＞有効性評価として、「術後遠方矯正視力 0.5 以上の割合」について検討した。最終評価時の術後遠方矯正視力において、本品レンズ群における遠方矯正視力 0.5 以上の割合は 98.9%、対照レンズ群は 100%と両群とも良好な視力成績を示した。最終評価時に本品レンズ群において 1 眼が 0.4 であった。最終評価時における「術後遠方矯正視力値」は、本品レンズの方が有意に良好であった。(P<0.01:wilcoxon の順位和検定)

＜有効性総合評価＞術後 12 か月目の遠方矯正視力と被験者の満足度から総合的に判定した「有効性総合評価」の結果では、「著効」及び「有効」を合わせた、「有効」以上の割合は本品レンズ群で 100%、対照レンズ群で 98.8%と高い割合を示した。

[AF-1:HOYA エイエフー1(UY) (承認番号 21600BZZ00479000)]

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

【貯蔵・保管方法】

高温多湿や直射日光を避け、25℃以下で保管すること。
ガス等の発生する場所には保管しないこと。

【使用期間等】

使用期限 (Exp.Date) は外箱に記載。
(上 4 桁は西暦、下 2 桁は月を示す。)

【包装】

1 個/箱

【主要文献及び文献請求先】

【主要文献】

- 1) Hoffer KJ. *J Cataract Refract Surg*, 19:700-711, 1993.
- 2) Retzlaff JA, et al. *J Cataract Refract Surg*, 16:333-340, 1990.
- 3) Holladay JT, et al. *J Cataract Refract Surg*, 14:17-24, 1988.
- 4) 西原仁, 陰山俊之ほか. 眼科手術 13: 227-230, 2000.
- 5) 社内資料

【文献請求先】

HOYA 株式会社 メディカル事業部

〒164-8545 東京都中野区中野 4 丁目 10 番 2 号
中野セントラルパークサウス 6F
電話番号 03-5913-2347

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

【製造販売業者】

HOYA 株式会社

〒161-8525 東京都新宿区中落合 2 丁目 7 番 5 号
電話番号 03-5913-2340(メディカル事業部日本統括本部代表)

【問い合わせ窓口】

HOYA 株式会社 メディカル事業部

〒164-8545 東京都中野区中野 4 丁目 10 番 2 号
中野セントラルパークサウス 6F
電話番号 03-5913-2343

【製造業者】

HOYA MEDICAL SINGAPORE PTE. LTD.

ホーヤ メディカル シンガポール PTE. LTD.
シンガポール