



Medi-Globe スフィンクテロトーム

再使用禁止

【警告】

使用方法

- 本品は、内視鏡的逆行性膵胆管造影法(ERCP)及び内視鏡的十二指腸乳頭括約筋切開術(EST)に精通し、不具合・有害事象の対処方法を熟知した医師、もしくは、そうした医師の指導監督のもとで使用する。
- 内視鏡モニターで視認して本品先端部が内視鏡から出ていることを確認する。これを怠ると、通電中に本品先端部と内視鏡との接触が生じることがある。さらにこれによって接地が起こり、その結果患者の傷害、術者の傷害、本品先端部の破損、又は内視鏡の損傷に至る可能性がある。
- 本品の使用前には、対極板が患者の皮膚に適切に装着されていることを確認すること。[感電のおそれがある。]
- 本品の操作中に抵抗を感じた場合は、直ちに操作を中止し、抵抗の原因を取り除くこと。[無理に操作すると、粘膜を損傷したり、内視鏡や本品が破損するおそれがある。]

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 再滅菌禁止
- 本品を分解・改造しないこと。[本品を正常に使用できず、患者に危害を及ぼすおそれがある。]

適用対象

- 【使用目的、効能又は効果】に示す目的以外では使用しないこと。

適用対象（患者）

次の患者には使用しないこと。

- ペースメーカーを装着した患者に本品を使用する際は、事前に循環器専門の医師あるいはペースメーカーの製造元に問い合わせをし、安全に対する十分な準備を行った上で使用すること。[ペースメーカーの誤作動や故障を引き起こし、患者に重大な影響を及ぼすおそれがある。]
- 内視鏡的逆行性膵胆管造影法(ERCP)が禁忌の患者。
- 内視鏡的十二指腸乳頭括約筋切開術(EST)が禁忌の患者。

使用方法


- 本品は、高濃度酸素の環境下または可燃性液体もしくは爆発性ガスの近くで使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】


No.	各部の名称
①	ハンドル
②	フィンガースライド
③	高周波コネクタ(安全キャップあり)
④	ルアーロックコネクタ
⑤	チューブ
⑥	ガイドワイヤーポート
⑦	保持コネクタ(ロータカットタイプのみ)
⑧	ルアーキャップ(シングルルーメン)

ハンドル形状

トリプルルーメン

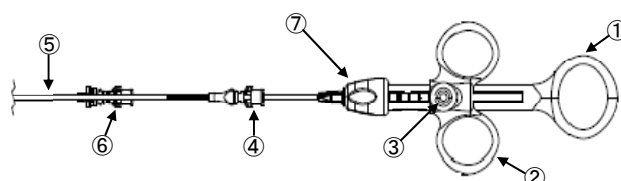

ダブルルーメン

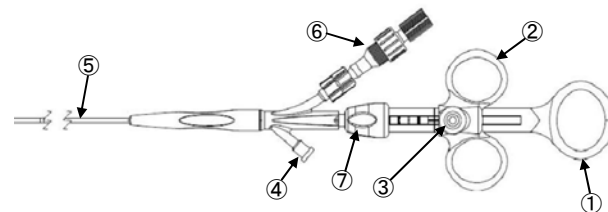

シングルルーメン

