

類別 機械器具06呼吸補助器
 管理医療機器 一般的名称 呼吸回路セット ** JMDNコード 70566000

再使用禁止

販売名 ディスポ呼吸回路 IS (ダブル呼吸回路)

【警告】

- ◆ 本品を接続する際に、本品及び接続した他の呼吸回路の構成部品に閉塞や漏れが生じないことを確認してください。
- ◆ 使用中は、接続した呼吸回路全体において閉塞や漏れが生じることのないよう常に観察してください。
- ◆ ウォータートラップに半分以上水を溜めた状態で使用しないでください[水が回路内を閉塞させるおそれがあります]。

【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

- ◆ 再使用しないでください[本品は単回使用向けのため]。
- ◆ コネクタ内側に内筒があるものには接続しないでください[回路が閉塞する可能性があります]。
- ◆ 消毒・滅菌処理しないでください[本品に収縮・破損など品質上の不具合が生じる可能性があります]。

* ◆ 可燃性麻酔剤と共に使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】

1. 外観・形状


* 注意：下記(1)～(4)の製品はポリ塩化ビニル製で、可塑剤としてフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを使用。

(1) 成人用ダブル呼吸回路 (ディスポ)




回路長	1.6m
チューブ径	22mm
患者側コネクタ	22M/15F
機械側コネクタ	22F
付属品	22M-22Mコネクタ

(2) 成人用ダブル加湿器用呼吸回路 (ディスポ)

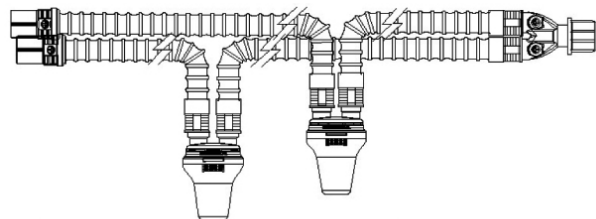


回路長	1.6m + 0.5m
チューブ径	22mm
患者側コネクタ	22M/15F 7.6mmポート付き
機械側コネクタ	22F
付属品	22M-22Mコネクタ

(3) 小児用ダブル呼吸回路 (ディスポ)

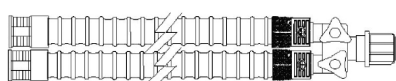


回路長	1.6m
チューブ径	15mm
患者側コネクタ	22M/15F 7.6mmポート付き
機械側コネクタ	22F
付属品	22M-22Mコネクタ

(4) 小児用ダブル加湿器用呼吸回路 (ディスポ)

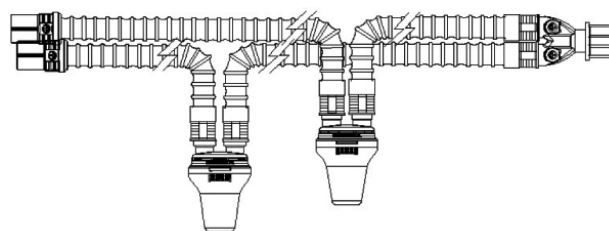


回路長	1.6m + 0.4m
チューブ径	15mm
患者側コネクタ	22M/15F 7.6mmポート付き
機械側コネクタ	22F
付属品	22M-15Mコネクタ 22M-22Mコネクタ 15M-22Fコネクタ

* (5) 成人用ダブル加湿器用呼吸回路FT (ディスポ)

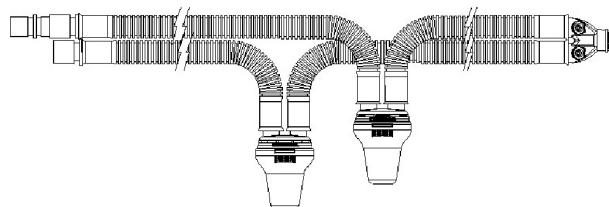

回路長	1.6m + 0.8m/22mm径
患者側コネクタ	22M/15F 7.6mmポート付き
機械側コネクタ	22F, 22M

* (6) 小児用ダブル加湿器用呼吸回路FT (ディスポ)

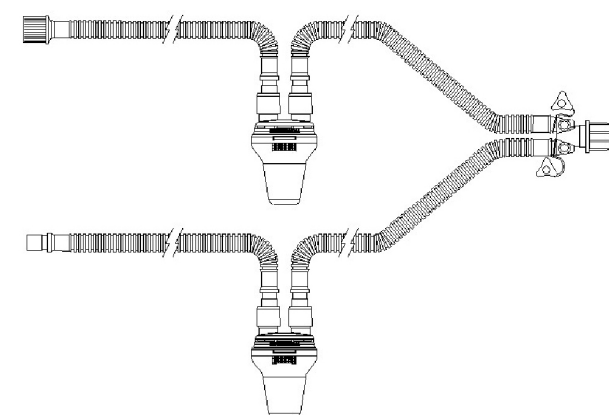

回路長	1.6m + 0.5m/15mm径
患者側コネクタ	22M/15F 7.6mmポート付き
機械側コネクタ	22F, 15M, 22M
付属品	22M-22Mコネクタ 22F-22Fラバーコネクタ (一端はISO5356-1非適合) 15F-22Fラバーコネクタ (22FはISO5356-1非適合)

2. 原理

呼吸管を通じて、人工呼吸器から患者さんへガスを送気するものである。

ウォータトラップは、呼吸管と呼吸管の間に配置し、重力による自然落下を利用して呼吸管内に付着した水分を貯留させる。

※【使用目的又は効果】

人工呼吸器等に接続し、呼吸管理に用いること。

※【使用方法等】

1. 準備

- (1) 包装を開封してください。包装は使用する直前に開封してください。包装が開いていたり、包装の封が不十分だった場合には使用しないでください。
- (2) 本品にひび割れなどの損傷が無いことを確認してください。異常が見つかった場合には使用しないでください。
- (3) 各接続部がしっかり接続されていることを確認してください。
- (4) ウォータトラップのカップ部分の接続を確実にするための注意喚起として、同封のシールをウォータトラップのカップ部分に貼付けてください。その際、ウォータトラップ内の水量の目視確認の妨げにならないようカップ部分の上部に貼ってください。

2. 使用方法

- (1) 患者接続口についているキャップを外してください。
- (2) 機械側コネクタを人工呼吸器に接続してください。
- (3) 患者接続口を人工呼吸器用マスクや呼吸回路用コネクタなどに接続してください。このとき、本品が構成するガスライン全体で、閉塞又はリーク（漏れ）などがないことを必ず確認してください。
- (4) 使用中は、接続した人工呼吸器のモニタ機能などにより、本品が構成するガスライン全体において閉塞又はリーク（漏れ）などの異常がないことを常にモニタしてください。万一異常が起きた場合には、直ちに使用を中止してください。

注:ウォータトラップの蓋の内側にある青い開閉蓋は、カップの取付け・取り外し毎に自動開閉する構造になっています。この開閉蓋の位置を動かした場合、カップを再接続できないことがあります。この場合、反時計回りに開閉蓋を回し、開閉蓋を閉めてください（最大で約2.5cm動きます）。開閉蓋が適正な位置になれば、カップは再接続できます。



3. 使用後

- (1) 接続した患者さん／機器から取り外してください。
- (2) 感染防止に配慮し、国内関連法規に則った方法で廃棄してください。また、本品は単回使用であるため再使用しないでください。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ※ ◆ （この項目削除）
- ◆ 本品は、本品及び本品と接続する他の呼吸回路構成品の取り扱いを熟知した医師の指示の下で使用してください。
- ※ ◆ （この項目削除）
- ※ ◆ （この項目削除）
- ◆ 使用中は常に患者さんの状態及び本品の観察を行い、異常が無いことを確認してください。
- ◆ 使用中に呼吸回路内に溜まった水分が気管内及び人工呼吸器・加温加湿器内に流入することのないように、呼吸回路構成部品全体の配置に気をつけてください。
- ◆ 使用後は感染防止に配慮し、国内関連法規に則った方法で破棄してください。

※【保管方法及び有効期間等】

※ 1. 保管方法

- (1) 室温下で保管してください。
- (2) 水に濡れないように保管してください。
- (3) 直射日光の当たる場所、高温・多湿な場所、過度なほこりが発生する場所、空気中に塩分や硫黄分を含む場所での保管は避けてください。

2. 使用期限

個別包装に記載されています。使用期限を過ぎたものは、使用しないでください。

【主要文献及び文献請求先】

- ※ アイ・エム・アイ株式会社 レスピラトリ・ケア部
TEL : 048-968-4442

※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者の名称：アイ・エム・アイ株式会社
製造業者名（国名）：Intersurgical Limited
(インターサージカル リミテッド) (英国)