

機械器具 49 医療用穿刺器、穿刺器及び穿孔器
管理医療機器 単回使用自動ランセット JMDN コード 37243002

再使用禁止

輸送採血ろ紙セット

【警告】

1. 使用後の採血器具のホルダーには血液が付着している可能性があります。使用後は速やかに廃棄してください。[感染の危険性があります。]
2. 感染の危険性があるため、採血部位の消毒を必ず行ってください。また採血後はばんそうこう等で止血と保護を行ってください。傷口が治りにくいときには、医師の指導を受けてください。
3. 採血器具の保護キャップを取り外した状態で放置しないでください。[刃が誤って発射される危険性があります。]

【禁忌・禁止】


1. 採血器具は再使用禁止です。使用後は必ず廃棄してください。
2. 指先以外での採血はしないでください。
3. 採血器具は分解や改造を行わないでください。
4. 採血器具は採血以外の目的で使用しないでください。
5. 使用時に採血器具の保護キャップが外れていたり、ゆるんでいる場合は使用しないでください。[保護キャップを外さない限り無菌性が保たれています。]
6. 出血性疾患や薬剤服用等により、止血機能が低下している患者、ショック・アレルギーのある方は使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】

<採血器具>

材質

刃	: ステンレス鋼
穿刺ボタン	: ポリアセタール
保護キャップ	: ポリエチレン
ホルダー	: ポリエチレン

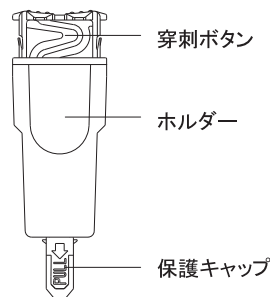

<ろ紙>

材質: コットン・セルロース

【使用目的、効能又は効果】

血液検査のための微量採血と血液採取を目的とします。採血器具は、放射線滅菌済みですのでそのまま直ちに使用できます。

【操作方法又は使用方法等】

1. 採血する前には流水(温水)でよく手を洗い、指先をマッサージしてください。
2. 採血器具の保護キャップを引っ張って、取り外してください。
3. 採血部位を消毒し、乾燥させてください。
4. 採血器具を人指し指と中指ではさんで持ち、ホルダーを採血部位に押し当ててください。採血器具を動かさないようにして、親指で穿刺ボタンを押すと刃が出ます。穿刺後、穿刺ボタンはホルダーに押し込まれます。
5. 採血部位より血液を採取してください。血液を採取する際は、指の上に血液が十分にたまってから、ろ紙に採取してください。
6. 血液を採取したろ紙は、水平な場所において完全に自然乾燥(1~2時間程度)させてから、入っていたチャック付き袋に入れ、提出するまで低温(冷蔵庫等)で保管してください。

7. 使用後の採血器具は、安全に廃棄してください。
※詳細な使用方法是取扱説明書をご参照ください。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

1. 指先から採血する場合は、穿刺前に、必ず流水でよく手を洗ってください。
2. 果物等の糖分を含む食品などに触れた後、そのまま指先から採血すると指先に付着した糖分が血液と混じり、血糖値が偽高値となるおそれがあります。[アルコール綿による消毒のみでは糖分の除去が不十分との報告があります。]
3. 以下のような末梢血流が減少した患者の指先から採血した場合は、血糖値が偽低値を示すことがあります。
 - ・脱水状態
 - ・ショック状態
 - ・末梢循環障害
4. 組織が薄い部位への穿刺を行うと、組織を貫通した針で指を穿刺し、血液を介した感染のおそれがあるため、添付文書上にある穿刺部位を守ってください。

<その他の注意>

1. 採血する際は、取扱説明書をあわせてお読みください。
2. 採血器具の保護キャップを取り外したらすぐに使用してください。
3. 採血時に採血器具のホルダーが採血部位から離れると、必要な採血量が得られない場合があります。採血時は「パチン」と音がするまでホルダーを採血部位から離さないでください。
4. 使用後の採血器具は、感染防止に留意し安全な方法で廃棄してください。
5. 使用期限内のものを使用してください。
6. 採血器具の刃先は非常に鋭利で危険です。取り扱いには十分注意し、小児の手の届かないところに保管してください。
7. 採血器具は、一度作動させると二度と作動しないので、採血時以外は作動させないでください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法
水濡れや、直射日光、高温多湿をさけて保管してください。
2. 使用期限
箱に記載しています。[自己認証(当社データ)による]

【包装】

100セット/箱

1セット	採血器具	2本
	ろ紙	1枚
	取扱説明書	1枚

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元	株式会社 旭ポリスライダー 〒719-3226 岡山県真庭市三崎 860-2 TEL 0867-42-1171
製造元	株式会社 旭ポリスライダー
販売元	栄研化学株式会社 〒329-0114 栃木県下都賀郡野木町野木 143 番地
問い合わせ先	栄研化学株式会社 お客様相談窓口 フリーダイヤル ☎ 0120-308-421

取扱説明書を必ずご参照ください

管理コード-版番号
01696-A