

オーラスター® 1.0S

ORASTAR 1.0S


【警告】

異常が起きたら使用を中止すること。

【禁忌・禁止】

- (1) 本機器は、不具合状態で使用しないこと。
- (2) 本機器の二次的加工（改造）は行わないこと。
- (3) 本機器専用のACアダプタ以外は使用しないこと。

※※【形状・構造及び原理】

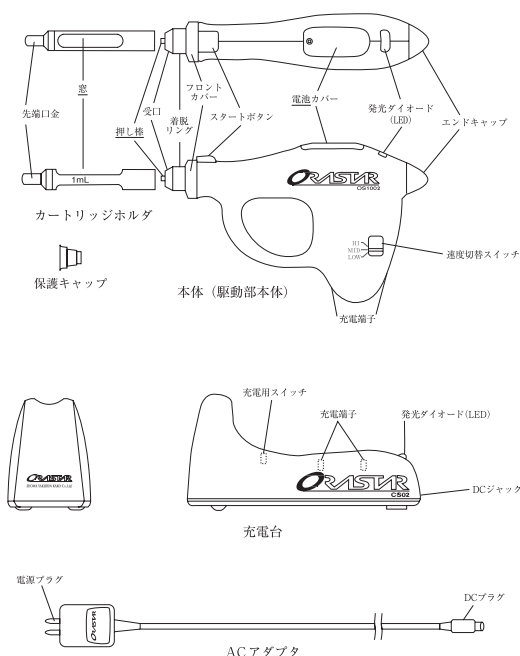

- (1) カートリッジホルダにカートリッジを装填して、これを本体に取り付けた後、針を取り付ける。
- (2) スタートボタンを押せばモータが起動し、薬液が排出される。
- (3) 薬液が、全量排出されるところまで押し棒が前進すると、リミットスイッチによりモータが自動的に停止する。
- (4) スタートボタンを軽く押せば、第1段目のスイッチが入り、Low(遅い)の速度で薬液が排出される。更に深く押せば、第2段目のスイッチが入り、速度切替スイッチにより、薬液排出速度をHigh(速い)、Middle(中間)、Low(遅い)の3段階に設定することができる。
- (5) 薬液の排出状況は、モータの回転に連動した発光ダイオード(LED)の点滅の速さにより認識することができる。点滅の速さはHigh(速い)で速く、Low(遅い)で遅い。

【EMC適合】

IEC規格 IEC60601-1-2：2001+A1：2004

CISPR11：2003+A1：2004 Group1 ClassBに適合。

【使用目的、効能又は効果】

本機器は、歯科治療の局所麻酔を行う際、薬液の入ったカートリッジを装填した後、歯科用注射針を取り付けて使用する。

※※【品目仕様等】

1) ACアダプタ

電源：交流 100V（商用電源）

周波数：50/60Hz

出力電圧：8.5V

2) 本体

電源：専用リチウムイオン電池 DC 3.7V, 150mAh

注入速度：①スタートボタン第1段目

注入速度：Low(遅い) 約200秒/1mL

②スタートボタン第2段目

注入速度：High(速い) 約60秒/1mL

Middle(中間) 約100秒/1mL

Low(遅い) 約200秒/1mL

寸法：D37×W168×H105 ±2mm

重量：270±27g

3) 充電台

寸法：D60×W157×H90 ±2mm

4) カートリッジホルダ

長さ：65±2mm

※※【操作方法又は使用方法等】

本機器の詳細な使用方法は、取扱説明書「使用方法」の項を参照すること。

- (1) ACアダプタのDCプラグを充電台のDCジャックに差し込み、ACアダプタの電源プラグをAC100Vのコンセントに差し込む。
- (2) 本体を充電台にセットし、充電する。
- (3) 1.0mLのカートリッジをカートリッジホルダに装填し、これを本体に装着させ、カートリッジホルダ着脱リングの操作によりカートリッジホルダが確実にセットされたことを確認する。
- (4) 市販の歯科用注射針を取り付け、速度切替スイッチを確認し、スタートボタンを押し、注射針から薬液が出ることを確かめた後、臨床に応用する。
- (5) 口腔内組織に接触する部分（カートリッジホルダ及びカートリッジホルダの先端口金）は、使用後よく水洗いしてオートクレーブで滅菌処理（121℃、20分）を行う。

※※【使用上の注意】

詳細については、取扱説明書を使用前に必ず読むこと。

- (1) 充電台は、水平でかつ誤って落下しない場所に置くこと。
- (2) 本機器は、落としたり衝撃を与えないこと。
- (3) 本機器は、歯科用カートリッジ式局所麻酔注射剤専用であるので、他の目的には使用しないこと。
- (4) 本体と充電台の充電端子は、ガーゼなどで清掃し、常に清潔に保ち、接触不良にならないように注意すること。
- (5) 本機器は常時充電台の上に載せ、満充電として使用すること。
- (6) **本機器は、防水されていないので水洗いせず、消毒用エタノールを用い清拭すること。**
- (7) カートリッジを装填したカートリッジホルダは、本体の受口の奥までしっかり差込み、着脱リングを操作しない限り抜けないことを確認すること。また、カートリッジホルダは、360度回転するように設計されているので、カートリッジホルダ及び受口を傷つけないように注意すること。
- (8) 針を取り付ける時は、上記(7)によりカートリッジホルダが装着されたことを確認した後、カートリッジホルダの窓から指でカートリッジを固定して行うこと。
- (9) 施療後、汚染された針に注意してキャップを施し、以後、上記(8)の逆の手順を行うこと。
- (10) カートリッジホルダをオートクレーブにかける前は、十分水洗いすること。
- (11) 充電時及び注射時は、常に発光ダイオード(LED)の作動に注意し、異常と思われる作動がある場合には適切な点検を行うこと。
- (12) スタートボタンを押した時に異常な振動や音がした場合、また、機能低下や不調が認められた場合には使用を中止し、製造販売業者の整備を受けること。
- (13) **本機器が故障した場合は、勝手にいじらずに製造販売業者の修理を受けること。**

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

<貯蔵・保管方法>

- (1) 直射日光、ほこり、水及び薬液等の影響がない清潔な場所で保管すること。
- (2) 本機器は、医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

<有効期間・使用の期限>

指定の保守・点検ならびに消耗品の交換を実施した場合の耐用期間

7年（自己認証による）

※※【保守・点検に係る事項】

<使用者による保守点検事項>

取扱説明書「日常の保守」等の項を参照して点検すること。

- (1) 本機器及び部品は必ず定期点検を行うこと。
- (2) 長期間使用しなかった時は、再使用時に本機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。
- (3) 1時間以上充電してもすぐに本体の赤のLEDが点灯する場合は電池の劣化が考えられるので、本体上部の電池カバーをドライバではずし、新しい電池と交換すること。

<業者による保守点検事項>

取扱説明書「保守・点検について」等の項を参照して点検すること。

- (1) 本機器が正常な動作をしなかったり、修理点検を要すると判断された場合には製造販売業者の保守点検を受けること。
- (2) 電池の交換を機会にメンテナンスの依頼をすることを推奨する。

※※【包装】

本体：1 カートリッジホルダ：2 保護キャップ：1

充電台：1 ACアダプタ：1 添付文書：1

取扱説明書：1 保証登録カード：1

※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：昭和薬品化工株式会社

住所 ：〒104-0031

東京都中央区京橋二丁目17番11号

電話 ：0120-369-873

(月～金曜日 9：00～17：30／祝祭日・当社休日を除く)

製造業者 ：昭和薬品化工株式会社

取扱説明書を必ず参照ください。



製造販売元

昭和薬品化工株式会社

東京都中央区京橋二丁目17番11号

1523F-14TA