

機械器具 74 医薬品注入器
高度管理医療機器 薬液注入用ノズル 70388000

ボルヒールスプレーチップ

再使用禁止

【禁忌・禁止】


1. 再使用禁止
2. ボルヒール以外の生体組織接着剤は使用しないこと。

〔本品はボルヒール専用であるため。〕

【形状・構造及び原理等】

1. 形状、構造

本品は2本のシリンジの先端部を接続するための二又の器具である。

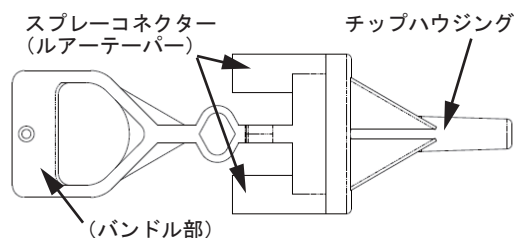

使用材料：ポリカーボネート

2. 原理

2本のシリンジを本品に接続することにより、シリンジに充填した薬品を混合・噴霧し、患部に塗布する。

【使用目的又は効果】

本品は2種類の薬液を混合しながら注入するための以下の医療機器専用のノズルである。

販売名：ボルヒール調製器セット
承認番号：22400BZX00212000
製造販売業者：ニプロ株式会社

【使用方法等】

1. 併用する医薬品

本品は以下の医薬品と併用して用いられる。

販売名：ボルヒール組織接着剤
承認番号：22100AMX01038000
製造販売業者：一般財団法人 化学及血清療法研究所

2. 操作方法

本品の標準的な操作方法を以下に示す。

- 1) ボルヒール調製器セットの操作方法に従い、フィブリノゲン溶液（A液）及びトロンビン溶液（B液）を充填したシリンジを用意します。（本品の構成品には含まれません。）
- 2) 2本のシリンジの先に本品を装着し、固定します。
- 3) プランジャーを強く押すことにより接着面へA液とB液を混合しながら噴霧します。
- 4) 使用後は安全な方法で廃棄します。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- *1. プランジャーホルダーの中心を押してください。プランジャーホルダーの中心から離れた位置を無理に押すと、シリンジ内で薬液の逆流・凝固が発生するおそれがあります。
2. 使用中に噴霧を中断すると本品が詰まります。噴霧を中断した場合はすぐに本品を取り外してください。
 3. 噴霧を再開する際には、新しい本品に付け替えてください。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- *1) スプレーチップを使用する度に新しいものに取り替えること。
〔スプレーチップ中で生体組織接着剤が硬化し、詰まりを起こすおそれがある。〕

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

外箱の製品ラベルを参照のこと（自己認証による）。

*有効期間：製造後3年

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売

ニプロ株式会社

電話番号：06-6375-6709

製造

ニプロ医工株式会社

供給（お問い合わせ先）

一般財団法人 化学及血清療法研究所

*電話番号：096-345-6500（分画事業部門営業部学術情報課）

使用方法説明書を必ずご参照ください。





ニプロ株式会社


ボルヒール®スプレーチップ 使用方法説明書

【 本機器は送気ガスなしで2液を霧状に塗布できる器具です 】

送気チューブやレギュレーターは必要ありません。

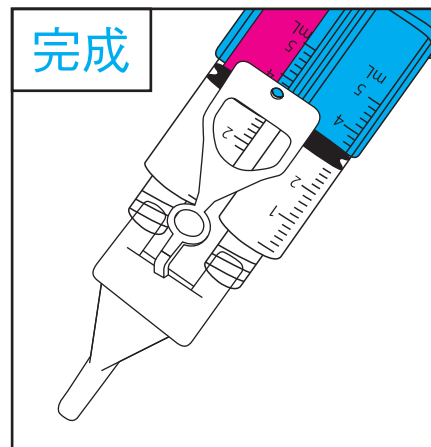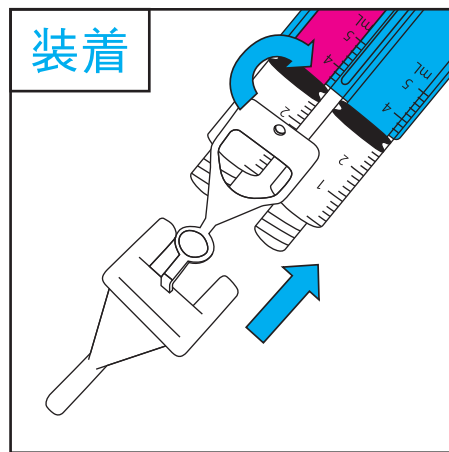

シリンジにスプレーチップを装着し、
バンドル部の穴をバレルホルダーに固定する。

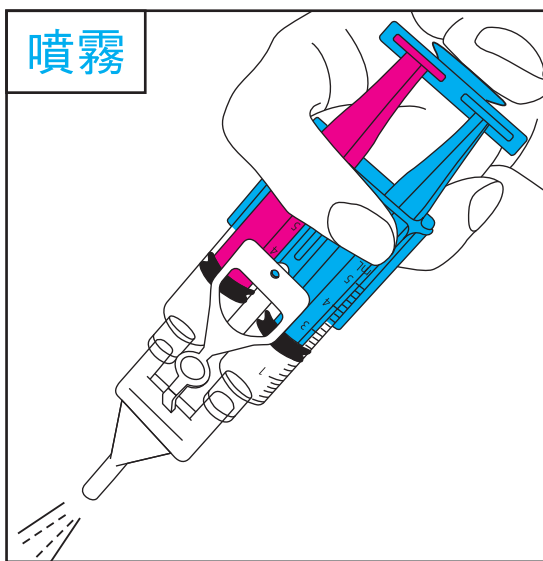

プランジャーの中心を強く押すことにより、
スプレーチップ先端からボルヒールが
噴霧されます。

【 留意事項 】

- ① プランジャーホルダーの中心から離れた位置を無理に押すと、シリンジ内で薬液の逆流・凝固が発生するおそれがあります。
- ② ボルヒールの噴霧中にプランジャーを止めると、スプレーチップが詰まり、使用できなくなります。
- ③ 噴霧を中断した場合は、直ぐにスプレーチップを外し、再度使用する際に新しいスプレーチップを装着してください。