



434785

**2017 年 6 月 (第 9 版)
*2016 年 12 月 (第 8 版)

医療機器承認番号：22500BZX00275000

高度管理医療機器

機械器具 7 内臓機能代替器
心内膜植込み型ペースメーカーリード

JMDN コード：35223000

ソリア JT

(条件付 MRI 対応)

再使用禁止**【警告】****1. MRI 検査について**

- 1) 磁気共鳴画像診断装置 (MR 装置) は BIOTRONIK 社の条件付き MRI 対応機器のみを植込んだ患者に対して、特定の条件下において使用可能である。MRI 検査の実施にあたっては【使用方法等】1. MRI 撮像可能条件に記載されている心臓血管植込み型電子デバイス (CIEDs) の添付文書等を参照し、MRI 撮像可能条件を満たす場合のみとすること。
- 2) MRI 検査は、関係学会の定める施設基準を満たす施設のみで可能であり、検査にあたっては実施条件を厳格に遵守すること。
MRI 検査を実施するにあたり、循環器医師、放射線科医師、診療放射線技師 (または臨床検査技師)、ならびに臨床工学技士 (または臨床検査技師、あるいは看護師) の各々は製造販売業者が提供する所定の研修を受けること。
- 3) MRI 対応植込み型デバイスに関する情報や注意事項について、患者への教育を徹底すること。

2. 使用方法

- 1) 交流電流によって細動が誘発されることを防ぐため、リード植込み中及び試験中は、電池駆動器具又は専用に設計された交流電源を使用する器具を使用すること。また、交流電源を使用している装置を患者の至近距離で使用しなければならないときは、接続したすべての装置、患者に接続されているケーブル類及び患者との間に漏れ電流が生じないようにし、リードコネクタピンを絶縁すること。
- 2) リードの留置位置について、十分考慮すること。[患者の心房又は心室壁の厚さによっては、術後に、心穿孔、心タンポナーデ、気胸、血胸などが起こる場合がある。]
- 3) 閾値の上昇やリード固定位置移動等によるペースング不全やセンシング不全が起こる場合がある。

*** 【禁忌・禁止】****1. 適用対象 (患者)**

- 1) 心房壁の薄い患者 [心穿孔を起こす可能性がある。]
- 2) 重篤な梗塞のある患者 [心穿孔あるいは重篤な不整脈を引き起こす可能性がある。]
- 3) 酢酸デキサメタゾンの投与が禁忌である患者 [酢酸デキサメタゾンに関連する合併症が発現する可能性がある。]

2. 併用医療機器

[【使用上の注意】2. 相互作用 1) 併用禁忌の項参照]

- 1) MRI 撮像可能条件を満たさない場合の MRI 検査 [植込み型デバイスの故障、非同期モードへの移行、ペースングの抑制、又はペースングレートの上昇などが起きる可能性がある。]
- 2) 低周波治療器 (経皮的電気刺激装置：TENS)
- 3) 高周波アブレーション
- 4) マイクロ波治療器 (ジアテルミー)
- 5) 超音波治療器
- 6) 高圧酸素治療装置

3. 使用方法

- 1) イントロデューサを使用する場合、鎖骨、第一肋骨により圧迫される位置及び鎖骨、第一肋骨間の靱帯内等、リードに物理的ストレスのかかる位置への穿刺 [リード破断の可能性がある。]
- 2) 再使用禁止 [ディスプレイ製品のため。]
- 3) 再滅菌禁止 [現場での再滅菌を想定して設計されていないため。]
- 4) 超音波洗浄処理 [意図した機能を保てなくなるため。]

*** 【形状・構造及び原理等】****1. 概要**

本品は、0.27mg のステロイドカラーを有した J 形状の心内膜植込み型ペースメーカーリード及びその付属品である。本リードは非導電材料で絶縁 (先端の電極部分を除く) されており、静脈経由で心内膜壁に接触させて留置し、CIEDs から心筋へのペースングパルスを送達する。さらに、心臓の電氣的反応を CIEDs に伝える働きもある。本品は、IS-1 コネクタ 1 本を有し、先端電極とリング電極を有するバイポーラ構造である。リードの先端に設けられたタインで心

筋に固定することができる。

2. 構成

リード本体


型式	長さ
Solia JT 53	53 cm

付属品

スタイレット	タイプ	型式
	K タイプ	S 53-K
スタイレットガイド		
固定スリーブ		
ペインリフタ		

3. 外観図

本体
リード
Solia JT

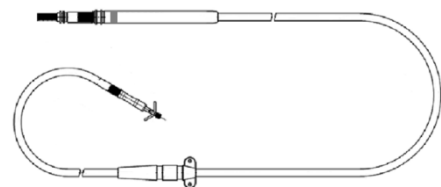


付属品

スタイレット K タイプ



スタイレットガイド

ペインリフタ

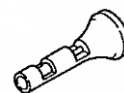


固定スリーブ



※固定スリーブは本体に取り付けてあり、取り外すことはできない。

スタイレットの表示とカラーコード

下図のように、スタイレットの手持ちの部分は 2 つの部分 (A 部と B 部) で構成されている。各部の表示と色により、スタイレットの種類がわかる。(下図表参照)

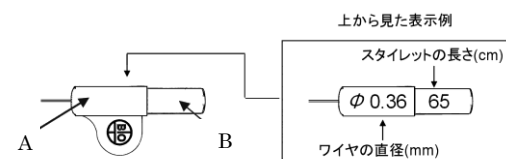

型番	硬さ	長さ (cm)	カラーコード	
			A 部	B 部
S 53-K	medium	55	白	青

4. 寸法・原材料

型式	Solia JT 53
固定形状	タイン
リード全長	53cm
リード径	1.8 mm ϕ
固定電極表面積	2.1 mm ²
リング電極表面積	17.4 mm ²
電極間隔	12mm
ステロイド	酢酸デキサメタゾン(含有量 0.27mg)
推奨イントロデューサ	6Fr 以上
原材料	シリコーン、ポリウレタン、プラチナ/イリジウム、イリジウム、酢酸デキサメタゾン

【使用目的又は効果】

本品は不整脈の治療を目的に植込み式心臓ペースメーカ等の植込み型パルスジェネレータと接続して使用する導線又は導線に付加して植込まれるものであり、心筋に長時間連続して電気刺激を与え、心臓のリズムを補正する。本体は、撮像可能条件に適合する場合のみ限定的に MRI 検査が可能となる機器である。

** * 【使用方法等】

1. MRI 撮像可能条件

- 本品と組み合わせて MRI 対応が確認されている CIEDs は下表のとおりである。これら以外の CIEDs に接続されている場合には MRI 検査は不可となる。

MRI 撮像可能条件の詳細については、各デバイスの添付文書又は取扱説明書を参照すること。

(1) 一般の名称：植込み型心臓ペースメーカ

販売名	承認番号	製造業者名
エドラ 8-T ProMRI	22800BZX00330000	BIOTRONIK 社
エニトラ 6 ProMRI	22800BZX00331000	
エルーナ 8-T ProMRI	22700BZX00324000	
エトリンザ 8-T ProMRI	22600BZX00255000	
エトリンザ 6 ProMRI	22600BZX00256000	
エヴィア 8-T ProMRI	22500BZX00048000	
エヴィアシリーズ Pro	22500BZX00049000	

(2) 一般の名称：除細動機能なし植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータ

販売名	承認番号	製造業者名
エヴィティ 8 HF-T QP ProMRI	22900BZX00078000	BIOTRONIK 社
エヴィア HF-T Pro	22500BZX00368000	

(3) 一般の名称：自動植込み型除細動器

販売名	承認番号	製造業者名
イリヴィア 7 ICD ProMRI	22800BZX00238000	BIOTRONIK 社
イペリア 7 ICD ProMRI	22600BZX00473000	

(4) 一般の名称：除細動機能付植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータ

販売名	承認番号	製造業者名
イトレヴィア 7 CRT-D QP ProMRI	22700BZX00072000	BIOTRONIK 社
イトレヴィア 7 CRT-D ProMRI	22600BZX00474000	

2. 使用方法

1) 準備


心電図モニター装置、X 線透視装置、体外式除細動器、心内電位信号の測定装置等を準備する。

2) 包装状態


リードとその付属品は、二重のプラスチック容器に収納されている。2つの容器はそれぞれ密封されてエチレンオキサイドガスで滅菌されており、リードと付属品の運送中の機械的なショックを防ぐ。二重の容器のため、内側の容器は清潔で、手洗いをした医師やナースが直接取り出すことができる。容器にはラベルがついており、保管の注意と一緒に、型式、シリアルナンバ、使用期限が記載されているため、密封している状態で製品の識別が可能である。

3) 容器の開封方法

- 外側が滅菌されていないプラスチック容器のシールを矢印のように開ける。

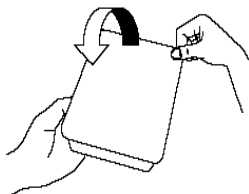

- 清潔な手で内側の滅菌プラスチック容器のつまみを持って外側の容器を出す。シールを同じようにはがす。

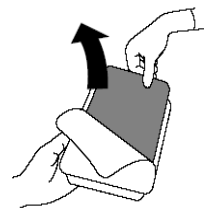


4) 植込み手順

- 植込み中は心電図をモニターする。
- リードを容器から慎重に取り出す。
- 植込みの前に固定スリーブがリードのコネクタピンの近くにあることを確認する。
- リードを挿入する手技として、静脈切開法と静脈穿刺法がある。

静脈切開法（カットダウン法）：


リードを静脈へ直接挿入する場合、付属品のペインリフタを使用すると容易に挿入できる。静脈切開後にペインリフタの尖った先端を注意深く血管に挿入し、静脈を持ち上げてリードを挿入する。

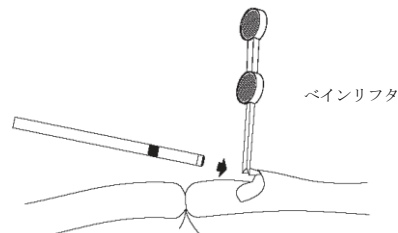

静脈穿刺法（パンクチャー法）：

イントロデューサ（シース、本品には含まない）を使用して血管にリードを挿入する（詳細については使用するイントロデューサ（シース）の添付文書等を参照すること）。

- リードを補助するために、付属品のスタイレットガイドを使用してスタイレットをリード腔内に挿入する。弱い力で押し進めスタイレットの先端が当たったら止める。スタイレットが曲がったりリードを穿孔したりしないように、スタイレットはリード腔内に完全に入れる。

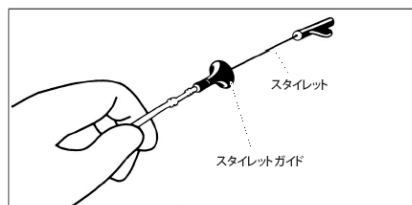


- X 線透視下でリードを挿入していく。スタイレット、はさみ、その他の手術器具でリードを穿孔したり、傷つけたりすることがないように注意すること。


心房：

- 右心房までリードを進めたら、スタイレットを少し引き抜く。電極先端が固定したい位置に向かうのに最適な形になるまでスタイレットを少しずつ引き抜く。
- X 線透視を行いながらスタイレットを入れたままの状態電極が心耳の肉柱に固定できるまでリードをさらに進める。
- リード電極が心房に固定できたら、スタイレットを抜き去る。
- コネクタを左右に 90° 回転させたり、リードを少しずらしたりして、電極が外れないことを確認する。

- スタイレットガイドの片側にあるノッチ（切込み）は電気的測定をするためのものである。リードコネクタピンに測定用のワニ口クリップ（本品には含まない）を接続する。（詳しくは後述の 5) 「刺激閾値と心内電位の測定」の項参照）

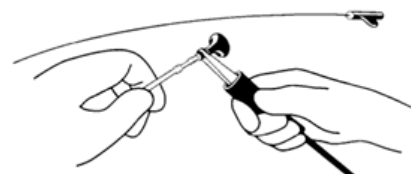

- (8) PSA(ペーシングシステムアナライザ)によりペーシング及びセンシングに関する電気的特性(刺激閾値及び心内電位等)を測定し固定位置を決定する。(詳しくは後述の5)「刺激閾値と心内電位の測定」の項参照)
- (9) リードからスタイレット及びスタイレットガイドを外す。
- (10) 電極離脱の可能性を減らすため、静脈開口部でリードを固定する。
リードの絶縁被覆や導電コイルを傷めることなく固定できるようにBIOTRONIK社のリードには縫合用の溝がついたシリコン樹脂製固定スリーブが付属している。

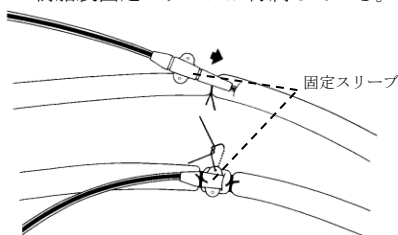


- 5) 刺激閾値と心内電位の測定
BIOTRONIK社では、CIEDsの特性にそって電流刺激閾値、電圧刺激閾値、心内電位等を測定できる機器を用意している。特に測定した心内電位を植込み予定のCIEDsの感度と関連づける場合には、CIEDsの入力回路のフィルタ特性と測定装置のそれが同一であることが望ましい。
刺激閾値の測定にあたっては、ペーシングレート患者の自己レートより高く設定する必要がある。心臓を刺激するのに必要な最低の電圧あるいは電流値をその設定されたパルス幅についての刺激閾値という。
心内電位測定中は、ペーシングは中断する。
一般に次の場合、電極位置は妥当であると考えられている。

	心房
刺激閾値 (パルス幅: 0.5ms 時)	1.5V 以下
心内電位	1.5mV 以上


刺激閾値が上表の値より高かったり、心内電位が低い時には、電極先端位置を変える必要がある。

- 6) リードとCIEDsの接続
接続する前にリードのコネクタタイプとCIEDsのコネクタ受けが一致していることを確認すること。
- 7) セルフシーリング式コネクタCIEDsとの接続
- (1) CIEDsと接続する前にスタイレットとスタイレットガイドを抜き取る。セルフシーリング部(ディスタル(陰極)の接続部)の固定ネジの先がコネクタ部にはみ出していないことを確認する。
 - (2) リードをねじったり曲げたりしないようにして、リードコネクタをCIEDsのコネクタ部にまっすぐ挿入する。途中抵抗を感じるが、さらに押し込み、リードコネクタ先端がコネクタブロックより約2mm先に出るまで挿入する。

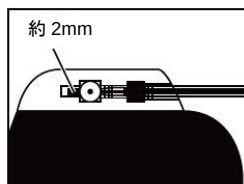

シングルチャンパの例

- (3) CIEDs本体に付属のトルクレンチをディスタル(陰極)コネクタのシーリングプラグ部のスリットを通して固定ネジにまっすぐに押し込み、時計方向に回して締める。

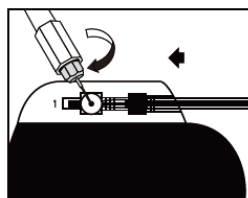

シングルチャンパの例

- (4) カチカチと空回りしてトルクが伝わらなくなるまでしっかりと固定ネジを締めること。適正なトルクになると、レンチ先端が空回りする。
- (5) トルクレンチを持ち直し、まっすぐに引き抜く。トルクレンチを抜くと、シーリングプラグ部は密閉される。陽極コネクタは、自動的に接続される。
- (6) 接続が確実に成されたことを視覚的及び機械的に確認する。また、接続後、必ずペースメカ機能(ペーシング/センシング)を心電図モニター等で確認する。

3. 使用方法等に関連する使用上の注意

1) 植込み前の注意

- (1) ペインリフタは、静脈切開手術中に静脈を刺したり組織を切開したりすることに使用しないこと。ペインリフタがリードのシリコン絶縁被覆を穿孔しないことを確認すること。体液がリードの中に染み出し、適切なリードの機能を妨げる可能性がある。
- (2) ステロイドについて
 - ① できるだけリードを拭いたり、溶液に浸したりしないこと。
 - ② 植込み後、時間が経過する程、ステロイドの溶出総量が増大する。従って時間が経過した後(電極の再固定の場合など)には、ステロイドを溶出しない同様のリードのように電極周辺の繊維組織増殖が見られる。
- (3) 導線の絶縁被覆はシリコンでできており、静電的に特定の物質を吸引する性質があるので、植込み前に表面が汚れないように保護すること。
- (4) 電極表面には、絶対にシリコンオイルを付けないこと。電極表面にシリコンオイルが付くと組織の形成と伝導性が妨げられる。潤滑油が必要な場合には、滅菌生理食塩水または滅菌水を使用すること。
- (5) リードを植込む前は、固定スリーブがリード挿入及び位置固定操作の邪魔にならないよう、リードコネクタ側にあることを確認すること。

2) 植込み中の注意

- (1) リードの取扱いには十分に注意すること。極端な曲げ、ねじれ、引っ張り、手術器具による取扱い、スタイレット挿入時に過度の力が加わることなどにより、リードに損傷を与えることがある。万一損傷した場合には、そのリードは使用しないこと。
- (2) スタイレットの操作/取扱いについて
 - ① スタイレットは、パッケージ内の付属スタイレット又は本リード用に設計されたBIOTRONIK社製のスタイレットのみを使用すること。
 - ② スタイレットを取扱うときは、手袋に付着した血液をヘパリン生食液に浸したガーゼで拭き取るか、新しい手袋に交換して、スタイレットに血液が付着しないようにすること。血液が付着したスタイレットをリードに挿入すると、リード内部で血液が凝固してスタイレットの抜き取りや操作ができなくなることがある。スタイレットに血液が付着した場合は、予備のスタイレットを使用すること。
 - ③ スタイレットを器械台に置くときは、スタイレットが跳ねたり、落ちたりしないように十分気をつけること。
 - ④ スタイレットをリードに挿入するために手術器具を使わないこと。
 - ⑤ スタイレットをリードの先端まで完全に挿入した状態で、リードを心腔内に挿入すること。スタイレットが完全に挿入されていない状態でリードを挿入すると、リード先端が屈曲したり、スタイレットによってリード内部が損傷したりする恐れがある。
 - ⑥ スタイレットをリードに挿入するときは短いストロークで少しずつ挿入すること。長いストロークで挿入すると、スタイレットが折れ曲がる恐れがある。
 - ⑦ スタイレットは過剰な力でリードの挿入、押し進めないこと。また、リード先端が屈曲した状態でスタイレットを強く押しこまないこと。リードのコイルを損傷したり、スタイレットが絶縁被覆を突き破る恐れがある。また、リードが変形してスタイレット先端まで入らなくなることがある。
 - ⑧ 過剰な力によってのみスタイレットの挿入又は取り出しが可能な場合は、そのリードは再固定せず、別のリードに交換すること。
 - ⑨ スタイレットがリードに挿入された状態で曲げないこと。リードの導線及び絶縁被覆に損傷を与える場合がある。
 - ⑩ スタイレットを極端に曲げないこと。極端に曲がったスタイレットを挿入することによってリードが損傷することがある。
 - ⑪ いかなる理由であろうとも、スタイレットをリード内に残留させないこと。スタイレットがリード内に残留していると、リード絶縁被覆の穿孔、心筋の穿孔あるいはスタイレットを取り外してリードを再留置することが不可能になる。
 - ⑫ イントロデューサを使用する場合、使用するイントロデューサの内径やイントロデューサに施したカーブの程度によっては、リードのイントロデューサへの挿入が困難または抵抗感が強くなることがある。その場合は、無理にリードを押し進めず、それより大きいサイズのイントロデューサを使用すること。無理にリードを押し進めるとリードに損傷を与えることがある。
- (3) 胸郭出口症候群(thoracic outlet syndrome)の症状が見られる場合は、物理的なストレスがかかるような位置にリードを植え込まないこと。

- (4) 鎖骨下静脈穿刺法によりリードを挿入する場合は、鎖骨を3分割した正中側3分の1より内側からリードを挿入しないこと。この方法でリードを挿入すると圧迫による摩擦などによってリードが損傷し、ペーシング／センシング不全を起こすことがある。鎖骨下静脈から挿入する場合は、必ず第一肋骨外側端付近から穿刺し、鎖骨下筋を貫通しないようにする。鎖骨と第一肋骨間におけるリードの損傷を避ける上で重要である。リードの損傷は鎖骨下筋肉や肋骨烏口靱帯、あるいは肋骨鎖骨靱帯等の軟組織内にリードが挟まれて挿入されることによって生じることがある。また、第一肋骨・鎖骨間の解剖学的異常を有する患者における過度のリード圧迫もある。
- (5) リードを血管や心腔内に挿入するとき、及び挿入後のリード操作は慎重に行うこと。操作中に抵抗感を感じた場合には操作を中止し、その原因を確認して適切な処置を行うこと。そのまま操作を続けると、血管やリードに損傷を与えることがある。
- (6) 本品を抜去する際に、本品のみの抜去が困難な場合は、システム全体(イントロデューサ、リード、スタイレットなど一緒に)を抜き取ること。
- (7) リードの移動を防ぐため、固定スリーブを使用して近くの筋膜にリードを結紮すること。
- (8) リードを固定しているときに電極先端が離脱しないように注意すること。
- (9) リードから固定スリーブを外したり、切断したりしないこと。リード損傷の原因となる。
- (10) リードは必ず固定スリーブを介して結紮し、リード本体を直接強く縛らないこと。リードが損傷することがある。
- (11) 固定スリーブは腕の動きなどがリードに伝わらない位置で固定すること。適切な位置に固定されない場合は、固定スリーブの付近でリードに損傷(断線など)が発生する可能性がある。
- (12) 固定スリーブを介して結紮する際、固定スリーブ、リードまたは静脈が損傷するほど強く結ばないこと。強すぎると、静脈やリードの損傷(絶縁被覆の損傷や断線など)が発生する可能性がある。
- (13) リードコネクタにワニ口クリップを装着するときは、リードコネクタのシーリングリングを傷つけないように注意すること。
- (14) リード位置を決定する目的で使用するPSAによっては、心内信号測定中にペーシングが中断されることがある。
- (15) 使用しないリードを体内遺残する場合は、リードコネクタにリードキャップをして絶縁すること。リードを途中で切断した場合は、その端をシールして周囲の組織に固定し、心腔内にリードが入り込まないようにすること。
- (16) 余分なリードはCIEDsの周囲に緩やかなループ状にして植え込むこと。
- (17) 患者に異常のないことを絶えず監視すること。
- (18) 患者に異常が発見された場合には患者の安全を確保した上で、本品の使用を中止する等の適切な処置を施すこと。
- (19) 皮下のトンネルリングをする際は無菌性の維持に注意すること。
- (20) リードコネクタの電極部(陰極・陽極)に血液や体液などが付着しているときは、必ず蒸留水またはアルコールで拭き取ること。そのままリードコネクタを挿入すると、電極的接触不良を引き起こすことがある。特に交換の場合にはリードコネクタの電極部の汚れなどがあると、接触不良を引き起こしやすいため、念入りにリードのコネクタの電極部をガーゼで拭き取ること。
- (21) リードコネクタをCIEDsに挿入する前に、コネクタポートの開口部から固定ネジの先端が見えなくなるまでCIEDs付属のトルクレンチを用いて、固定ネジを緩めること。[固定ネジがコネクタポート内に突出していると、接続の妨げになったり、リードコネクタを損傷したりすることがある。緩め過ぎると固定ネジがコネクタブロックから外れたり、固定ネジでシーリングプラグを損傷したりすることがある。]
- (22) CIEDsのコネクタポートにリードコネクタを挿入する際は、かならずリードコネクタのディスタールピンがコネクタブロックより十分先に出るよう、しっかり押し込んでから固定ネジを締めること。また、固定後はリードコネクタを強く引っ張らないこと。リードコネクタ内部のシリコン被覆にねじれを生じ、絶縁不良を起こすことがある。
- (23) CIEDsとリードの接続には、必ずCIEDs付属のトルクレンチを使用すること。[他のトルクレンチを使用した場合、固定ネジ又はシーリングプラグが損傷したり、リードとペースメーカ本体の接続不良が発生したりすることがある。]
- (24) リードコネクタ接続後、必ずペースメーカ機能(ペーシング／センシング)を心電図モニター等で確認すること。

3) 植込み後の注意

- (1) 術後は、定期的に胸部X線撮影、心電図検査、心エコー、CTスキャン等により心穿孔、心タンポナーデ、気胸、血胸などの発症がないかフォローアップすること。(後述の「(5)フォローアップ」を参照すること。)

- (2) 植込み後に異常が疑われる場合には、胸部X線撮影、デバイスチェックによるリードインピーダンスの測定、心電図検査、心エコー等により確認し、対応すること。本品の異常が疑われる場合は、速やかに製造販売業者に連絡すること。
- (3) 心内膜リードは植込み時間の経過とともに繊維組織が形成されるので再固定、抜去が困難になる。無理に引き抜くと心内膜や弁、血管が剥離したり、リード接合部が離れて先端チップ部分と裸の導線コイルが心内または血管内に残されてしまうことがある。万一、リードを抜去したり、再固定したりする場合は、細心の注意を払って行うようにすること。
- (4) CIEDs本体からリードコネクタを抜く際は、過度な力を加えないこと。リードコネクタのシリコン被覆が破損することがある。きつい場合には、少しづつ力を加え、押し下り引いたり、少しまわすようにして、ゆっくり引き抜くこと。
- (5) フォローアップ(詳しくはCIEDs本体の取扱い説明書を参照すること。)
 - ① CIEDsが植え込まれた患者のフォローアップはプログラマを用いてインタロゲートおよびプログラミングができる。電池の消耗や合併症発現の有無などを定期的(少なくとも3〜4ヶ月ごと)に確認すること。
 - ② 患者に、植込み型デバイスの患者向けガイドブックを参照の上、患者自身で点検するよう指示すること。
- 4) その他の注意
 - (1) 遺残リードが体内にある場合には、MRI撮像可能条件を満たさないことに注意すること。
 - (2) MRI検査は患者又はデバイスシステムに対して望ましくない影響を与える可能性があるが、反対に植込み型医療機器がMRI検査に対して悪影響を及ぼす場合もある。植込み型医療機器が撮像視野に含まれる場合、又はその近くにある場合、アーチファクト、歪み、及び障害が発生する可能性がある。撮像パラメータ等を設定する際は、上記について考慮すること。
 - (3) MRI検査時の詳細な操作方法等については、対応するCIEDsの添付文書及び取扱説明書を参照すること。
 - (4) プログラマをMRI検査室内に持ち込まないこと。[吸着事故が発生する恐れがある。]
 - (5) ディスロジ等によりリードを再固定した場合は、製造販売業者に届け出ること。[MRI撮像には再固定日から6週間を経過している必要があるため。]

*【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 本品の使用が患者の容態に適しているか確認すること。
- 2) ペーシングを介する電気特性の測定等には必ずCF形装着部(JIST 0601-1の定義による)に接続して使用すること。
- 3) 術後は、定期的に胸部X線撮影、心電図検査、心エコー、CTスキャン等により心穿孔、心タンポナーデ、気胸、血胸などの発症がないかフォローアップすること。
- 4) デバイスシステムを植え込んだ患者は、ダイビングや高圧酸素治療のような高圧環境を避けること。[リードは、通常の気圧環境にて製造されており、高圧に耐えられるようには設計されていないため、過剰な圧力負荷によりリードが損傷する可能性がある。]

2. 相互作用

- 1) 併用禁忌(使用しないこと。)

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
磁気共鳴画像診断装置(MRI) (MRI撮像可能条件に満たさない場合)	CIEDsの交換	電磁誘導によって、CIEDsの電子回路が破壊され、故障することがある。
	CIEDsの再設定	CIEDsがセーフティバックアップモードに移行することがある。
	経過観察	電磁干渉によって、CIEDsのモードが非同期モードへ移行したり、マグネットレートでペーシングしたり、ペーシングが抑制されたり、ペーシングレートが上昇したりすることがある。(ペースメーカとの接続の場合)
	経過観察	電磁干渉によって、ペーシング出力の抑制、ペーシングレートの上昇、ペーシングモードの非同期モードへの移行、不適切な治療の施行、不整脈検出の妨害が発生する可能性がある。(ICDまたはCRT-Dとの接続の場合)

	リード交換	電磁波によって電極周囲が熱せられて心筋組織を損傷させる場合がある。
低周波治療器（経皮的電気刺激装置：TENS）	併用不可	心室細動を誘発する場合がある。
高周波アブレーション	治療機器の使用中止、リードをアブレータからできる限り遠ざける、使用後のフォローアップ。	電極周囲が熱せられて心臓組織を損傷させる場合がある。
		心室細動を誘発する場合がある。
		リードを損傷させることがある。
マイクロ波治療器（ジアテルミー）	併用不可	リードが植込まれている場合は、そのリードが使用されているか否かにかかわらず、短波及びマイクロ波のジアテルミーを使用すると電極周囲が熱せられて心臓組織を損傷させる場合がある。
		心室細動を誘発する場合がある。
超音波治療器	リード交換	リードは音波を集中させることにより故障する場合がある。
	使用中止、使用後のフォローアップ	電極周囲が熱せられて心臓組織を損傷させる場合がある。
高圧酸素治療装置	併用不可	変形により故障する場合がある。

2) 併用注意（併用に注意すること。）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
体外式除細動器	放電、使用後のフォローアップ	永久的なペースング閾値の上昇を招くことがある。この場合はリードを交換する。
		一時的なペースング閾値の上昇を招くことがある。この場合はプログラマによる再設定またはリード交換を行う。
		熱傷を生じる恐れがあるため、使用時はパドルの位置をリードの植込み部位から十分離すこと。
電気手術器（電気メス等）	治療機器の使用中止、使用後のフォローアップ	植込まれたリード付近で、電気メス等手術用電気器具を使用することは避けること。〔電極に電流が流れ、細動を誘発したり心臓組織に損傷を与えることがある。〕
結石破碎装置	電氣的・力学的負荷のかかる部分をリードからできる限り遠ざける。使用後のフォローアップ。	電氣的あるいは力学的な干渉を受ける場合がある。

これらの治療／診断処置は、後にデバイスシステムの損傷を引き起こす可能性がある。この損傷は、処置後すぐのCIEDs機能試験時には検出できず、後に明らかになり、結果的にデバイスシステムの機能不全となることがある。この処置の詳細や適切な予防措置については、BIOTRONIK社製CIEDsの取扱説明書を参照すること。

3. 不具合・有害事象

1) 重大な不具合

ペースング不全及びセンシング不全：断線／絶縁不良／電極離脱・移動等によるペースング不全及びセンシング不全が発生し、適切な治療ができなくなることがある。〔CIEDs植込み後はフォローアップを行うこと。〕

2) 重大な有害事象

- (1) 死亡〔ペースング不全により心停止状態が持続し、死亡につながる可能性がある。〕
- (2) 死亡〔センシング不全又は持続的なノイズのセンシングにより非同期ペースングに移行し、心室細動を誘発することにより死亡につながる可能性がある。〕

- (3) アダムス・ストークス発作〔ペースング不全により心停止状態が数秒間以上持続するために卒倒することがある。卒倒が原因になり2次的な被害が発生する恐れがある。〕

3) その他の不具合

- (1) CIEDsとの接続不良
- (2) デバイスシステムの故障：不適切なリード植込み、リード離脱、リード損傷、絶縁不良、バッテリー消耗やCIEDsの電氣的部品の故障によって、デバイスシステムの故障が生じることがある。

4) MRI検査に伴う有害事象

ペースング及びセンシング不全（リード発熱による電極付近の組織損傷による）、ポケットの組織損傷（本体の発熱による）、ディスロジ、本体の移動、本体及びリードの振動、不適切なプログラミング、不適切な治療、回路又は電池の予測できない故障、VT/VF及びAT/AF（競合ペースング及び誘導電流のセンシングによる）、循環虚脱、CIEDsとプログラマの通信不良、一時的な電池電圧の低下

5) その他の有害事象

リードの断線／被覆損傷（磨耗など）、電極離脱／電極移動／繊維組織形成による閾値上昇、心臓弁の損傷、心室細動等の不整脈、空気塞栓、心筋損傷、心穿孔、心破裂、心タンポナーデ、筋肉や神経への刺激、慢性神経障害、静脈血栓による閉鎖不全や塞栓、気胸、血胸、皮膚糜爛・突出、感染、静脈穿孔、出血、血腫、近接組織の拒絶反応、アレルギー反応、ケロイド形成、刺激閾値の上昇

機能の状態／患者の症状	考えられる原因／有害事象	処置
ペースング／センシング不全	リードとCIEDsの不適切な接続	リードとCIEDsを接続し直す。
	電極離脱・移動	リードを固定し直す。
	リードの損傷	リードを交換する。
	リードの絶縁不良（例：ペースメーカーのコネクタ部の固定ネジがリードの絶縁被覆を貫通している）	リードを交換する。
	電極離脱・移動	リードを固定し直す。
顕著な刺激閾値上昇	過剰な線維組織形成	CIEDsの出力を調整する。
		リードを交換またはリード（電極）の位置を変える。

4. その他の注意

1) 手技に関わるX線被曝

デバイスシステムの植込み手技において、透視法によるX線強度及び継続時間が原因で、患者にもスタッフにも、体細胞及び遺伝上の影響を起こす危険性がある。手技に関わるX線被曝の可能性に対して十分に注意が払われ、この被曝が最小限になるよう手段を講じる必要がある。特に妊婦に対しては十分に注意が払われる必要がある。

2) ステロイド

同等量のステロイド剤を、注射など他の方法により投与した際の合併症に関する経験、防止策、警告事項等が本リードを用いた心臓内局部への適用に対してどの程度当てはまるかは認知されていない。

3) 高齢者への適用

高齢で衰弱している患者への適用には十分に注意を払うこと。〔想定した効果が得られない場合がある。〕

【保管方法及び有効期間等】

1. 水のかからない場所に保管すること。
2. 気圧、温度、湿度、日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気等の悪影響の恐れのない場所に保管すること。
3. 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）等安定状態に注意すること。
4. 化学薬品の保管場所や、ガスの発生する場所には保管しないこと。
5. ラベルに表示された使用期限内に使用すること。

【承認条件】

1. 関連学会と連携の上、実施施設基準及び実施者基準を設け、安全性を確保できる施設及び本品に関する十分な知識を有する医療従事者により本品の使用及びMRI検査が行われるよう、適切な措置を講ずること。
2. MRI検査を行うための条件について、医療従事者に対する研修及び患者に対する教育を徹底し、十分なサポート体制を構築し、安全性の確保に努めること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： バイオトロニックジャパン株式会社

外国製造業者： バイオトロニック欧州合資会社
(BIOTRONIK SE & Co. KG)
ドイツ連邦共和国

