

類別:医療用品(4)整形用品

高度管理医療機器 一般的名称:脊椎内固定器具 JMDNコード 37272003

販売名:アルファテック キセノン ペディクルスクリュー システム

再使用禁止

【警告】

セットスクリューで、プリベンド ロッド及びスムーズロッドを締結するときは、クロスレッドしていないことを確認すること。[クロスレッドしながらねじ込みした場合、ネジ部分が破損するため]

【禁忌・禁止】

〔適用対象〕(次の患者には使用しないこと)

- 1) 骨髄炎や敗血症等の感染症の患者[患部に病巣が移り、良好な手術結果が得られないため]
- 2) 患部周辺に開放創を有する患者、軟部組織が脆弱等の骨質不良の患者
- 3) 病的肥満の患者[本品に過度の負担がかかり、マイグレーションや折損等が発生しやすいため]
- 4) 妊娠又はその可能性のある患者[安全性が確立していないため]
- 5) 本品の材質に対して過敏症を有する患者

〔使用方法〕

- 1) 再使用禁止
- 2) 頸椎への使用[承認担保外のため]
- 3) プリベンド ロッド及びスムーズロッド(以下ロッドと言う)以外の製品に変形、切断等の改造を行わないこと。また、ロッドの繰り返しの曲げや鋭角な曲げを行わないこと。[安全性が担保されず、折損等の原因となるため]

〔併用医療機器〕

本品は、製造販売業者が指定する製品以外と組み合わせて使用しないこと(相互作用の項を参照)

【形状、構造及び原理等】*

構造

本品は、ポリアクシシャルスクリュー、セットスクリュー、ロッド及びトランスバース固定器から構成される。尚、構成品は、識別の為カラー別になっている構成品も含む。カラーの詳細は、取扱説明書等を参照。

原理

本品の構成品を組み合わせて使用することによって、脊椎の固定及び変形の矯正を行う。

・ポリアクシシャルスクリュー ポリアクシャル (単位: mm)

	
外径 (色調)	長さ
φ 4.5 (ダークブルー)	25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80
φ 5.5 (マゼンタ)	
φ 6.2	
φ 7.0 (ゴールド)	
φ 8.0 (グリーン)	

・ポリアクシシャルスクリュー リダクション (単位: mm)

	
外径 (色調)	長さ
φ 5.5 (マゼンタ)	25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80
φ 6.2	
φ 7.0 (ゴールド)	

・セットスクリュー

	
サイズ (色調)	
スタンダード(マゼンタ)	ラージ(グレー)

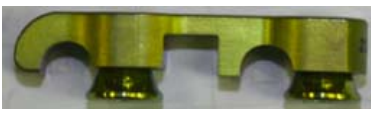
・プリベンド ロッド (単位: mm)

	
ロッド径	長さ
φ 5.5	35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 105, 115

・スムーズ ロッド (単位: mm)

	
ロッド径	長さ
φ 5.5	35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 110, 130, 150, 170, 230, 400

・トランスバース固定器 フィックスドブリッジ (単位: mm)

	
長さ	
16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 36	

・トランスバース固定器 アジャスタブルブリッジ (単位: mm)

	
長さ (最大値:最小値)	
(23:29), (28:38), (35:42), (41:53), (52:75)	

【使用目的又は効果】

使用目的

本品は、スクリュー、セットスクリュー、ロッド及びトランスバース固定器から構成され、脊椎側彎症の矯正等、脊椎の固定を目的として使用する。

【使用方法等】*

- ・本品は未滅菌であるため、使用前には適切な方法で洗浄し、下記の推奨条件又は各医療機関で検証された条件により高圧蒸気滅菌を行う。
推奨条件:高圧蒸気滅菌(プレバキューム式) 132℃、4分間以上
- ・本品は、単回使用である。
- ・本品専用の手術器械を使用すること。

・使用方法(例:脊椎後方固定術)

1. スクリューの挿入

スクリューは、スクリュードライバー※1を用い、椎体に刺入する。



2. ロッドの設置準備

適切な長さのロッドを選択し、必要に応じてフレンチベンダー※1によりベンディングを行う。



手術手技書等を必ずご参照下さい

3. ロッドの挿入

ロッドは、ロッド鉗子でスクリューヘッドに設置する。必要であれば、スクリューヘッドにロッドを設置した状態でもベンディングが可能である。



ロッドホルダー※1

4. ロッドリダクション

ロッドはスクリューヘッドに完全に設置する。

ロッドの整復には、4 種の器械(ロッドブッシャー※1、ロッドロッカー※1、オフセットパースエーダー※1、アキサルパースエーダー※1)のいずれかを可以使用できる。



ロッドロッカー※1

5. セットスクリューによる仮固定

セットスクリュードライバ※1 で仮固定を行う。



6. コンプレッションとディストラクション

必要に応じてコンプレッション及び/又はディストラクションを行う。



コンプレッション



ディストラクション

7. 最終締結

セットスクリュースタータードライバ※1 によりセットスクリューの最終締結を行う。
リダクションスクリューを使用した場合は、最終締結の後にタブを取り除くこと。

トランスバース固定器

二本のロッド間を橋渡しするための、取り付け幅を微調整することができる適切な大きさのトランスバースを選択する。
アジャスタブルブリッジの場合は、ブリッジの幅をロッドに合わせ調整をする。
ブリッジのセットスクリューは、トルクをかけ過ぎないこと。



(※1)は本申請対象外を示す。

上記は一般的な使用方法であり、詳細な手術手技については、本品の手術手技書等を参照すること。

<使用方法等に関連する使用上の注意>*

- (1)医師は全ての医療機器が準備されていることを確認し、医療機器が適切に作動するか、確認すること。
- (2)医師は患者へ手術に伴うリスクと得られる効果を具体的に説明し、同意を得ること。
- (3)医師は脊椎の MRI 画像、X 線画像診断等により、本品の使用が適切であるか、術前に判断すること。

- (4)医師は常に患者の血圧や麻酔の状態を観察し、手術を実施すること。
- (5)医療行為であっても、製品の性能・能力を越える用途で使用しないこと。また、破損・折損等の不具合の原因になるため製品の状態を常に観察し、使用時に過度な力(応力)を製品に加えないこと。
- (5)創部の縫合前に、手術前に準備された医療機器が全て揃っているか又、医療機器の部品が脱落等していないか確認すること。
- (6)本品の使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥する前に、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
- (7)医師は患者にリハビリテーションのための運動、今後の治療方針、生活上の制限等についての注意事項を文書で患者に渡し説明すること。
- (8)定期的なフォローアップは必須であり、X 線診断、診察等を行い、本品を用いて、埋植した医療機器が適切に機能しているか確認すること。
- (9)セットスクリューの締め付けは、手術手技書に従い締め付けるトルクの限界をコントロールできる手術器械を用い、締め付け過ぎないように注意すること。
- (10)チタニウム及びステンレス鋼を原材料とする他の構成品と、組み合わせ使用しないこと。

【使用上の注意】

1. 使用注意(次の患者には慎重に使用すること)
 - (1)糖尿病等の代謝障害のある患者〔感染が発生し、患部の遅延治療が発生しやすいため〕
 - (2)ステロイド療法、免疫抑制剤等の全身薬物療法を受けている患者〔オステオポロシス等が進行し、術後骨折が発生しやすいため〕
 - (3)う歯等の局所的な感染を有する患者〔局所感染部から患部に感染巣が移ることがあり、本品を適切に支持できないため〕
 - (4)患部に重度の変形のある患者〔矯正が十分できず、本品を適切に支持できないため〕
 - (5)患部に骨腫瘍がある患者〔本品を適切に支持できないため〕
 - (6)体重過多の患者〔本品に過度の負担がかかり、マイグレーション、折損等が発生しやすいため〕
 - (7)肉体力労働、活動性の高い患者〔本品に過度な負担がかかり、マイグレーション、折損等が発生するため〕
 - (8)医師の指導を守らない患者、アルコール、麻薬中毒患者及び精神障害のある患者〔術後管理が不十分になることが多いため〕
 - (9)他関節に障害のある患者〔患部に過度な負荷がかかり、本品を用いて埋植する医療機器を適切に支持できないため〕
 - (10)喫煙習慣のある患者〔偽関節の形成や進行性の変性により疼痛が発生しやすいため〕
 - (11)骨パジェット病の患者〔本品を適切に支持できないため〕
 - (12)再置換術の患者〔骨質の低下や骨量が減少しているため、初回に比べ良好な結果が得られない場合があるため〕
 - (13)下肢に障害等があり、転倒する可能性の高い患者〔転倒により、マイグレーション、折損、ルーズニング等が発生しやすいため〕
 - (14)高齢者〔「高齢者への使用」の項を参照すること〕

2. 重要な基本的注意*

- (1)骨癒合が確実に達成されるまで、手術部位の固定を行うこと。
- (2)本品は、患者の生体内や活動性等により、耐用年数に影響があることや骨癒合不全になった場合、本品に繰り返し応力が発生し、不具合が発生する可能性が高いことを患者に十分説明をすること。
- (3)本品のマイグレーション、ルーズニング等の不具合・有害事象が発生した場合、再手術が必要になることを患者に説明すること。
- (4)ロッドの曲げを行う場合、専用の手術器械を使用し、無理な曲げや繰り返し曲げを行わないこと。
- (5)製造販売業者によってデザイン、材質等の互換性が保証されている場

合のみ他のシステムと併用することが可能である。

(7)骨癒合後、本品を速やかに抜去しない場合、不具合・有害事象が発生する可能性がある。

(8)本品の抜去は、最終的に医師が決定する。

(9)専用の手術器械を使用すること。

・製造業者: ALPHATEC SPINE INC.

国名:アメリカ合衆国

3. 相互作用

併用禁忌・禁止 (併用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
他社製のインプラント及び製造販売業者の推奨しないインプラント	脊椎内固定器具として正しく作動しない恐れがあるため、併用しないこと。	デザインコンセプトが異なるため適切に固定されない。

4. 不具合・有害事象

本品の使用により、以下のような不具合・有害事象が発生した場合、直ちに必要な処置を行うこと。

(1) 重大な不具合

- ・破損、折損
- ・変形
- ・脱転、分解
- ・マイグレーション、ルーズニング

(2) 重大な有害事象

- ・偽関節
- ・癒合遅延
- ・金属アレルギー等の異物反応
- ・ストレスシールドイングによる骨密度低下
- ・疼痛、不快感または、知覚異常
- ・骨構造の破損
- ・神経根、脊髄への過剰刺激による麻痺
- ・硬膜外滲出、髄膜炎、炎症
- ・滑液包炎
- ・骨壊死、骨成長の停止
- ・出血
- ・死亡
- ・再手術
- ・生殖、泌尿器を含む内臓機能または呼吸器不全
- ・神経損傷
- ・血管損傷
- ・メタローシス
- ・脊椎関節脱臼または亜脱臼
- ・腫脹または創部から体液等の連続的な滲出
- ・感染症
- ・塞栓 (脂肪、血液等)
- ・血種
- ・骨穿孔や骨折
- ・マイコバクテリウム属などの細菌や真菌による骨髄炎
- ・脊椎関節の可動域の減少や整復または再建の損失
- ・異所性骨による石灰化
- ・本品と骨が固定することによる抜去術の失敗

5. 高齢者への使用

(1)過度のリーミングや力を加えることにより、術中、術後に骨折が発生する可能性が高いので注意すること。また、スクリューやフックを設置する場合も同様に注意すること。

(2)腎機能、肝機能等の生理機能が低下している場合が多いため、術前、術中、術後の全身管理に注意すること。

(3)何らかの感染巣を有している場合が多く、遅発性感染防止のため感染巣を完治してから、本品を使用すること。

6. 妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への使用

妊婦、産婦に対しては、使用しないこと。【禁忌・禁止】の項を参照すること。)授妊婦及び小児に対しては、安全性は確立されてないため、治療上の有益性が、危険性を上回ると医師が判断した場合のみ使用すること。

7. 臨床検査結果に及ぼす影響

MRI (磁気共鳴画像診断装置) 診断において、アーティファクトや熱傷、マイグレーションが発生する場合がある。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

・製造販売業者: 株式会社アルファテック・パシフィック
〒102-0082 東京都千代田区一番町 10-2 一番町 M ビル
電話番号 03-3511-5185