

再使用禁止

グラスアドバンス

【禁忌・禁止】


- 下記の症例・患者には適用しないこと。
 - 本品が直線的に使用できない症例
 - 残存歯質の全周に渡る歯冠部高径が 1mm 未満の場合
- 再使用禁止。
- 本品を削って形状を変えないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は、ガラスファイバーとレジンマトリックスの複合材料であるガラス繊維強化プラスチック製の根管用ポストで、根管径や長さにあわせた 4 種のサイズがある。

溝なしタイプ

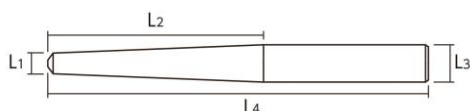


単位：mm

種類	L1	L2	L3	L4
φ1.0	0.46	5.9	1.0	15.0
φ1.2	0.65	5.9	1.2	15.0
φ1.5	0.82	7.38	1.5	16.5
φ1.8	0.92	9.52	1.8	18.0

（公差 L1、L3：±0.06mm、L2：±0.3mm、L4：±0.7mm）

溝ありタイプ

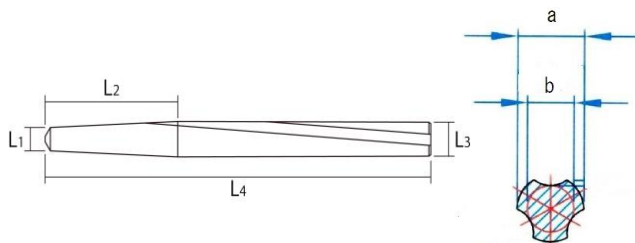

単位：mm

種類	L1	L2	L3	L4	a	b	カラー
φ1.0	0.65	3.75	1.0	15.0	1.0	0.7	ホワイト
φ1.2	0.82	4.12	1.2	16.5	1.2	0.8	イエロー
φ1.4	0.92	5.21	1.4	18.0	1.4	0.9	レッド
φ1.6	1.02	6.30	1.6	19.0	1.6	1.1	ブルー

（公差 L1、L3、a、b：±0.06mm、L2：±0.3mm、L4：±0.7mm）

2. 品目仕様

項目	仕様
曲げ強さ	800 MPa 以上

試験方法：ISO3597-2 及び ISO14125

3. 原理

根管内に支台築造材料とともに挿入することによって、支台歯の補強又は維持効果を得る。

4. 原材料

ウレタンジメタクリレート、二酸化ケイ素、酸化アルミニウム 他

5. 包装

溝なしタイプ

- ・アソートキット
φ1.0、φ1.2、φ1.5 各 5 本（計 15 本） / 包
- ・リフィル
各サイズ 10 本 / 包

溝ありタイプ

- ・アソートキット
φ1.0、φ1.2、φ1.4、φ1.6 各 5 本（計 20 本） / 包
- ・リフィル
各サイズ 10 本 / 包

【使用目的又は効果】

本品は歯科修復物、補綴物等の維持又は補強のために用いる。

【使用方法等】

[使用方法]

- 通法にしたがい、根管形成・根管充填を行った後、ピーソリーマー等でポスト孔の形成を行う。
- 最後に使用したピーソリーマー等のサイズに対応した本品を選択し試適を行う。（※溝ありタイプは、使用前にカラーバンドをはずしておくこと）
- 試適した本品を口腔内より取り外し、必要に応じてカッティングディスクなどで切断し長さを調節する。
- アルコールにて本品を拭き、エアブローにて確実に乾燥させる。
- 接着性プライマー（別売）を用い、シラン処理を施す。
- 切断した本品とともに、歯科用セメント（別売）を根管内に挿入し、本品を植立させる。
- 植立した本品の上に、支台築造用レジン（別売）を築盛し、支台築造を行う。

[使用方法等に関連する使用上の注意]

- ・本品は未滅菌なので、エタノールなどで消毒を施してから使用すること。
- ・本品を直接手指等で取り扱わず、ピンセット等を使用すること。
- ・併用する材料及び医療機器の使用に際しては、各材料の添付文書の使用法、注意事項を確認してから使用すること。
- ・本品の使用に際し、必要に応じてラバーダム等の防湿処理を行うこと。
- ・本品の長さ調整は、必ず植立前に行うこと。
- ・湾曲部分には適応しないので、直線的に装着できない症例には使用しないこと。

【使用上の注意】

- 1) 感染及び破折防止のため再使用不可。
- 2) 本品は、【使用目的又は効果】の項に記載の使用目的以外には使用しないこと。
- 3) 本品を誤飲させないように注意すること。
- 4) 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- 5) 本品及び本品を使用した硬化物の切削、研磨作業等の際には、粉塵等による人体への影響を避けるために、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク、防護めがね等を使用し、粉塵等の吸入及び目への付着を防止すること。
- 6) 本品の使用により発疹、温疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- 1) 本品は、直射日光等の強い光が当たる場所に置かないこと。
- 2) 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号：076-278-8800

製造業者：HARALD NORDIN SA（ハラルド・ノルディン社）

製造国：スイス