

機械器具(16) 体温計

管理医療機器 一般的名称：電子体温計(JMDN14032010)

販売名：電子体温計 TO-100


【警告】

・お子様だけでご使用にならないでください。

【禁忌・禁止】

・測温部を噛まないでください。
・人以外の測定にはご使用にならないでください。
・測定結果の自己判断や治療は危険ですので、医師の診断に従ってください。

【形状・構造及び原理等】

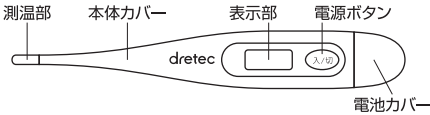

測温部にあるサーミスタが温度により、電気的抵抗値が変化する特性を応用して、抵抗値の変化を集積回路で演算処理し、体温として表示部に表示します。

<付帯機能>

初期動作確認告知、実測測定終了告知、測定温度範囲外告知、自動電源過断機能

【使用目的、効能又は効果】

測温部を部位に接触させて、脇下又は口腔(舌下)の体温を測定し、最高温度を保持しデジタル表示する。

【品目仕様】*

・種類 : 一般用
・方式 : 実測式
・温度測定範囲 : 32.0℃～42.9℃
31.9℃以下になると「Lo」表示
43.0℃以上になると「Hi」表示
・測定精度 : ±0.1℃
・温度表示 : 3桁デジタル
・最小表示単位 : 0.1℃
・応答特性 : 30秒以内
・定格電圧 : DC1.5V
・電源 : アルカリボタン電池(LR41)
・最高温度保持機能 : 実測した最高温度の測定値を保持する。
・測定値メモリー : 前回測定した測定値を記録する。
本品は、EMC規格に適合している。

【操作方法又は使用方法等】

1)電源ボタンを押す。
2)“ビッ”音の後に表示部の全セグメントが表示される。
その後、表示部右下に“M”が表示され、前回測定値が2秒間表示される。
3)その後、“C”の点滅が開始し、測定可能となる。
4)測温部を口腔(舌下)または脇下に密着させ安静にする。
5)“ピー・ピー”音が連続10秒間鳴ったら、測定が終了に近づいた合図である。体温を正確に測定するためにはさらに口腔(舌下)で約2分、脇下で約3分以上続けて測定する。
6)表示部に測定された体温が表示される。
7)測定が終わったら、電源ボタンを押せば、表示が消え電源OFFになる。

8)電源ボタンを押さなかった場合、約9分後に自動的に電源OFFになる。

【使用上の注意】

(1)小さなお子様の手の届かないところで保管してください。
また、お子様にご使用の際は、先端の測温部で目を突いたり、電池を誤飲しないよう保護者の監視下でご使用ください。
(2)運動・食事・入浴の後は十分な時間をおいてから体温を測定してください。
(3)口腔(舌下)の体温を測定する時は、指定の場所に挿入し測定中は動かないでください。本体を強く噛まないでください。
(4)体温以外の測定及び、人以外の測定に使用しないでください。
(5)口腔(舌下)の体温を測定する場合は、ご使用前に消毒用アルコールを染み込ませた布等で測温部を拭き、清潔にご使用ください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

高温や直射日光のあたる場所、湿気の多い場所や水のかかる場所、ほこりの多い場所、腐食性ガスの発生する場所で保管しないでください。

【取り扱い上の注意】

(1)分解・改造・修理は絶対行わないでください。
(2)電池カバーク一部分は防水性がありません。電池カバーク一部分に水をかけたり、本体に水等をつけたりしないでください。
(3)熱湯消毒はしないでください。
(4)丸洗いや超音波洗浄はしないでください。
(5)極端にぶげたり落としたり強い衝撃を与えないでください
(6)体温を測定する時、周囲温度が体温より高いような場合は測温部に水をかけ、測温部を冷やしてから測定し、終了のお知らせ音が鳴ったらすぐ表示値を読み取ってください。
(7)電池が消耗した場合、表示部の右下に電池低圧マークが表示されます。このような場合、電池を交換してください。
(8)電池交換の方法は、取扱説明書をご参照ください。

【保守・点検に関わる事項】

(1)使用前に清潔な状態にし、作動するか(電源が入るか)を確認してからご使用ください。
(2)汚れは、中性洗剤又はアルコールを染み込ませた布でよく拭いてください。

【製造販売業者及び製造者の氏名又は名称及び住所等】*

製造販売元 : 株式会社ドリテック
埼玉県越谷市流通団地2-3-9
製造元 : VEGA TECHNOLOGIES INC.(中国)
東莞東冠電子製品有限公司

連絡先

株式会社ドリテック お客様相談センター
フリーコール 0120-875-019
受付時間:月～金 9:00～12:00, 13:00～17:00
(祝祭日および当社指定休日を除く)

取扱説明書を必ずご参照ください。