

機械器具 (29) 電気手術器
超音波処置用能動器具 JMDN コード：70664000
高度管理医療機器

ハーモニック FOCUS[®] プラス

再使用禁止

【警告】

1. 誤って作動した場合に使用者や患者の負傷を避けるため、本品のアクティブブレードは使用時以外は患者、ドレープ、引火性物質に接触させないようにすること。作動中及び作動後は組織、ドレープ、手術着や他の部位へ接触させないこと。[組織内で長時間作動させると、アクティブブレード、クランプアーム及びクランプシャフトが熱くなることがあるため。]
2. 本品使用后、必ず止血の確認をすること。出血が認められる場合は、速やかに適切な方法で止血処置をすること。[出血等の有害事象が発生する恐れがあるため。]
3. 血管を凝固・切離（シール）する際には、太い血管、その他の血管の性状等によっては、十分な凝固・切離（シール）効果が得られない恐れがあることから、事前に別途縫合、結紮、クリップ留置等を併用することを検討すること。[太い血管、その他血管の性状等によっては、十分な凝固・切離（シール）効果が得られない恐れがあるため。]
4. 使用中に金属やプラスチック器具等の他の器具と接触しないようにすること。[アクティブブレードに引っかかり傷があるとアクティブブレードの早期不良を招く恐れがあるため。]

【禁忌・禁止】

使用方法

1. 再使用禁止。
2. 再滅菌禁止。
3. 骨の切開には使用しないこと。[本品は骨の切開を目的として設計されておらず、本品の温度が上昇し、故障を招く恐れがあるため。]

適用対象（患者）

1. 避妊のための卵管閉塞には使用しないこと。[本品は避妊を目的として設計されていないため、有効性が確認されておらず、卵管閉塞が実現できない可能性があるため。]
2. 直径 5 mm を超える血管には使用しないこと。[十分に凝固・切離（シール）することができず、出血する恐れがあるため。]

【形状・構造及び原理等】

1. 構成、各部の名称

本品は、5 mm 径以内の血管の凝固・切離（シール）に使用することを意図し設計された超音波メスの滅菌済み単回使用プローブである。付属品として滅菌済みの単回使用トルクレンチを含む。

<構成>




プローブ



トルクレンチ（付属品）

<プローブ 各部名称>

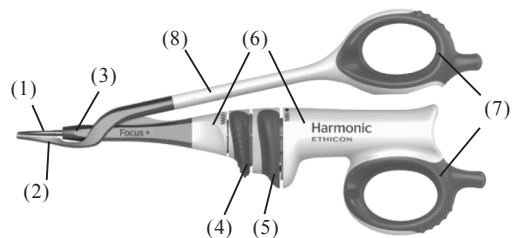

- (1) アクティブブレード（チタニウム合金^{*}）
- (2) クランプアーム（アルミニウム合金^{*}）及びティッシュパッド（ポリテトラフルオロエチレン^{*}）
- (3) クランプシャフト（アルミニウム合金^{*}）
- (4) MAX ハンドコントロールボタン
- (5) MIN ハンドコントロールボタン
- (6) ハウジング
- (7) フィンガーリング
- (8) フィンガーリングアーム

^{*}体液に接触する部分の原材料

2. 原理

本品は Adaptive Tissue Technology（アダプティブ ティッシュテクノロジー）と呼ばれる機能を有している。Adaptive Tissue Technology は、使用中、機器の状態を検知し、ジェネレーターからの出力を減少させる。また、作動音を変化させることもできる。

【使用目的又は効果】

本品は、目視下の外科手術（開腹・開胸手術等）において、超音波を用いて血管及び組織の凝固及び切開を行うプローブである。


【使用方法等】

使用前に併用機器同士の適合性を必ず確認すること。


本品の操作方法を以下に示す。

1. 組み立て

- (1) 本品を無菌的に包装から取り出す。
- (2) ブルーハンドピースを持ち、プローブの先端側から見て時計回りにトルクレンチを指で回転させて、ブルーハンドピースに取り付ける。
- (3) ブルーハンドピースとトルクレンチを持ち、スナップ音が 2 回するまでトルクレンチを時計回りに回転させ、ブルーハンドピースを完全に締め付ける。

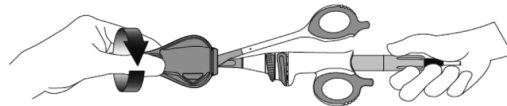

- (4) プロープからトルクレンチを取り外す。トルクレンチは、ブルーハンドピースの取り外しの際にも使用するので捨てずにとっておく。

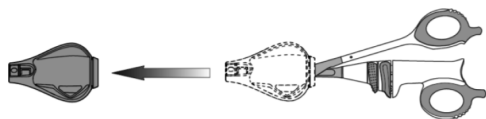

2. 操作

- (1) 1. で組み立てたプローブ部分をハーモニックアダプター及びジェネレーターに取り付け、ジェネレーターの電源をオンにする。
- (2) ジェネレーターのディスプレイ上の「△ (INCREASE)」、 「▽ (DECREASE)」ボタンで MIN の出力レベルを設定する。(MAX (最大出力) の出力レベルは予めレベル 5 に設定されており、変更できない。)
- (3) プロープは、フットスイッチ又はハンドスイッチを用いて操作する。フットスイッチ又はハンドスイッチの設定、操作等の機能については併用するジェネレーターの添付文書及び取扱説明書を必ず参照すること。
- (4) フットスイッチの左側のペダルを踏む又は、プローブの MIN ハンドコントロールボタンを押すと、選択した最小出力レベルで作動する。フットスイッチの右側のペダルを踏む又は、プローブの MAX ハンドコントロールボタンを押すと、最大出力レベルで作動する。
- (5) クランプアームを閉じ、切開創を通じてプローブを挿入する。プローブで血管を把持することで、直径 5 mm 以内の血管を凝固・切離 (シール) できる。プローブで組織のはく離、把持、凝固及び切開ができる。また、アクティブブレードの背面で組織の凝固及び切開ができる。
注意: 血管を凝固・切離 (シール) する際は、アクティブブレードとティッシュパッドで組織を把持した状態で、プローブを作動させること。

3. 取り外し

- (1) ジェネレーターの電源を切る。
- (2) クランプアームを閉じた状態で、プローブの先端にトルクレンチを取り付ける。
- (3) ブルーハンドピースを持ち、トルクレンチを反時計回りに回転させ締め付けを緩めた後、引き続き本品を手で回転させ、ブルーハンドピースから取り外す。

4. 併用医療機器

本品は、以下の医療機器と併用する。

	併用する医療機器
1	「販売名: E E S ジェネレーター (承認番号: 22500BZX00119000)」の構成部品である「ジェネレーター」、「フットスイッチ」及び「ハーモニックアダプター」
2	「販売名: ハーモニック® ブルーハンドピース (承認番号: 22100BZX00831000)」の構成部品である「ブルーハンドピース」

<使用方法等に関連する使用上の注意>

- (1) 破損防止のため、本品を清潔区域に投げ出さないこと。
- (2) プロープの着脱にはトルクレンチ以外のものは使用しないこと。
- (3) トルクレンチを用いて締め付ける際、ブルーハンドピースを損傷させるおそれがあるため、プローブを回転させないこと。トルクレンチを使用する際は、プローブを持たないこと。




- (4) トルクレンチが無菌領域から出た際には、新しいものと取り替えること。
- (5) トルクレンチを着脱する際に、本品を損傷しないように注意すること。
- (6) プロープとブルーハンドピースをジェネレーターに接続する前に、ジェネレーターの電源を入れないこと。
- (7) 動作不良が起きた場合に備え、特定の手法に適合する適切な予備機器を、必ず用意しておくこと。
- (8) 高ピッチの音が聞こえてくる場合はシステムが異常な状態にあり、超音波メス又はブルーハンドピースが正しく作動していないことを示す。ブルーハンドピースが耐用年数を過ぎている、又は超音波メスが正しく取り付けられていない可能性があり、異常な高温、また使用者や患者の負傷を起こす恐れがある。
- (9) アクティブブレードとクランプシャフトの間に血液や組織が蓄積すると、クランプシャフト先端が異常に高温になることがある。熱傷しないようクランプシャフト先端に蓄積した組織はすべて除去すること。
- (10) 使用者や患者の負傷や超音波メスの故障を招く恐れがあるため、アクティブブレードを曲げたり、研いだり、変形させないこと。
- (11) 作動中に、金属やプラスチックの機器と接触させないこと。アクティブブレードに亀裂が入ったり、破損したりする恐れがあり、ジェネレーターの連続音やエラーが表示されることがある。
- (12) アクティブブレードとティッシュパッドの間に組織が入っていない時には、クランプアームを閉じた状態で圧力をかけアクティブブレードを作動させないこと。組織がアクティブブレード全体にかかるように組織を把持せず、圧力をかけ作動させた場合、動作不良の原因となる鈍化やアクティブブレードやティッシュパッドの損傷を招く恐れがある。動作不良が発生すると、フットスイッチのペダル又はハンドコントロールボタンを押した時に本システムの動作不良を示す連続音が発生したり、エラーがディスプレイに表示されたりする。
- (13) 本品を実質臓器に使用する場合は、他の凝固処置の併用が必要になることがある。実質臓器の内部構造は複雑で見えにくいいため、一度に多量の組織を切離さないよう操作を慎重にし、主要な血管や胆管が束になっている部位での切離操作を避けること。
- (14) 使用者や患者の負傷を避けるため、電気手術用器具のアクティブ電極をアクティブブレードに極めて接触させて作動しないこと。特に脂肪組織では、本品の作動によって発生したエアロゾルが燃える可能性がある。
- (15) 本品使用時、露出したアクティブブレード表面が誤って周辺組織に触れないようにすること。
- (16) 骨などの固体表面で誤って本品を長時間作動しないように注意すること。アクティブブレードの温度が上昇し、アクティブブレードの故障を招く恐れがある。
- (17) アクティブブレードの作動中はジェネレーターから作動音が発生する。
- (18) ATT 機能が発揮されるとジェネレーターの作動音が変化する。
- (19) クランプアームとアクティブブレードの間に組織がほとんどない又は体液のような熱的影響があると作動音の変化やそのタイミングに影響を与える可能性がある。
- (20) 作動音の変化は必ずしも組織への効果を示しているものではない。作動音の変化を確認したら、手技の状況を確認し、切離を完了させるために、徐々に組織にテンションを加えるといったような方法により、組織に対する対応を完了させる。
- (21) 作動音の変化は外科的手術手技の経験の代わりになるものではない。

- (22) ジェネレーターの MAX（最大）出力レベルは予めレベル 5 に設定されており、変更できない。MIN（最小）出力レベルの初期値はレベル 3 である。切開速度を上げるには、ジェネレーターの出力レベルを上げ、凝固作用を高めるには、出力レベルを下げる。組織に与えられるエネルギーとその結果組織に生じる効果は、選択した出力レベル、アクティブブレードの形状、把持力、組織のテンション、組織の種類、病理、手術手技等の多くの要素の影響を受ける。
- (23) 作動音の変化は、ジェネレーターの“設定 (Settings)”メニューに表示される画面にて停止することができる。但し、作動音の変化がなくなるだけで、Adaptive Tissue Technology (アダプティブ ティッシュ テクノロジー) による出力の低下に影響を与えることはない。
- (24) プローブの性能を最適に保つために、手技中を通じて、プローブの先端を生理食塩液に浸して作動させて、アクティブブレード及びクランプアームを洗浄すること。



- (25) アクティブブレードを研磨剤でクリーニングしないこと。必要に応じ、湿った滅菌パッドで組織片や血液を除去することができる。
- (26) クランプアーム内に組織片がみられる場合には、止血鉗子等で組織片を取り除くこと。

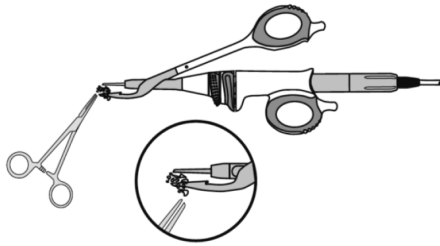

- (27) アクティブブレードの底部内側でバックカットする際や、アクティブブレードとクランプアームの間に組織を挟み込まずアクティブブレードを作動する際は、ティッシュパッド及び温度上昇したアクティブブレード、クランプアーム、シャフト先端の損傷を避けるため、クランプアームとアクティブブレードの間を解放状態にすること。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- エネルギー源（電気メス、レーザー、超音波）を使用する際は、組織からの煙やエアロゾルのような副産物が発癌性や感染性である可能性が常にある。開腹及び腹腔鏡下手術を行う際には、保護メガネ、濾過マスク、排煙機器等を使用すること。[組織からの煙やエアロゾルのような副産物は感染性を持つ恐れがあるため。]
- 低侵襲性手術器具は製造業者によって異なるため適合しないことがある。異なる製造業者の器具や付属品を同時に使用する場合は、手術開始前にその適合性を必ず確認すること。
- ジェネレーターの適合性を確認すること。本品はソフトウェアのバージョン情報 2013_1 以降の E E S ジェネレーター（承認番号：22500BZX00119000）に適合している。ソフトウェアのバージョン情報は、E E S ジェネレーター（承認番号：22500BZX00119000）の“設定 (Settings)”メニューの“システム情報 (System Information)”から確認できる。ジェネレーターの取扱説明書を参照すること。

- 低侵襲性手術は、適正な訓練を受け、その手技に精通している医師のみが行うこと。低侵襲性手術実施前には、手技、合併症、危険性に関する医学文献を必ず参照すること。
- レーザー、電気メス、超音波手術器具を使用する場合、患者や医療従事者へのショックや熱傷、器具やその他の医療器械の損傷を避けるため本品の原理と技術をよく理解しておくこと。また、絶縁やアースが完全であることを必ず確認すること。耐水設計の表示がない製品は、液体に浸さないこと。
- 本品の凝固性能はアテローム性の動脈硬化血管において評価されていない。アテローム性の動脈硬化血管を切開及び切離す際には適切に凝固されない恐れがあるため注意すること。

2. 不具合・有害事象

本品を適切に使用しない場合、以下の不具合・有害事象が発生する可能性がある。不具合・有害事象が観察された場合は、速やかに適切な処置、措置を講ずること。

(1) 重大な不具合

- アクティブブレードの亀裂及び破損
- クランプアームの破損
- ティッシュパッドの破損
- 動作不良

(2) 重大な有害事象

- 患者及び使用者の熱傷又は負傷
- 組織損傷、リーク、出血

3. その他の注意

- 使用後は本品を適切な容器に廃棄すること。体液が付着した装置や器具は、感染防止のため、特別な廃棄法が必要とされる場合がある。
- 使用・未使用に関わらず、一旦開封した本品はすべて廃棄すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- 高温、多湿、直射日光及び水ぬれを避けて保管すること。
- 本品の輸送環境は温度 -22 ～ 60℃、相対湿度 10 ～ 80% であること。
- 製品の先入れ先出しを励行すること。

2. 有効期間・使用の期限

- 使用の期限：滅菌後 5 年まで [自己認証による] (製品の包装に表示されている)。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

問い合わせ窓口／電話番号：03-4411-7905

製造業者：米国 ETHICON ENDO-SURGERY, INC.
ETHICON ENDO-SURGERY, LLC
エチコン エンドサージェリー社

