

機械器具 49 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器
管理医療機器 単回使用穿孔器（JMDN コード：12989002）

瞬間ピアッサー


再使用禁止

** 【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 耳たぶ及び耳軟骨へのピアッシング以外の目的で使用しないこと
[破損の原因となるため]
- 金属アレルギーの既往歴がある者は使用しないこと [アレルギー
反応が起こる可能性があるため]
- 樹脂針タイプは、脂肪乳剤等をはじめ油性成分、界面活性剤又はエ
タノール等の溶解補助剤を含む薬液を使用しないこと [本品が破損
する恐れがあるため]

** 【形状・構造及び原理等】

** <構成>

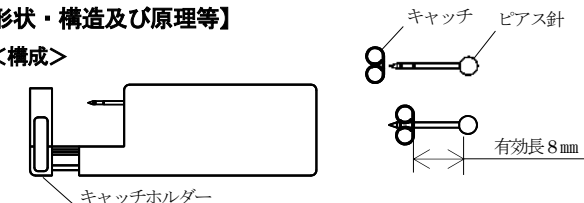

<タイプ>	<ピアス針太さ>	<有効長>
耳たぶ（金属針）	1.0 mm	8 mm
耳たぶ（樹脂針）	1.6 mm	
耳軟骨（金属針）	1.6 mm	

** <原材料>

ピアス針、キャッチの原材料は次のいずれか
ピアス針：ステンレス鋼、ステンレス鋼と純金メッキ、純チタン、
ポリカーボネート（PC）
キャッチ：ステンレス鋼、ステンレス鋼と純金メッキ、純チタン、
低密度ポリエチレン（LDPE）

<原理>

本体内部の打ち込みシャフトにスプリングを圧縮して配置し、キャッ
チホルダーを押し込むことで、スプリングの留め置き板バネをずらす
ことにより、針ホルダーが飛び出て、容易に耳たぶ及び耳軟骨にピア
スホールを開けることができる。

【使用目的又は効果】

ピアスを装着するために、耳たぶ及び耳軟骨にピアスホールを開ける
のに用いる穿孔器である。

【使用方法等】

- 清潔な手で耳たぶ及び耳軟骨を消毒し、挟むようにピアッサーを持
ちます。
- ピアス針の先端をピアッシングしたい箇所に合わせます。一回限りの
使い捨て製品であるので、試し打ちはできません。
- 位置を再度確認して、ピアッサーを強く握ると、「カシャ」という音
とともにピアス（ピアス針とキャッチ）が穿孔部にセットされます。
- 手をゆるめ、ピアッサーをまっすぐ下に下ろし、ピアッシングは完
了です。
- キャッチがきつめに設定されていますので、セット後に耳たぶ及び
耳軟骨に圧迫を感じた場合は、ゆるめてください。

<使用方法に関連する使用上の注意>

- ピアッサーは滅菌されているので、包装の破損等の異常が認められ
た場合は使用しない。また、使用期限を確認し、滅菌パックを開封
後は直ちに使用すること。[開封後長く放置すると汚染される恐れ
がある]
- 開封後は、ピアス針に手を触れずに使用すること。
- ピアッシングを行う前に、必ず手や穿孔部を清潔にすること。
- ピアッシングの際、周囲に人がいないことを確認して、安全な場所
で行うこと。[針ホルダーが不用意に飛び散ることがある]

** 【使用上の注意】

<重篤な基本的注意>

- 本品は医療機器であるため、必ず医師の指導に基づいて使用するこ
と。また医師の資格の無い方が、ピアッシングを行うことは法律で
禁じられている。
- 金属アレルギーの方は、金属針タイプを使用しないこと [アレルギ
ー反応が起こる可能性があるため]
- 金属アレルギーの方、耳たぶ及び耳軟骨に肌荒れを起こしている方、
耳たぶ及び耳軟骨の厚さが8mm以上の方、妊娠中や病気療養中の方、
出血しやすく血液の止まりが悪い方、また健康が優れないと思われ
る方は、使用しないこと。
- ピアッシング当日は、入浴、洗髪、パーマ等は控えること。
- 使用後穿孔部に多量の出血或いは内出血や異常な痛みがある場合
は、直ちに使用を中止して適切な治療を実施すること。
- 金属針タイプの場合、サウナなどの高温・多湿の環境及びスキー場
などの寒い場所に行くのを控えること。[金属針タイプは熱伝導率
が高く、火傷やしもやけの原因になる]
- ピアッシング後は、ピアスホールが完成するまでの間、医師の指導
に従うこと。
- 本品は、耳たぶ及び耳軟骨に穴を開けることを想定した製品である
本品を、ピアスホール完成後は使用しないこと。
- 幼児、子供等の手に触れないように注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。
- 使用期間：製造後 5 年（自己認証による）

※製造番号・使用期限は本体に表示

例（上）製造番号 : 2508011

（下）使用期限 : 2030-07-28

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

栃木精工株式会社

〒328-0012 栃木県栃木市平柳町 2 丁目 1 番 5 号

TEL：0282-27-1133

瞬間ピアッサーに関するご質問、お問い合わせは下記のフリーダイヤルで！

瞬間ピアッサーご相談窓口

0120-160-856

* 受付時間 AM9:00～PM5:00

（月曜日～金曜日）