

【警告】

- 初めての使用や長期間保管後の使用のときは、使用前に清掃・消毒をすること。[交差感染]
- 使用後は、吸引ホースや吸引ボトルを清掃・消毒をすること。[交差感染]
- 吸引ボトルの中間レベル以上に吸引物や液体を溜めないこと。

【禁忌・禁止】

併用禁忌

本品に取り付けるチップは、以下の製品以外を使用しないこと。

販売名：吸引チップセット


一般的名称：再使用可能な汎用吸引チップ

届出番号：13B2X10091000004

製造販売業者：株式会社 T R アンド K

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・型式

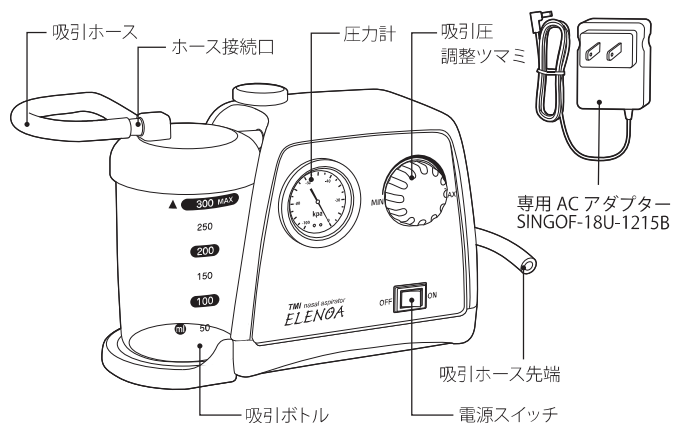

2. 電気的定格：

☆定格：100V～50/60Hz 29VA

(専用ACアダプターSINGOF-18U-1215B)

電撃に対する保護形式の分類：クラスⅡ機器

電撃に対する保護の程度による装着部の分類：B形装着部

EMC：JIS T 0601-1-2 に適合

3. 作動・動作原理

本体内の吸引ポンプはダイヤフラム式で、排気は本体底面から行い、吸引は機械式圧力調整器（圧力調整ツマミ）を経て吸引ボトルの接続コネクタに配管されている。この配管の内圧を圧力計が表示している。吸引ボトルの接続コネクタから吸引ボトルとの間にはフロートがあって、このフロート位置までに貯留水位が上昇すると接続コネクタとの管をフロートが塞ぎ、本体内に液体が吸い込まれない機構を有する。

【使用目的、効果又は効能】

救急時等において、主に鼻腔に溜った体液等の吸引に用いること。

【品目仕様等】

- 最大吸引圧力：-80kPa±10%
- 排気流量：15 L/min±20%
- 容器内破耐久性：-95kPa
- 吸引圧表示の精度：±5% f. s. (-10～-80kPa)
- チューブの耐圧性：つぶれ度は0.5未満

【操作方法又は使用方法等】

1. 使用前準備

- 電源スイッチがOFFで、吸引圧調整ツマミがMINであることを確認する。
- 付属品の吸引ホースの片端を本体のホース接続口へ接続する。
- 別売品のコネクタ及び吸引チップ（本申請に含まず）を準備し、次の接続をする。

- (4) コネクタへ付属品の吸引ホースの先端を接続

- (5) コネクタの他端へ吸引チップを接続

2. 吸引圧調整

- (1) 付属品の専用ACアダプターをACコンセントに挿入し、本体の電源スイッチをONにする。（本体内の吸引ポンプが作動）

- (2) 吸引ホースを折り曲げて吸引圧を上げ、吸引圧調整ツマミを回し圧力計が必要な圧力になるよう調整する。

- (3) 電源スイッチをOFFにして（吸引ポンプが停止）、吸引ホースの折り曲げを静かに離し、吸引圧を開放する。

（この吸引圧調整ツマミの位置が設定した吸引圧となる。）

3. 吸引

- (1) 本体の電源スイッチをONにする。（吸引ポンプが作動）

- (2) 別に用意した清潔な常水又は精製水などに吸引チップを入れ、吸引チップを濡らす。

- (3) 吸引チップを患者の鼻孔に挿入し、鼻水を吸引する。

4. 吸引物の捨て方

- (1) 本体の電源スイッチをOFFにし、電源プラグをコンセントから抜く。

- (2) 吸引ホースをホース接続口から外し、吸引ボトルを本体から外す。

- (3) 吸引ボトルのキャップを回して外す。

- (4) 吸引ボトル内の吸引物を捨てる。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 併用医療機器：吸引チップセットの添付文書も併せて参照すること。
 - 本書に記載されている以外の方法で使用しないこと。[予測できない動作をする恐れがある]
 - 吸引ボトルのパッキン及びフロートセットを必ず吸引ボトルキャップに取り付けて使用すること。
- ☆ 連続使用時間を守って使用すること。温度上昇により、同じところに10秒以上触れていると火傷の危険性がある。

【貯蔵・保管方法および使用期間等】

- 水のかからない場所、気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、硫黄分などの化学薬品を含んだ空気・ガスなどにより悪影響の生じる恐れのない場所に設置・保管すること。
- 洗浄・消毒した構成部品は、十分な水洗と速やかな乾燥させてから保管すること。
- 傾斜・振動・衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意して置き、落下させないこと。

【保守・点検に係る事項】

清掃・消毒

構成品		清掃	消毒
吸引ホース	内部	中性洗剤で希釈した清潔水を内部に通す	次亜塩素酸ナトリウム
	外部	中性洗剤で希釈した清潔水を含ませ拭く	次亜塩素酸ナトリウムを含ませ拭く
吸引ボトル		中性洗剤で希釈した清潔水を含ませ拭く	取扱説明書を参照ください
本体			

- 本品を滅菌しないこと。[高温・ガス・液体により故障のおそれ]
- 使用者による保守点検事項
本品の取扱説明書をご参照下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

※ 製造販売業者：株式会社 T R アンド K

東京都新宿区四谷2-9 N K 第7ビル

TEL 03-6457-8751 FAX 03-6457-8752

製造業者：株式会社八森電子デバイス