

ELENOA エレノア

【警告】

- 初めての使用や長期間保管後の使用のときは、使用前に清掃・消毒をすること。[交差感染]
- 使用後は、使用品を清掃・消毒をすること。[交差感染]
- 吸引ボトルの中間レベル以上に吸引物を溜めないこと。

【禁忌・禁止】

併用禁忌

本品に取り付ける吸引チップセット及び吸引ボトルセットは、以下の製品以外を使用しないこと。

販売名：吸引チップセット

一般的名称：再使用可能な汎用吸引チップ

届出番号：13B2X10091000004

製造販売業者：株式会社 TR アンド K

販売名：吸引ボトルセット


一般的名称：吸引機用ボトル

届出番号：13B2X10091000012

製造販売業者：株式会社 TR アンド K

【形状・構造及び原理】

1. 形状・型式

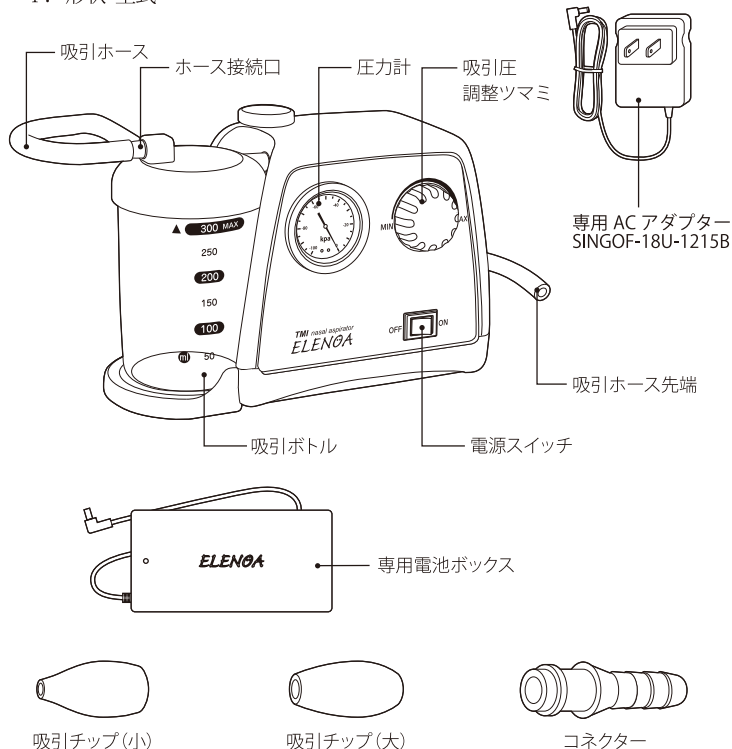

**2. 構成

表 1

名称	個数
本体（ELENOA エレノア）	1
吸引チップセット ※1	1
吸引ボトルセット ※2	1
専用 AC アダプター	1
吸引ホース	1
収納バッグ	1
専用電池ボックス（EL-B）	* 別売品

備考：構成品は、単体で販売することがある。

3. 電気的定格

定格：100V 50/60Hz 29VA

（専用 AC アダプター：SINGOF-18U-1215B）

*DC12V（LR06：単 3 形アルカリ電池 8 本） 25W（専用電池ボックス：EL-B）

* 電池使用時間（目安） 1 時間 30 分

電撃に対する保護形式の分類：クラス II 機器又は * 内部電源機器

EMC：JIS T 0601-1-2 に適合

4. 作動・動作原理

本体内の吸引ポンプはダイアフラム式で、排気は本体底面から行い、吸気は機械式圧力調整器（圧力調整ツマミ）を経て吸引ボトルの接続コネクターに配管されている。この配管の内圧を圧力計が表示している。吸引ボトルの接続コネクターから吸引ボトルとの間にはフロートがあって、このフロート位置までに貯留水位が上昇すると接続コネクターとの管をフロートが塞ぎ、本体内に液体が吸い込まれない機構を有する。

【使用目的、効果又は効能】

救急時等において、主に鼻腔に溜った体液等の吸引に用いること。

【使用方法】

1. 使用前準備

- 電源スイッチが OFF で、吸引圧調整ツマミが MIN であることを確認する。
- 専用 AC アダプターのプラグを本体 DC ジャックに接続し、AC アダプターの AC プラグをコンセントに接続する。
- * 電池で使用する場合には、専用電池ボックスに * 単 3 形アルカリ乾電池を入れ、専用電池ボックスのコネクターを本体 DC ジャックに接続する。
- 吸引ホースの片端を本体のホース接続口へ接続する。
- コネクター及び吸引チップを準備し、次の接続をする。
- コネクターへ吸引ホースの先端を接続する。
- コネクターの先端へ吸引チップを接続する。

2. 吸引圧調整

- 本体の電源スイッチを ON にする（本体内の吸引ポンプが作動）。
- 吸引ホースを折り曲げて吸引圧を上げ、吸引圧調整ツマミを回し、圧力計が必要な圧力になるよう調整する。
- 電源スイッチを OFF にして（吸引ポンプが停止）、吸引ホースの折り曲げを静かに離し、吸引圧を開放する。（この吸引圧調整ツマミの位置が設定した吸引圧となる。）

3. 吸引

- 本体の電源スイッチを ON にする。（吸引ポンプが作動）
- 別に用意した清潔な浄水又は精製水などで、吸引チップを濡らす。
- 吸引チップを患者の鼻腔に挿入し、鼻水を吸引する。

4. 吸引物の捨て方

- 本体の電源スイッチを OFF にし、電源プラグをコンセントから抜く。
- 吸引ホースをホース接続口から外し、吸引ボトルを本体から外す。
- 吸引ボトルのキャップを回して外す。
- 吸引ボトル内の吸引物を捨てる。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・併用医療機器：吸引チップセットの添付文書も併せて参照すること。
- * 専用電池ボックスを使用する場合は専用電池ボックスの取扱説明書内容を確認すること。

	販売名	一般的名称	届出番号	製造販売業者
※ 1	吸引チップ セット	再使用可能な 汎用吸引チップ	13B2X10091 000004	株式会社 TR アンド K
※2	吸引ボトル セット	吸引器用ボトル	13B2X10091 000012	株式会社 TR アンド K

- ・本書に記載されている以外の方法で使用しないこと。[予測できない動作をする恐れがある]
- ・吸引ボトルのパッキン及びフロートセットを必ず吸引ボトルキャップに取り付けて使用すること。
- ・連続使用時間を守って使用すること。温度上昇により、同じところに 10 秒以上触れていると火傷の危険性がある。
- ・電池は、使用推奨期限内の * 単 3 形アルカリ乾電池をお使いください。

【保管方法及び有効期間】

* 使用環境条件

温度範囲：5℃～ 35℃

湿度範囲：30%～ 75%RH（結露無し）

* 保管環境条件

温度範囲：-10℃～ 60℃

湿度範囲：10%～ 75%RH（結露無し）

- ・水のかからない場所、高温・多湿でない場所。
- ・直射日光、ほこり、塩分、硫黄分などの化学薬品を含んだ空気・ガスなどにより悪影響の生じる恐れのない場所。
- ・洗浄・消毒した構成品は、十分な水洗と速やかな乾燥をさせてから保管すること。
- ・振動・衝撃などのない場所。
- * 耐用年数：5 年（自己認証による）

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

- ・割れ、ひび、バリや突起物の怪我のもとになる欠点の有無を確認する。
- ・汚れ、傷の有無を確認する。
- ・本品の取扱説明書を参照ください。

清掃・消毒

構成品		清掃	消毒
吸引 ホース	内部	中性洗剤で希釈した清潔 水を内部に通す	次亜塩素酸ナトリウム
	外部	中性洗剤で希釈した清潔 水を含ませ拭く	次亜塩素酸ナトリウムを 含ませ拭く
吸引ボトル		中性洗剤で希釈した清潔 水を含ませ拭く	取扱説明書を参照ください
本体			

*※本体を滅菌しないこと。[高温・ガス・液体により故障の恐れ]

製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社 T R アンド K

* 東京都新宿区四谷 2-9 NK 第 7 ビル
TEL 03-6457-8751 FAX 03-6457-8752