

**2018年 9月改訂(第4版)
*2017年 9月改訂(第2版)

医療機器認証番号 228AGBZX00080000

機械器具 (58) 整形用機械器具
管理医療機器 歯列矯正用アタッチメント JMDNコード: 41059000

再使用禁止

リアルレジンプラケット


【禁忌・禁止】

- ・原材料に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- ・本来の用途以外には使用しないこと。
- ・再使用禁止。


【形状・構造及び原理等】

1. 形状

フックなし

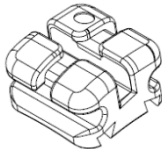

フックあり

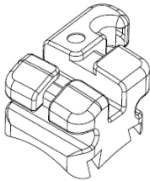

ROTH

部位	トルク	アング レーション	製品番号				カラー
			. 018R	. 018L	. 022R	. 022L	
上顎							
中切歯	+11°	+5°	600-11	600-21	610-11	610-21	緑
側切歯	+8°	+9°	600-12	600-22	610-12	610-22	黒
犬歯	-2°	+8°	600-13 (H)	600-23 (H)	610-13 (H)	610-23 (H)	赤
第一、二 小臼歯	-7°	0°	600-14/15/24/25		610-14/15/24/25		紫
			600-14 (H)	600-24 (H)	610-14 (H)	610-24 (H)	
			/15 (H)	/25 (H)	/15 (H)	/25 (H)	
下顎							
前歯	0°	0°	600-31/32/41/42		610-31/32/41/42		黄
犬歯	-11°	+7°	600-43 (H)	600-33 (H)	610-43 (H)	610-33 (H)	青
第一、二 小臼歯	-17°	0°	600-34/35/44/45		610-34/35/44/45		茶
			600-44 (H)	600-34 (H)	610-44 (H)	610-34 (H)	
			/45 (H)	/35 (H)	/45 (H)	/35 (H)	

(H) : フックあり

カラー : ペイントの色調

MBT

部位	トルク	アング レーション	製品番号				カラー
			. 018R	. 018L	. 022R	. 022L	
上顎							
中切歯	+17°	+4°	620-11	620-21	630-11	630-21	緑
側切歯	+10°	+8°	620-12	620-22	630-12	630-22	黒
犬歯	0°	+8°	620-13 (H)	620-23 (H)	630-13 (H)	630-23 (H)	赤
第一、二 小臼歯	-7°	0°	620-14 (H)	620-24 (H)	630-14 (H)	630-24 (H)	紫
			/15 (H)	/25 (H)	/15 (H)	/25 (H)	
下顎							
前歯	-6°	0°	620-31/32/41/42		630-31/32/41/42		黄
犬歯	0°	+3°	620-43 (H)	620-33 (H)	630-43 (H)	630-33 (H)	青
第一、二 小臼歯	-12°	0°	620-44 (H)	620-34 (H)	630-44 (H)	630-34 (H)	茶
			/45 (H)	/35 (H)	/45 (H)	/35 (H)	

(H) : フックあり

カラー : ペイントの色調

スタンダード

部位	トルク	アング レーション	製品番号				カラー
			. 018R	. 018L	0. 22R	0. 22L	
上顎							
中切歯	0°	0°	640-11		650-11		緑
側切歯			600-31H		610-31		黄
犬歯 第1/第2 小臼歯			640-13H	640-23H	650-13H	650-23H	赤
下顎							
前歯	0°		600-31		610-31		黄
犬歯 第1/第2 小臼歯			640-23H	640-13H	650-23H	650-13H	赤

(H) : フックあり

カラー : ペイントの色調

2. 原理

スロット部に装着されたワイヤーにより矯正力を助長することで歯牙を所定方向に移動させる。

3. 原材料

ポリカーボネート、ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

歯又は他の器材に付けて矯正力を付与するために用いる。

【使用方法等】

【使用方法】

1. ブラケットを装着する前に歯面の清掃を行う。
2. 患者に合ったブラケットを選択する。
3. 水分を含んだ脱脂綿等でペイントをふき取る。(ペイントマークは、遠心若しくは近遠心歯頸側のタイウィングに付いています。)
4. ブラケットを歯面に接着固定する。
5. ブラケット周囲の余剰な接着材を除去する。
6. 接着材が十分に硬化した後、スロット部に歯列矯正用ワイヤを通し、その他必要な矯正用材料を装着する。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

90℃以上に加熱すると品質が低下するので、加熱タイプの接着材は使用しないこと。

【使用上の注意】

- 1) 【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- 2) 歯科の従事者以外は使用しないこと。
- 3) 装着後は、硬い物を咬まないよう指導すること。

重要な基本的注意

本品の使用により、発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた場合には使用を中止し、医師の診察を受けること。

* 【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 株式会社 歯愛メディカル
住所 : 石川県白山市鹿島町1-9-1
電話番号 : 076-278-8800

製造業者 : HUBIT Co., LTD. (ヒュービット社)
製造国 : 大韓民国