

ペーストフィラー


【禁忌・禁止】

- ・本品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。

**【形状・構造及び原理等】


1. 種類

(1) ダイナ

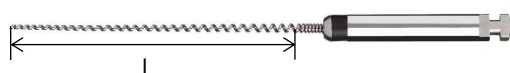

ISO サイズ	操作部長さ L (mm)
025, 030, 035, 040	19, 23

(2) レンツロ

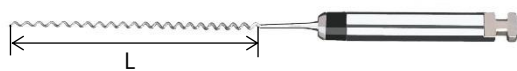

ISO サイズ	操作部長さ L (mm)
025, 030, 035, 040	18.5, 22.5

JIS T 5221-4: タイプ 3 器具

2. 原理

能動型機器に接続し、螺旋状の作業部分を回転させて充填材料等を根管に送達する。

3. 原材料

ブレード部: ステンレス鋼

シャンク部: ARCAP 合金

4. 包装

4 本/ケース

【使用目的又は効果】

能動型機器に接続し、根管に根管充填材料等を充填する。

【使用方法等】

1. 使用準備

以下の方法で滅菌を行う。

滅菌方法: オートクレーブ滅菌 (134℃、18 分)

2. 使用手順

- (1) コントラアングルハンドピースに取り付ける (シャンク径: $\phi 2.35$ mm)。
- (2) 試運転を行う (回転、回転方向の確認)。
- (3) ブレード部に充填材や薬剤を塗布し、根尖から 1 mm の地点まで根管に挿入する。
- (4) 適切な位置に固定して、ハンドピースを始動させる。
推奨回転速度: 1000 rpm (低速)
- (5) 回転させながら引き戻す。
- (6) (3) ~ (5) の操作を繰り返し、根管表面に沿って充填材や薬剤を充填する。
- (7) 使用後は、清浄、除染、滅菌を行う。

【使用上の注意】

1. 感染防止のため、高圧蒸気滅菌を行い、滅菌されたことを確認してから使用すること。
2. 使用に際しては、保護眼鏡を使用すること。
3. 口腔への機器の落下を防ぐため、使用前に、患者の口腔にラバーダムを装着すること。
4. 破損する恐れがあるため、回転速度を厳守すること。
5. 取り付ける能動型機器の取扱説明書に従って、シャンクを確実に奥まで挿入し、半チャックでないことを確認すること。
6. 使用前に口腔外で予備回転を行い、振れがないことを確認すること。
7. 無理な角度や過度の加圧での使用は避けること。
8. 廃棄の際は、医療廃棄物として適切な処理をすること。
9. 製品に傷やダメージが認められた場合は交換すること。
10. 超音波洗浄器での洗浄は、刃部の劣化を避けるため、スタンド類にセットしてから洗浄すること。
11. 手指等の穿孔に注意して使用すること。
12. 本品は EDTA 溶液、次亜塩素酸ナトリウム等の腐食性溶液に長時間浸漬した場合、腐食等の恐れがあるので注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 高温、多湿、直射日光及び水濡れを避け、室温で保管すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 清浄方法
ナイロンブラシ等を使用し、付着した異物を完全に洗い落とす。
2. 洗浄方法
防錆洗浄液に浸漬し、超音波洗浄器で洗浄する。
3. 滅菌方法
高圧蒸気滅菌器に 134℃で 18 分以上かける。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社 歯愛メディカル

住所: 石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号: 076-278-8800

製造業者: FFD TIVOLY (エフエフディーエム ティボリー社)

製造国: フランス