

機械器具 (29) 電気手術器
高度管理医療機器 超音波処置用能動器具 (JMDN コード：70664000)
ハーモニック® HD 1000 i

再使用禁止

【警告】

1. 本品使用後、必ず止血の確認をすること。出血が認められる場合は、速やかに適切な方法で止血処置をすること。[出血等の有害事象が発生する恐れがあるため。]
2. 血管を凝固・切離（シール）する際には、事前に別途縫合、結紮、クリップ留置等を併用することを検討すること。[太い血管、その他血管の性状等によっては、十分な凝固・切離（シール）効果が得られない恐れがあるため。]

【禁忌・禁止】

使用方法

1. 再使用禁止。
2. 再滅菌禁止。
3. 骨の切開には使用しないこと。[本品は骨の切開を目的として設計されておらず、本品の温度が上昇し、故障を招く恐れがあるため。]


適用対象（患者）

1. 避妊のための卵管閉塞には使用しないこと。[本品は避妊を目的として設計されていないため、有効性が確認されておらず、卵管閉塞が実現できない可能性があるため。]
2. Advanced Hemostasis モードでは直径 7 mm を超える血管には使用しないこと。[7 mm 径を超える血管においては、十分に凝固・切離（シール）することができず、出血する恐れがあるため。]
3. Energy ハンドコントロールボタンを用いた場合、直径 5 mm を超える血管には使用しないこと。[5 mm 径を超える血管においては、十分に凝固・切離（シール）することができず、出血する恐れがあるため。]

【形状・構造及び原理等】

1. 構成、各部の名称

本品は、5 mm 径以内の血管を凝固・切離（シール）することを意図し、また、Advanced Hemostasis モードでは、7 mm 径以内の血管を凝固・切離（シール）することを意図し設計された超音波メスの滅菌済み単回使用プローブである。本品のハウジングには、クランプアームを閉じたこと及び開いたことを示すクリック音/触感メカニズムが内蔵されている。さらに、ローテートノブを操作することで、シャフトを 360° 回転させることができる。また、本品にはシャフトの長さが異なる 2 種類のタイプが存在する。直接切開創に挿入する、もしくは公称 5 mm 径以上のトロカールスリーブを通して操作することができる。製品に印字されているダッシュ記号は、各ボタン使用時の適用血管径の目安を表している。

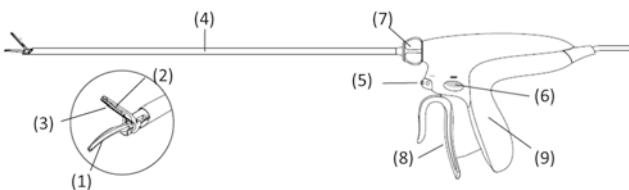

- (1) アクティブブレード (チタニウム合金*及びテトラフルオロエチレン - ヘキサフルオロプロピレン共重合体*)
- (2) クランプアーム (ステンレス鋼*)
- (3) ティッシュパッド (ポリテトラフルオロエチレン*)
- (4) シャフト、ピン (ステンレス鋼*) 及びロゴ (エポキシ系インク*)
- (5) Energy ハンドコントロールボタン 
- (6) Advanced Hemostasis ハンドコントロールボタン 
- (7) ローテートノブ
- (8) トリガー
- (9) ハウジング

*体液に接触する部分の原材料

2. 原理

- (1) 本品は Adaptive Tissue Technology (アダプティブ ティッシュ テクノロジー) と呼ばれる機能を有している。Adaptive Tissue Technology は、使用中、機器の状態を検知し、ジェネレーターからの出力を減少させる。また、作動音を変化させることもできる。
- (2) Advanced Hemostasis モードによる作動が可能である。Advanced Hemostasis モードでは、ジェネレーターの出力が変化する。

【使用目的又は効果】


本品は、内視鏡下手術又は外科手術において、超音波を用いて血管及び組織の凝固及び切開を行うプローブである。

【使用方法等】

本品の操作方法を以下に示す。

1. 操作方法

- (1) 本品を包装から無菌的に取り出す。破損防止のため、本品を清潔区域に投げ出さないこと。
- (2) 本品を直接ジェネレーターに取り付け、ジェネレーターの電源をオンにする。
- (3) ジェネレーターのディスプレイ上の「△ (INCREASE)」 「▽ (DECREASE)」 ボタンにより出力レベルを調整する。Energy ハンドコントロールボタンの出力レベルのみ、レベル 1 からレベル 5 まで調整可能である。初期設定では、出力レベルはレベル 5 である。
- (4) トリガーを握り込んでクランプアームを閉じ、トロカールスリーブ又は切開部を通じて本品を挿入する。

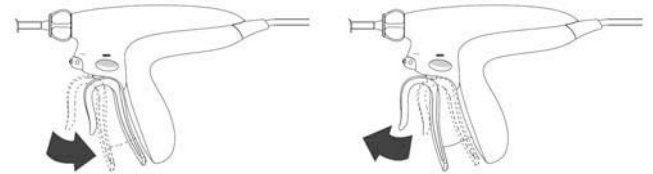

- (5) 目的の位置で、ジョー内側に組織を取り込む。本品のシャフトは、視野を良好に保ち、目的の組織に達するために、ローテートノブを用いて 360° 連続的に回転させることができる。
- (6) 目的の組織をジョー内側に把持するために、トリガーが動かなくなるまで (かつ「カチッ」という音が聞こえるまで) トリガーを握り込む。

- (7) ブレードを作動させるために、フットスイッチのペダル又は本品の Energy ハンドコントロールボタンを押す。
- 1) フットスイッチの左側のペダルを踏む又は、本品の Advanced Hemostasis ハンドコントロールボタンを押すことで Advanced Hemostasis モードでの作動が可能となる。本品の Advanced Hemostasis ハンドコントロールボタンを用いる際、ジョーを完全に閉じるまで作動させることができない。このボタンはジェネレーターのアルゴリズムを作動させ、トリガーを完全に握り込むことで、太めの血管の凝固・切離（シール）を可能とする（最大で直径 7 mm 以内）。
 - 2) フットスイッチの右側のペダルを踏む又は、本品の Energy ハンドコントロールボタンを押すと選択した出力レベル（レベル 1 からレベル 5 まで）で作動する。Energy ハンドコントロールボタンでは、トリガーを完全に握り込むことで直径 5 mm までの血管の凝固・切離（シール）が可能となる。また、トリガーを完全に握り込む必要のない部位において、その他の軟組織への適用（バックカット）が可能となる。
- (8) 本品をジェネレーターから取り外す。
(9) ジェネレーターの電源をオフにする。

2. 併用医療機器


本品は、以下の医療機器と併用する。

	併用する医療機器
1	「販売名：E E S ジェネレーター（承認番号：22500BZX00119000）」の構成部品である「ジェネレーター」及び「フットスイッチ」

<使用方法等に関連する使用上の注意>

- (1) 動作不良が起きた場合に備え、特定の手法に適合する適切な予備機器を、必ず用意しておくこと。
- (2) アクティブブレードとシャフトの間に血液や組織が蓄積すると、シャフト先端が異常に高温になることがある。熱傷しないようシャフト先端に蓄積した組織はすべて除去すること。
- (3) 使用者や患者の負傷や本品の故障を招く恐れがあるため、アクティブブレードを曲げたり、研いだり、変形させないこと。
- * (4) 使用中に金属やプラスチック器具等の他の器具（鉗子類や子宮マニピュレーター等）と接触しないようにすること。[アクティブブレードに引っかき傷ができ、アクティブブレードの亀裂又は破損、及び早期不良を招く恐れがあるため。]
- (5) 凝固・切離（シール）中に、意図せず本品の作動が停止した場合は、クランプアームを閉じたまま、再作動すること。凝固・切離（シール）中にトリガーを開放すると、止血できない恐れがある。
- (6) 本品を実質臓器に使用する場合は、他の凝固処置の併用が必要になることがある。実質臓器の内部構造は複雑で見えにくいため、一度に多量の組織を切離しないよう操作を慎重にし、主要な血管や胆管が束になっている部位での切離操作は避けること。
- (7) 使用者や患者の負傷を避けるため、電気手術器具のアクティブ電極を本品のアクティブブレードに極めて接近させて作動しないこと。特に脂肪組織では、本品の作動によって発生したエアロゾルが燃える可能性がある。
- (8) 本品使用時、露出したアクティブブレード表面が誤って周辺組織に触れないようにすること。
- (9) 骨などの固体表面で誤って本品を長時間作動しないよう注意すること。アクティブブレードの温度が上昇し、アクティブブレードの故障を招く恐れがある。
- (10) 切開速度を上げるには、ジェネレーターの出力レベルを上げ、凝固効果を高めるには、出力レベルを下げる。肝実質のようなより厚い組織に使用する場合は、推奨される出力レベルはレベル 3 であり、ゆっくりとジョーを閉じること。組織に与えられるエネルギーとその結果組織に生じる効果は、選択した出力レベル、アクティブブレードの形状、把持力、組織のテンション、組織の種類、病理、手術手技等の多くの要素の影響を受ける。


- (11) Energy ハンドコントロールボタンでは、切開速度が大きく、Advanced Hemostasis モードでは、切開速度が小さく、凝固効果が高い。
- (12) 止血できない恐れがあるため、ジョーを完全に閉じる前に作動が必要な部位においては、Advanced Hemostasis モードを使用しないこと。Advanced Hemostasis モードでは、ジョーを完全に閉じるまで、作動させることができない。
- (13) 本品の性能を最適に保つために、手技中を通じて、本品の先端を生理食塩液に浸して作動させ、アクティブブレード及びクランプアームを洗浄すること。

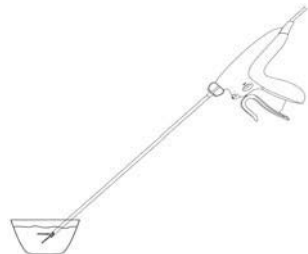

- (14) アクティブブレードを研磨剤でクリーニングしないこと。必要に応じて、湿った滅菌パッドで組織片や血液を除去すること。
- (15) クランプアーム内に組織片がみられる場合には、本品を作動させないように注意しながら、止血鉗子等で組織片を取り除くこと。



- (16) 凝固・切離（シール）するには、トリガーを完全に握り込み、クランプアームとアクティブブレードの間に血管を完全に挟み込む必要がある。ジョーを完全に閉じるためには、トリガーが完全に動かなくなるまで握り込むこと。トリガーが完全に閉まると、「カチッ」という音と感触で分かるようになっている。トリガーが閉じた状態を保つために、切離中はトリガーを握り込み続ける必要がある。
- (17) アクティブブレードでバックカットする際や、アクティブブレードとクランプアームの間に組織を挟まずアクティブブレードを作動する際は、ティッシュパッド及び温度上昇したアクティブブレード、クランプアーム、シャフト先端の損傷を避けるため、クランプアームとアクティブブレードの間を開放状態にすること。

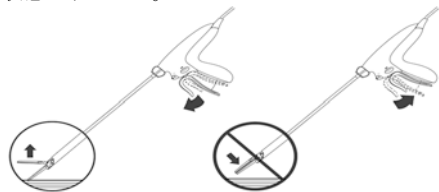

- * (18) クランプアームを閉じたままアクティブブレードを長時間作動させ、組織の切離が完了しても作動を継続した場合は、ティッシュパッドの損傷を招く恐れがある。
- (19) クランプアームを閉じてから、トロカールスリーブ又は切開口を通して本品を取り出す。
- (20) 本品が損傷する恐れがあるため、本品の先端部を開いた状態でトロカールスリーブを通さないこと。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) エネルギー源（高周波、超音波等）を使用する際は、組織からの煙やエアロゾルのような副産物が発癌性や感染性である可能性が常にある。開腹及び腹腔鏡下手術を行う際には、保護メガネ、濾過マスク、排煙機器等を使用すること。

- (2) 誤って作動した場合に使用者や患者の負傷を避けるため、本品のアクティブブレードは使用時以外は患者、ドレープ、引火性物質に接触させないようにすること。作動中及び作動後は組織、ドレープ、手術着や他の部位へ接触させないこと。
[組織内で長時間作動させると、アクティブブレード、クランプアーム及びシャフトが熱くなることがあるため。]
- (3) ジェネレーターの適合性を確認すること。本品はソフトウェアのバージョン情報 2016-1 以降の E E S ジェネレーター（承認番号：22500BZX00119000）に適合している。ソフトウェアのバージョン情報は、E E S ジェネレーター（承認番号：22500BZX00119000）の“設定（Settings）”メニューの“システム情報（System Information）”から確認できる。ジェネレーターの取扱説明書を参照すること。

2. 不具合・有害事象

本品を適切に使用しない場合、以下の不具合・有害事象が発生する可能性がある。不具合・有害事象が観察された場合は、速やかに適切な処置、措置を講ずること。

(1) 重大な不具合

- 1) アクティブブレードの亀裂及び破損
- 2) クランプアームの破損
- 3) ティッシュパッドの破損
- 4) 動作不良

(2) 重大な有害事象

- 1) 患者及び使用者の熱傷又は負傷
- 2) 組織損傷、リーク、出血

【保管方法及び有効期間等】

* 1. 保管方法

- (1) 本品の保管条件は温度 30℃以下、相対湿度 10～65%であること。
- (2) 輸送条件：水濡れを避けること。熱を避けること。

2. 有効期間

- (1) 使用の期限は製造後 5 年までである [自己認証による]（製品の包装に表示されている）。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

問い合わせ窓口/電話：03-4411-7905

製造業者：

米国 ETHICON ENDO-SURGERY, INC.

ETHICON ENDO-SURGERY, LLC

エチコン エンドサージェリー社

