

機械器具 32 医療用吸引器
管理医療機器 一般的名称：電動式可搬型吸引器 (JMDNコード：36616030)
電動鼻吸引器 S-80

【警告】

- 本製品および各部品は、必ずお子さまの手の届かないところに保管してください。【自分で作動させようとした場合、誤飲やケガなど思わぬ事故の原因となります。】万一、誤飲した場合は、ただちに医師に相談してください。
- お子さまに鼻の病気がある場合には、本製品を使用する前に医師に相談してから使用してください。
- 使用中に出血したり、お子さまが痛がる場合には、すぐに使用をやめ、ただちに医師に相談してください。【鼻孔内の粘膜を痛めたり鼻腔炎をおこします。】
- 複数のかたが使用する場合は、その都度、吸引ノズルを新しいものと交換するか、洗浄し、消毒または除菌してから使用してください。【感染症の危険があります。】
- 本体から煙が出たり、異臭、異音がする場合は、すぐに使用を中止してコンシューマープラザまでお問い合わせください。
- 分解、修理、改造は行わないでください。

【禁忌・禁止】

＜使用方法＞


本書に記載されている使用目的以外で使用しないでください。

＜併用医療機器＞

- 1) MRI検査を行う際は本品を検査室に持ち込まないこと。
【MR装置への吸着や、火傷等のおそれがあるため。】
- 2) 高気圧酸素治療装置に本品を持ち込まないこと。
【誤作動や破損、爆発のおそれがあるため。】

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・型式

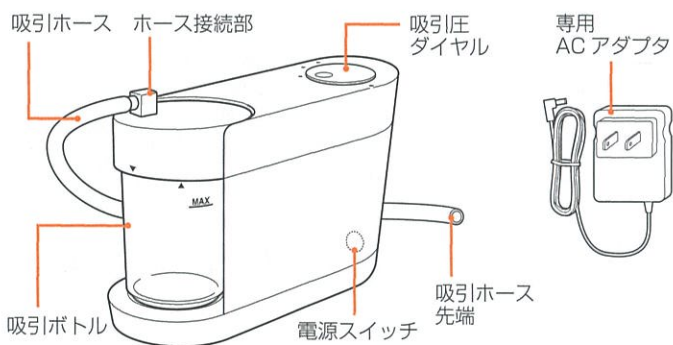

2. 定格

定 格：100V～50Hz/60Hz 29VA
(専用 AC アダプタ：SINGOF-18U-1215B)
電撃に対する保護形式の分類：クラスⅡ機器
電撃に対する保護の程度による分類：B 形装着部
* EMC：JIS T 0601-1-2 に適合
最大吸引圧力：-80kPa±10%
排気流量：15L/min±20%
容器内破耐久性：-95kPa
ホースの耐圧性：つぶれ度は 0.5 未満

3. 作動・動作原理

本体内の吸引ポンプにより、吸引圧を発生させ吸引ノズル・吸引ホースを経て、吸引ボトルの槽内に鼻水を貯留させる。
吸引圧は吸引圧ダイヤルにより強・中・弱を無段階に調整できる。
吸引ボトルにはフロートが設置され、貯留水位がフロート位置まで上昇すると、吸引管をフロートが塞ぎ、溢れおよび機器内部へ吸い込みを防ぐ。

【使用目的又は効果】

家庭内の新生児及び乳幼児の鼻腔内の鼻水の吸引に使用する。

【使用方法等】

1. 使用準備

- 1) 本体の電源スイッチが OFF で、吸引圧ダイヤルが最少であることを確認する。
- 2) 専用 AC アダプタのプラグを本体の DC ジャックに接続し、AC アダプタの電源プラグをコンセントに差し込む。
- 3) 吸引ホースの片端を本体のホース接続口に接続する。
- 4) 吸引ノズルを吸引コネクタに接続し、吸引コネクタの片端を吸引ホースに接続する。

2. 吸引

- 1) 本体の電源を ON にする(吸引ポンプが作動)。
- 2) 別途用意した清潔な水に吸引ノズルを入れ、吸引ノズルを濡らす。
- 3) 吸引ノズルをお子さまの鼻孔に装着し、吸引圧力を低圧から調整しながら鼻水を吸引する。

3. 清掃・消毒

- 1) 本体の電源スイッチを OFF にし、電源プラグをコンセントから抜く。
- 2) 吸引ホースを本体のホース接続口からはずし、吸引ボトルを本体からはずす。
- 3) 吸引ボトルのキャップを回してはずす。
- 4) 吸引ボトル内の吸引物を捨てる。
- 5) 吸引ノズル、吸引コネクタ、吸引ホース、吸引ボトル、吸引ボトルキャップを水洗いし、消毒および乾燥を行い、収容する。

4. 組み合わせて使用可能な吸引ノズルセット

医療機器製造販売届出番号：13B2X10091000008

販売名：吸引ノズルセットが使用できる。

*【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- 併用医療機器：吸引ノズルセットの添付文書も併せて参照すること。
- 本書で記載されている以外の方法で使用しないこと。(予期できない動作をするおそれがある)
- 吸引ボトルのバックンおよびフロートセットを必ず吸引ボトルキャップに取り付けて使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 水のかからない場所、気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、硫黄分などの化学薬品を含んだ空気・ガスなどにより悪影響の生じるおそれのない場所に設置、保管すること。
- 洗浄・消毒した構成部品は、十分な水洗いと速やかな乾燥をさせてから保管すること。
- 傾斜・振動・衝撃(運搬時を含む)など安定状態に注意して置き、落下させないこと。

【保守・点検に係る事項】

清掃・消毒

機械品		清掃	消毒
吸引ホース	内部	中性洗剤が希釈された清潔な水溶液を内部に通す。	次亜塩素酸ナトリウム
	外部	中性洗剤が希釈された清潔な水溶液を含ませ拭く。	次亜塩素酸ナトリウムを含ませ拭く。
吸引ボトル		中性洗剤が希釈された清潔な水を含ませ拭く。	取扱説明書をご参照ください。
本体			

使用者による保守点検事項_本品の取扱説明書をご参照ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社 TR アンド K

〒160-0004 東京都新宿区四谷 2-9 NK 第 7 ビル 501

TEL：03-6457-8751 FAX：03-6457-8752

製造業者：株式会社 八森電子デバイス

〒018-2643 秋田県山本郡八峰町八森字家の上 166-2

発売元：コンビ株式会社

コンシューマープラザ (Customer Service Center)

住所：〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区約上新田 271

TEL：048-797-1000 FAX：048-798-6109

受付時間：9:30～17:00 (日祝日、年末年始を除く)