

機械器具 58 整形用機械器具
管理医療機器 電池電源式骨手術用器械 70959020

アキュラン システム

【禁忌・禁止】

＜併用医療機器＞「相互作用の項参照」
他社製品との組み合わせで使用しないこと。[本品の誤動作、
破損や劣化を起こすおそれがある。]

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

1) 本体

(1) サジタルソー

GA673	GA331
	
GA336	GA337
	

(2) レシプロケーティングソー

GA674	GA334
	

(3) ドリル・リーマー

GA671, GA672	GA344	GA330
		

オールモデル本体付属品：ファネル (GA678, GA679)



アキュラン 3Ti タイプ本体付属品：キャップ (GA675)



2) バッテリー

ニッケル水素電池式: GA666, GA676	リチウムイオン式: GA346
	

3) チャージャー

GA677: GA666, GA676 用	GA320: GA666, GA676, GA346 用
	

チャージャー付属品：専用電源ケーブル (TE735)



＜電気的定格＞

バッテリー

品番	定格電圧	容量
GA666	DC9.6V	1.05Ah
GA676		1.95Ah
GA346	DC9.9V	10.89Wh

チャージャー(GA677, GA320)

定格電圧	AC 100-120V、220-240 V
周波数	50-60Hz
定格ヒューズ	1.25A (GA677)、T2.5 AH (GA320)

2. 機器の分類

電撃に対する保護形式の分類

本体：内部電源 ME 機器

チャージャー：クラス I の ME 機器

電撃に対する保護の程度による装着部の分類

本体 (1)-(3)：BF 形

水の浸入に対する保護の程度

チャージャー(GA677)：IPX0

チャージャー(GA320)：IP21

3. 原理

チャージャーを用いてバッテリーを充電する。充電したバッテリーより供給される電力により、本体（モーター）を稼動する。モーターの回転運動をツールに伝達又はモーターの回転運動を往復運動に変換しツールを作動させ、骨の切断、掘削、貫通孔の作製を行う。

取扱説明書を必ずご参照ください。

【使用目的又は効果】

骨手術において、切削、切除、切断、穿孔を行うために用いる。

* 【使用方法等】

1. 操作方法

- (1) 使用前にバッテリーの充電を行う。
- (2) 本体及びファネル（GA678）、キャップ（GA675）は使用前に必ず洗浄滅菌を行う。
- (3) 直接介助者が本体にファネル（GA678）を装着する。



- (4) 間接介助者がバッテリーを本体に挿入する。



- (5) 間接介助者がファネル（GA678）を本体から取り去る。



- (6) 直接介助者がキャップ（GA675）をはめる。



- (7) アタッチメントあるいはソーブレードを取り付ける。
- (8) メインスイッチの安全装置を解除しスイッチを押し、骨の切断、掘削、貫通孔の作成を行う。
- (9) 使用後はバッテリーを取り外し、ドリル本体は適切にできるだけ早く洗浄を行う。

2. キャップ（GA675）の取り外し

キャップのカバーリリースボタンを両側同時につまんで本体から外す。

3. バッテリー交換

チェンジャー（GA679）を本体スロットに装着し、本体を上下に揺らしてバッテリーを本体から抜き出す。又は間接介助者が掌をバッテリースロット下に構えて（非接触）、直接介助者が本体を振る。



その後、バッテリーセットアップの手順を最初から行う。

4. ブレードの着脱

(1) サジタルソー（GA673、GA331、GA336、GA337）

- 1) ブレード接続部に専用ブレードの固定部を挿入する。
- 2) 外す場合は、接続部下のボタンを押しながらブレードを引き抜く。

(2) レシプロケーティングソー（GA674、GA334）

- 1) ブレード固定用回転スリーブに印刷してある▲印の頂点が挿入方向に向いているのを確認し、そのままブレードを挿入し、固定を確認する。
- 2) ブレードを外す場合は回転スリーブを 180 度軸回転させ、▲印の頂点が外す方向に向け、ブレードを引き抜いて外す。
- 3) ブレードを外すと回転スリーブは自動的にブレード挿入のポジションに戻る。

5. アタッチメントの着脱

(1) ドリル・リーマー（GA671、GA672、GA344、GA330）

ドリルアタッチメント、リーマーアタッチメント、ワイヤードライバーは、本体接続部に押し付けることで接続が完了する。



外す場合は、本体のローテーティングスリーブを矢印方向に動かして、アタッチメントを引き抜く。



(2) レシプロケーティングソー (GA674、GA334)

- 1) 胸骨下の軟組織を保護するソーガイド (GB436R) を装着する。
- 2) ソーガイドの回転スリーブの位置が開放状態であることを確認すること。



- 3) ソーガイド先端が掌に当たる位置で、回転スリーブを持つ。



- 4) 向きをブレードに合わせてソー本体にソーガイドを被せる。回転スリーブを遠位に引くと、ソーガイドのピンがソー本体の溝に収まる。
- 5) 最後に回転スリーブを閉鎖方向に回してロックを完了する。



6. 安全装置 (共通)

本体正回転トリガー側面に安全装置がある。製品を使用しないときは表示を OFF にすること。



7. 正逆回転

ドリル・リーマー (GA671、GA672、GA344、GA330) には本体逆回転用のトリガーが付いている。



2 個のトリガーの内、上位に位置するトリガーにて逆回転の切り替えを行う。ドリル・リーマーには髓内リーマー保護の逆回転防止機能はない。

回転方向を変える時は、正回転 (下位にある) トリガーを握りながら逆回転トリガーを同時に握って、回転方向を切り替える。逆の順序では作動しない。

8. 稼動スピードの調節

全てのアキュランは最高回転数又はストロークまでをトリガーを引く加減で調節を行う。

9. バッテリーの充電

- 1) チャージャー本体裏面に電源コードを接続する。
- 2) 電源コードを電源に接続すると電源ランプが点灯し、通電状態であることを示す。
- 3) チャージングスロットにバッテリーを装填する。適切な方向でバッテリーを挿入する。
- 4) バッテリーを装填するとチャージングランプが点灯する。点灯はチャージレベルに準じた表示がされる。
- 5) 充電が終了するとチャージングランプのレベルが全て点灯する。

* <使用方法等に関連する使用上の注意>

1. 使用前

- 使用前に必ず本器の状態と機能を確認すること。
- バッテリーは本体のサイズに適したものを選択すること。
- * ● 使用前に必ずバッテリーに損傷 (バッテリーケースのひび等) がないか点検し、損傷があった場合はそのバッテリーは使用しないこと。
- 本体バッテリースロット内が完全に乾燥していることを確認した後、バッテリーを取り付けること。濡れているとショートを起こし火傷や火災の原因になる。
- 本器の先端にツールを装着する場合は安全装置を作動させること。
- 本体バッテリースロットの枠にへこみやゆがみがないことを確認すること。
- レシプロケーティングソーのブレードロック部に汚れが残っている場合、ブレードがロックできなくなる。専用のツールでブレードスロットの汚れを掻きだすこと。
- 高負荷をかけて使用を継続すると、術中バッテリー交換が必要になる。

2. 使用中

- 先端のツールを交換する際は、トリガーの安全装置を OFF の状態にセットすること。
- 刃先の鈍くなったツールを使用した直後や、長時間切削を行った後などにツールに触れないこと。火傷の危険性がある。
- ドリル・リーマーは髓内リーマー保護の逆回転防止機能はない為、髓内リーマー使用時に逆回転を作動させた場合は、髓腔内でリーマーが破損する場合がある。
- 本体を硬い物にぶつけないこと。[内部器械の破損や清潔操作の維持が困難になる。]
- キャップ内にシリコンプレートのないものは使用しないこと。[清潔が維持できない。]

4. 使用後

- * ● バッテリーをハンドピース内に残さないこと。[過放電でバッテリーセルが破損する。]
- * ● 電源の入っていないチャージャーにバッテリーを挿しっぱなしにしないこと。[過放電でバッテリーセルが破損する。]
- バッテリーを滅菌にかけないこと。[バッテリーセルが破損する。]
- * ● リチウムイオンバッテリーを滅菌、落下等により破損若しくは破損が疑われる場合は、輸送厳禁とし破棄等の処理を行うこと。[バッテリーが発火するおそれがある。]
- * ● バッテリーを廃棄又はリサイクルする場合は、各地域の規制に従って処理を行うこと。
- * ● バッテリーを輸送する場合は、各輸送会社の規定を確認の上、梱包・輸送すること。

【使用上の注意】

1. 相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）
併用禁忌（併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
他社製品	組み合わせが適切に行えず意図した効果が得られない。	本品の誤動作、劣化、破損等を引き起こす。

2. 不具合・有害事象

以下の不具合・有害事象が発現する可能性がある。

<重大な不具合>

- 不適切な取り扱い、洗浄、管理により破損、変形、腐食、分解、変色、屈曲が生じる可能性がある。
- 金属疲労による機械器具の破損、分解
- 不適切なメンテナンスによる動作不良。


**【保管方法及び有効期間等】

1. 保管の条件等

- 水のかからないところで、高温、多湿、日光の当たる場所を避けて、保管すること。
- 常に 20℃前後の室温で保管すること。
- 65℃以上の環境下にバッテリーを置かないこと。[容量の損失、バッテリーの破損の原因となる。]
- * ● 推奨保管方法は、電源の入ったチャージャーに挿したまま管理すること。
- * ● ニッケル水素バッテリーを上記の推奨方法で保管せず、長期棚保管する場合は、保管開始前に必ず充電すること。更に、月に 1 度の充電を行うこと。

2. 耐用期間

- * ● バッテリーの使用期間は使用状況により大きく変化する。
- * ● GA676, GA666 ニッケル水素バッテリーの交換時期は、バッテリー本体底面の使用期限を参照のこと。

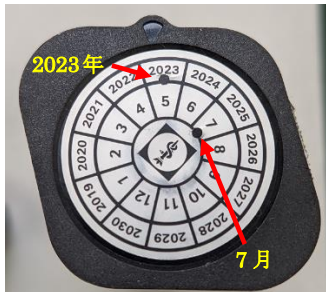

- * ● GA346 リチウムイオンバッテリーの交換時期は、GA320 チャージャーのセル交換サインに従うこと。

** <一般保証に関して>

本製品は、正常な使用状態で発生する故障について、購入（本製品納入日）より 1 年間無償で修理を行う。

ただし、保証期間内でも以下の場合には有償修理になる。

- 火災、天災、異常電圧等による故障、損傷
- 不当な修理、調整、改造された場合
- 取扱いが不適当なために生ずる故障、損傷
 - 落下による損傷を含む
 - マニュアル洗浄する場合、洗浄設備に不備がありメーカー指定の洗浄方法を実施しない場合も含む

- 本製品を接続している他の機器、または不適当な「消耗品」のご使用に起因して製品に生じた故障・損傷の場合。
- 「有寿命部品」や「消耗品」（バー、ブレード、バッテリーセル等）の自然消耗、磨耗、劣化等により部品の交換が必要となった場合。

*【保守・点検に係る事項】

- * ● GA676, GA666 の交換時期は、GA677 チャージャーに装備されている容量テスターがチェックし、セル交換の警告がされる。
- * ● GA346 リチウムイオンバッテリーは、使用後毎回破損や打痕の確認を行い、誤って滅菌した場合、または、落下させた場合、修理のための輸送は厳禁。使用者がその場で廃棄すること。

1. 洗浄

洗浄時の一般的注意

- 使用後 6 時間以内に洗浄を開始しないと、洗浄効果が低下し内部腐食や故障が発生することがある。
- 流水温度は 45℃を超えないようにすること。
- タンパク質の固着を惹起するような消毒剤（アルデヒド系/アルコール）は使用しないこと。
- 可燃性もしくは揮発性の洗浄及び消毒剤を使用しないこと。
- 超音波洗浄をしないこと。
- 徒手洗浄時にハンドピース内に液体が入らないように、必ずキャップ（GA675）をすること。

洗浄前準備（手術室）

- 速やかに分解すること。
- 濡れた不織布で汚れを速やかに拭き取ること。
- 蛋白凝固防止スプレーを吹きかけて汚れが固着しないようにすること。

洗浄・消毒（注意事項）

- 洗浄剤、消毒液はステンレススチール、プラスチック、シリコン等に影響の無いものを使用すること。
- アセトンを含んだ洗浄剤は使用できない。

マニュアル洗浄

段階	手順	温度 [℃]	時間 [分]	水質
I	予洗	室温（冷）	2<	水道水
II	洗浄	室温（冷）	2<	水道水
III	濯ぎ	室温（冷）	5<	水道水
IV	乾燥	室温	—	—

段階 I

- 水道水を使用しプラスチックブラシで全体の汚れを洗い流すこと。
- 流水洗浄中に可動部分は全て動かす。
- キャニュレーションのある個体は、付属の専用ブラシで内部を 1 分以上洗浄すること。

段階 II

- ** ● 0.8%濃度の中性酵素系洗浄剤をスプレーし 2 分ほどおいて拭拭する。

段階 III

- 流水で 5 分の濯ぎを行う。

- キャニュレーションにはウォーターガンを使用して20秒の濯ぎを行う。

段階Ⅵ

- キャップを外し、不織布やエアガンで製品をよく乾かす。
- 細部に汚れが残っていないかどうかチェックし、必要であれば上記の行程を繰り返すこと。

ウォッシャーディスインフェクター(WD)による洗浄・消毒

前処理

段階	手順	温度 [℃]	時間 [分]	水質
I	予洗	室温 (冷)	—	水道水
II	濯ぎ	室温 (冷)	5	水道水

- 水道水を使用しプラスチックブラシで全体の汚れを洗い流す。
- 流水洗浄中に可動部分は全て動かす。

WD による洗浄・消毒・乾燥

- 製品はすべて専用の ECCOS ホルダーに正しく設置する。

段階	手順	温度 [℃]	時間 [分]	水質
I	予洗	<25	3	水道水
II	洗浄	55	10	RO 水
III	中間濯ぎ	10<	1	RO 水
IV	熱水消毒	90	5	RO 水
V	乾燥	—	—	—

- 強アルカリ洗浄剤使用可能。

仕上げ作業

- ハンドピース全体をチェックして残滓がある場合は、マニュアル洗浄行程を行うこと。

注油

- ハンドピースの乾燥を確認した後に、オイルスプレー (GB600) のノズルに専用アダプター (GB600840) を取り付け、ハンドピースに注油をすること。

2. 滅菌

- バッテリー、チャージャーは滅菌しないこと。[滅菌により破損する。]
- 滅菌時はキャップを本体から必ず外すこと。外していない場合、乾燥が不十分になり内部腐食が発生する。
- 本体及び本体付属品の滅菌は高圧蒸気滅菌 (プレバキューム式) のみ可能 (134℃、5 分)

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：ビー・ブラウンエースクラップ株式会社

* 問い合わせ窓口：TEL 0120-401-741

製造元：エースクラップ社、ドイツ

Aesculap AG