

歯科材料 04 歯科用根管充填材料

管理医療機器 歯科用根管充填ガッタパーチャポイント JMDN コード 31872000

再使用禁止

HyFlex ガッタパーチャポイント

【禁忌・禁止】

- ・天然ゴムに対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- ・再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

本品は、歯科で使用する X 線不透過性の根管充填ポイントである。

本品は、カラーコードの付け方、形状、組合せにより 4 つのシリーズがあり、それぞれのシリーズ毎に各サイズがある。


(1) ROEKO Guttapercha Points Top color

(2) ROEKO Guttapercha Points

* (3) HyFlex CM Guttapercha Points

* (4) HyFlex EDM Guttapercha Points

2. 図面及び寸法

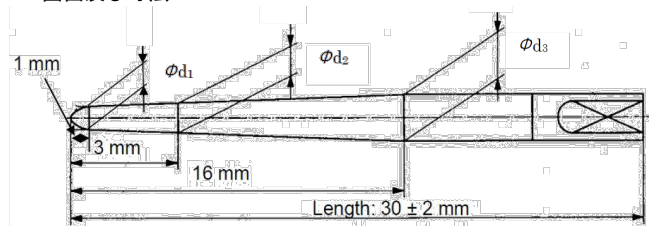

(1), (2)は、標準ポイントとして、テーパ、長さは基本的に同一であるが、カラーコードによる表示が異なる。

(1)は手元側及び包装、(2)は包装に色表示される。

(3), (4)は、大テーパポイント、手元側及び包装に色表示される。

(1) ROEKO Guttapercha Points Top color

単位 : mm

品番	サイズ	カラー コード	φd ₁	φd ₂	φd ₃	テーパ ー
365115	15	白	0.15	0.21	0.47	0.02
365120	20	黄	0.20	0.26	0.52	0.02
365125	25	赤	0.25	0.31	0.57	0.02
365130	30	青	0.30	0.36	0.62	0.02
365135	35	緑	0.35	0.41	0.67	0.02
365140	40	黒	0.40	0.46	0.72	0.02
365145	45	白	0.45	0.51	0.77	0.02
365150	50	黄	0.50	0.56	0.82	0.02
365155	55	赤	0.55	0.61	0.87	0.02
365160	60	青	0.60	0.66	0.92	0.02
365170	70	緑	0.70	0.76	1.02	0.02
365180	80	黒	0.80	0.86	1.12	0.02
365190	90	白	0.90	0.96	1.22	0.02
365191	100	黄	1.00	1.06	1.32	0.02
365192	110	赤	1.10	1.16	1.42	0.02
365193	120	青	1.20	1.26	1.52	0.02
365194	130	緑	1.30	1.36	1.62	0.02
365195	140	黒	1.40	1.46	1.72	0.02
365196	15-40	サイズ15～40の6種類1セット				0.02

365197	45-80	サイズ45~80の6種類1セット	0.02
365198	90-140	サイズ90~140の6種類1セット	0.02

(2) ROEKO Guttapercha Points

単位 : mm


品番	サイズ	カラーコード	φd ₁	φd ₂	φd ₃	テーパ
360015	15	白	0.15	0.21	0.47	0.02
360020	20	黄	0.20	0.26	0.52	0.02
360025	25	赤	0.25	0.31	0.57	0.02
360030	30	青	0.30	0.36	0.62	0.02
360035	35	緑	0.35	0.41	0.67	0.02
360040	40	黒	0.40	0.46	0.72	0.02
360045	45	白	0.45	0.51	0.77	0.02
360050	50	黄	0.50	0.56	0.82	0.02
360055	55	赤	0.55	0.61	0.87	0.02
360060	60	青	0.60	0.66	0.92	0.02
360070	70	緑	0.70	0.76	1.02	0.02
360080	80	黒	0.80	0.86	1.12	0.02
360090	90	白	0.90	0.96	1.22	0.02
360100	100	黄	1.00	1.06	1.32	0.02
360110	110	赤	1.10	1.16	1.42	0.02
360120	120	青	1.20	1.26	1.52	0.02
360130	130	緑	1.30	1.36	1.62	0.02
360140	140	黒	1.40	1.46	1.72	0.02
360154	15-40	サイズ15～40の6種類1セット				0.02
360458	45-80	サイズ45～80の6種類1セット				0.02
360914	90-140	サイズ90～140の6種類1セット				0.02

* (3) HyFlex CM Guttapercha Points

単位 : mm

HyFlex CM 品番	表示 番号	サイズ	カラー コード	φd ₁	φd ₂	φd ₃	テーパ
60022689	020 04	20	黄	0.18	0.30	0.82	0.04
60022690	025 04	25	赤	0.23	0.35	0.87	0.04
60022691	030 04	30	青	0.27	0.39	0.91	0.04
60022692	035 04	35	緑	0.32	0.44	0.96	0.04
60022693	040 04	40	黒	0.37	0.49	1.01	0.04
60022694	045 04	45	白	0.42	0.54	1.06	0.04
60022695	050 04	50	黄	0.50	0.62	1.14	0.04
60022696	060 04	60	青	0.60	0.72	1.24	0.04
60022697	020 06	20	黄	0.18	0.36	1.14	0.06
60022698	025 06	25	赤	0.23	0.41	1.19	0.06
60022699	030 06	30	青	0.27	0.45	1.23	0.06
60022700	035 06	35	緑	0.32	0.50	1.28	0.06
60022701	040 06	40	黒	0.37	0.55	1.33	
60022702	045 06	45	白	0.42	0.60	1.38	0.06
60022703		20-45	サイズ20～45の6種類1セット				0.04
60022704		20-45	サイズ20～45の6種類1セット				0.06

* (4) HyFlex EDM Guttapercha Points

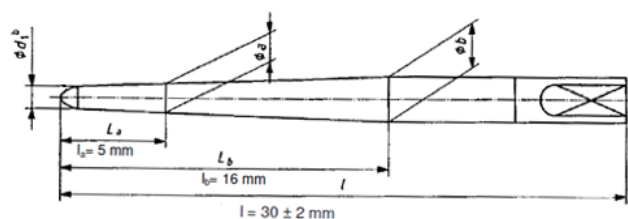

単位：mm

HyFlex EDM 品番	表示 番号	サイ ズ	カラー コード	ϕd_1	ϕa	ϕb	テーパ
**60024256	025 08	25	赤	0.25	0.33	0.49	0.08
60022706	020 05	20	黄	0.20	0.35	1.00	0.05
60022708	040 04	40	黒	0.37	0.49	1.01	0.04
60022709	050 03	50	黄	0.47	0.59	0.98	0.03
60022710	060 02	60	青	0.60	0.66	0.92	0.02
**60024257	020 05	20	黄	品番： 60022706			0.05
	025 08	25	赤	品番： **60024256			0.08
	040 04	40	黒	品番： 60022708			0.04
	050 03	50	黄	品番： 60022709			0.03
	060 02	60	青	品番： 60022710			0.02

3. 原材料：天然ゴム（ガッタパーチャ）、酸化亜鉛、硫酸バリウム
ベンガラ その他

4. 原理

適度な弾性と柔らかさを備えた根管充填用ポイントである。
形成された根管の根尖部と同じサイズの本品を選択し、側方
加圧時の圧接により封鎖が行える。

【使用目的又は効果】

本品は、根管の充填に用いる。

【使用方法等】

- (1) 充填予定の根管を清潔にし、乾燥します。
- (2) 形成された根管の根尖部と同じサイズの本品を選択してください。
- (3) 本品に根管充填用シーラをつけ、本品を形成された根管の先端まで差し込みます。
- (4) さらにアクセサリーポイント等を本品の回りに差し込みスプレッダーを用いて、本品に側方圧を加え、根管空隙が充塞されるように本品を順次追加して挿入する。
- (5) 根管口から出ている余分な本品上部を切除する。

【使用上の注意】

1. 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）
 - (1) 天然ゴムに対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴がないことを確認すること。
 - (2) 本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
2. 重要な基本的注意
 - (1) 本品を根管内に装着する時、根尖孔から突出させないよう、十分注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

<貯蔵・保管方法>

- ・ 高温、多湿、直射日光及び水濡れを避け室温で保管すること。

【製造販売業者及び製造者の氏名又は名称等】

選任製造販売業者 AJMD 株式会社

電話番号:03-5614-0733

外国製造業者

Coltene/Whaledent GmbH + Co.KG

コルテン/ウェルデント
(ドイツ)

販売業者

東京歯科産業株式会社

電話番号：03-3831-0176