

機械器具(51) 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 単回使用歯科用吸引カニューレ JMDN コード : 37434000

モノジェクト サリバ エジェクター


再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造等

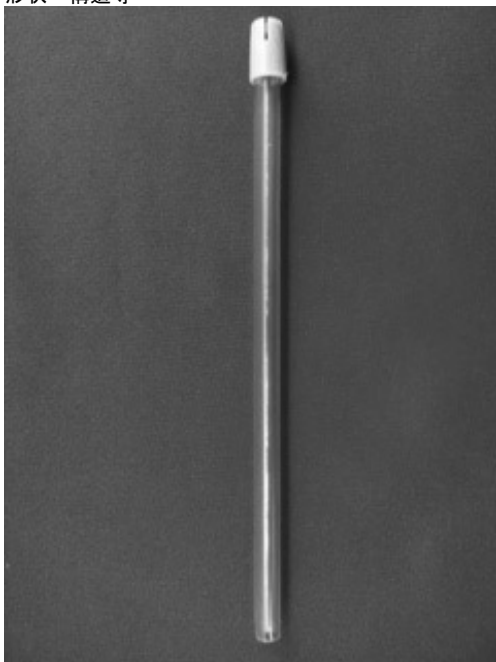

2. 原材料

チューブ：ポリ塩化ビニル

3. 仕様等

チューブとチップの接着部が 8.8N(2[lbs.])の引張り強度に耐えること。

【使用目的又は効果】

非能動型の吸引装置(通常、歯科専用装置)に連結して用いる管状の歯科用器具で、口腔内に貯留する水分や切削片を除去するために用いる。本品は単回使用である。

【使用方法等】

接続する器具類、チューブ類との径を合わせて、しっかり接続して吸引を行う。必要に応じて本品を適宜曲げて使用する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 本品は、単回使用製品であり、1 回限りの使用で使い捨て、再使用しないこと。
- (2) 包装の水濡れしたものは使用しないこと。
- (3) 包装を開封したら、速やかに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

高温、多湿、直射日光及び水濡れを避けて室温で保管すること。

2. 有効期間

外装表示参照

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：

※日本コヴィンディエン株式会社

カスタマーサポートセンター：0120-917-205

注意喚起文書

製品使用に際してのその他の注意事項：未滅菌製品

1. 医療従事者のみが使用すること
2. 熟練した者が使用すること
3. 十分に研修を積んだ医療従事者以外は使用しないこと
4. 対象患者の病態に精通した医師の指示のもと使用すること
5. 正しい使用方法について精通していること
6. 添付文書及び取扱説明書を熟読して使用すること
7. 併用する医療機器や医薬品の添付文書を熟読すること
8. 本来の使用目的以外に使用しないこと
9. 患者の最大利益に反すると判断される場合には本品を使用しないこと
10. 汚染、損傷、その他異常が認められるときは使用しないこと
11. 正しい組み合わせ以外では使用しないこと
12. 感染予防のために適切な防護措置を行うこと
13. 使用中に異常が認められた際は原因を確認すること
14. 分解、改造、加工はしないこと
15. 使用期限内に使用すること
16. 添付文書は手術等の手技書ではないこと
17. 使用済みの医療機器は、医療廃棄物として適切に廃棄すること
18. 包装に破損が見られたら使用しないこと