

機械器具(21) 内臓機能検査用器具
一般医療機器 単回使用心電用電極 JMDNコード:35035000

ケンドール電極 バイオタック

再使用禁止

【警告】

- 電気メス等を使用する外科手術での使用には注意すること〔対極板に問題があると電極部で火傷を起こすことがあるため〕。

【禁忌・禁止】


- 再使用禁止。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：
日本コヴィディエン株式会社
カスタマーサポートセンター：0120-917-205

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造等

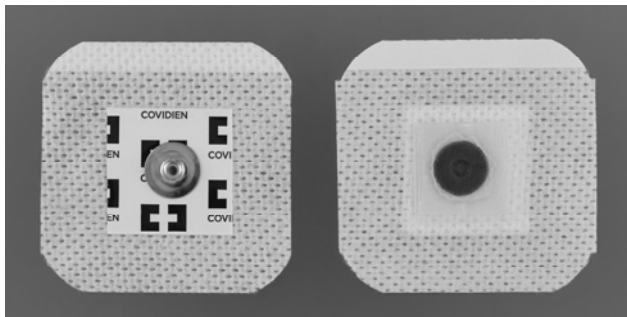

[未滅菌]

2. 仕様等

接触抵抗 $\leq 2000\Omega$ (AAMIによる)

【使用目的又は効果】

体表に設置し、体表の電気信号を処理装置(心臓の電気活動をグラフで表示する)に伝達する導体をいう。この電気活動を記録する一般的な装置は、心電計(ECG)である。本品は単回使用である。

【使用方法等】

- 電極を準備する。
- ライナーを電極から剥がす。
- 電極全体を指でしっかりと押し、適用部位に貼り付ける。
- リード線を電極に接続する。
- 心機能モニタリングを行なう。
- 取外す際は、リード線を引っ張らず、粘着シール部を体表面からはがす。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 包装の水濡れしたものは使用しないこと。
- (2) 包装を開封したら、速やかに使用すること。
- (3) 開封後はしっかりと袋を閉じて高温を避けて保管すること〔開封後、長時間放置するとジェルが乾いたり、変色することがあるため。又、粘着面が乾き、ライナーから電極をはがしにくくなるため〕。
- (4) 火傷部位への使用は避けること。
- (5) ECG モニタリングを用いる電気外科的処置を行う際には、病院が定める手順に従うこと〔これを守らない場合、電極適用部位で高周波による火傷が発生するおそれがあるため〕。

2. その他の注意

- (1) 長時間貼付すると、かぶれる可能性があるので注意すること。
- (2) 乳首、皮膚のひだ、骨の隆起した部分、切り傷、損傷部位、瘢痕、炎症のある部位には適用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

高温、多湿、直射日光及び水濡れを避けて室温で保管すること。

2. 有効期間

外装表示参照