

機械器具74 医薬品注入器

一般医療機器 経腸栄養注入セット JMDNコード 70400000

カンガルー 経腸栄養コンテナー

再使用禁止


【警告】

- 1.本品を使用する前に、この添付文書のすべてを熟読すること。
- 2.本品は、医師及び医師の指示を受けた医療従事者のみが使用すること。
- 3.本品と経腸栄養投与セットの接続部の漏れや外れに注意し、適宜増し締め、締め直し等の適切な処置を行うこと。[接続部は使用中に緩むことがあるため。]

【禁忌・禁止】

- 1.再使用禁止
- 2.再滅菌禁止
- 3.本品は経腸栄養ライン用である。血液ラインとの接続はしないこと。
- 4.本品をアルコール等の有機溶剤と接触させないこと。[アルコール含有消毒剤及び脱脂目的によるアセトン等の有機溶剤に接触すると強度が低下し、亀裂が生じるおそれがあるため。]
- 5.本品に使用されている素材に対しアレルギー体質又はかぶれやすい患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

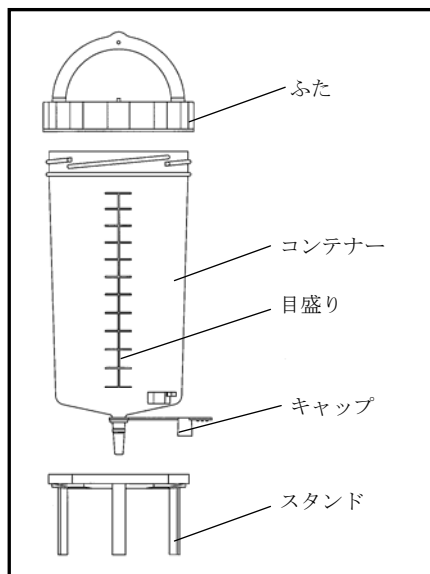

本品は、経腸栄養剤充填用のコンテナーである。

本品は、ポリ塩化ビニル（可塑剤：トリメリット酸トリ（2-エチルヘキシル））を使用している。

<種類>

コンテナー容量：mL
600
1200

<原材料>

ふた、コンテナー、スタンド：ポリプロピレン
キャップ：ポリ塩化ビニル(TOTM)

【使用目的、効能又は効果】

本品は、経腸栄養剤を投与する際、経腸栄養投与セットに接続して使用する経腸栄養剤を充填することを目的とした容器である。

【品目仕様等】

接続部はJIS T 3213:2005「栄養用チューブ及びカテーテル」の4.1.2 コネクタを満たす。

【操作方法又は使用方法等】

- 1.包装より本品を取り出す。
- 2.コンテナーにスタンドを取り付けて清潔な台の上に立てる。
- 3.コンテナーに経腸栄養投与セットをしっかりと接続し、クレンメを完全に閉める。
- 4.あらかじめ調剤した栄養剤等を、汚染に注意してコンテナーを保持しながらコンテナーに充填し、ふたを締める。
<注意> ふたはきつく締めすぎないこと。[ふたの締めすぎにより、ふたとコンテナーの隙間(通気用の隙間)が完全にシールされ、滴下しない又は滴下が不安定になることがあるため。]*
- 5.経腸栄養投与セットの使用方法に従って使用する。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 本品は滅菌済み単回使用製品であり、1回限りの使用で使い捨て、再使用しないこと。
- 包装の破損したもの、開封済みのもの又は水濡れしたものは使用しないこと。
- 包装を開封したら、速やかに使用すること。
- 使用前に製品に破損等の異常がないかよく確認すること。異常があるときは使用しないこと。
- 使用中は本品の破損、接続部の緩み、空気混入、栄養剤等の漏れ、及び詰まり等について定期的に確認すること。
- 全ての接続部は使用中に緩むことがある。漏れや外れに注意し、締め直し等の適切な処置を行うこと。
- 接続部は直接手を触れないこと。
- 接続部を汚染させないこと。
- 接続部に栄養剤等を付着させないこと。[接続部に緩み等が生じる可能性がある。]
- 本品と接続する経腸栄養投与セットの取扱いについては、それぞれの添付文書に従うこと。
- 本品に使用する栄養剤等の取り扱いについては、それぞれの添付文書に従うこと。詰まりが生じる可能性のある栄養剤等を投与しないこと。
- 栄養剤等が充填された状態で、本品を倒立及び転倒させないこと。[ふたは完全にはシールされていないため、栄養剤等が漏れることがある。]*
- 充填前の栄養剤等の汚染防止に努めること。
- 充填中の内容物腐敗に注意すること。
- 容器の目盛りは、目安として使用すること。
- 本品に栄養剤等を入れた状態での長時間の保存及び投与の中断はしないこと。
- 使用後は汚染防止に留意し、安全な方法で処分すること。

- 使用中に本品の落下、もしくは、過度な衝撃により破損するおそれがあるので注意すること。
- 本品をスタンド等に固定する場合には、本品が外れないようにしっかりと固定すること。また、スタンド等に固定した場合には、スタンド等が倒れないように注意すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

室温下で、水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間・使用の期限

包装に使用期限を記載している。使用期限を過ぎたものは、使用しないこと。

【包 装】

5個入り／箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及

び住所等】

製造販売元

日本シャーウッド株式会社

〒437-0004 静岡県袋井市友永1217の1

お問い合わせ先：03-5717-1613

製造元

日本シャーウッド株式会社