

機械器具51 医療用嘴管及び体液誘導管

一般医療機器 カテーテルコネクタ JMDNコード 32339000


チュービング コネクター

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ＜使用方法＞
- 1.再使用禁止
 - 2.再滅菌禁止
 - 3.本品をアルコール等の有機溶剤と接触させないこと。[アルコール含有消毒剤及び脱脂目的によるアセトン等の有機溶剤に接触すると強度が低下し、亀裂が生じるおそれがあるため。]
 - 4.本品に使用されている素材に対し、アレルギー体質又はかぶれやすい患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】(参考形状)

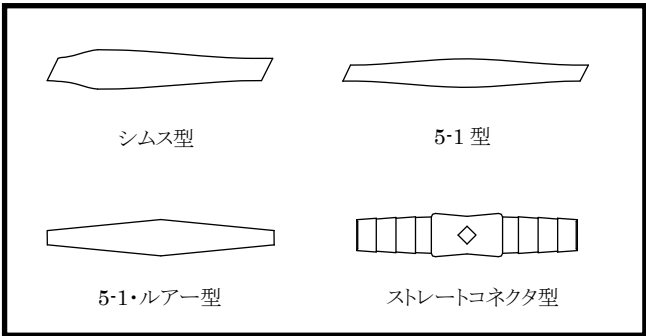

※＜種類＞

形状	滅菌の有無	原材料
シムス型	滅菌済み	ポリ塩化ビニル(可塑剤:フタル酸ジ(2-エチルヘキシル))
	未滅菌	
5-1型	滅菌済み	
	未滅菌	
5-1・ルアー型	滅菌済み	ポリプロピレン
ストレートコネクタ型	滅菌済み	ポリカーボネート

同梱されている製品は、包装に記載している。

種類	適合チューブ内径(mm)	
シムス型	3.5～9.4	
5-1型	6.0～10.0	
5-1・ルアー型	5.0～7.3	
ストレートコネクタ型	6×6	7.4～8.4
	8×8	8.7～9.5
	10×10	10.5～11.3

【使用目的又は効果】

本品は、排液用のカテーテルやチューブ等を容器等の別の対象物に接続するために用いる。

【使用方法等】

各種の器具類やチューブ類との径を合わせて、しっかり接続する。

【使用上の注意】

- 1.重要な基本的注意
- 接続部の漏れや外れに注意し、適宜増し締め、締め直し等の適切な処置を行うこと。[接続部は使用中に緩むことがあるため。]
 - 全操作中に、穿刺具、メス、ハサミ、縫合針等をチューブに接触させないこと。[傷付けて液漏れが生じるおそれがあるため。]

- 2.不具合・有害事象
- 本品を使用中に、以下の不具合・有害事象があらわれることがあるので、異常が認められたら直ちに適切な処置をすること。

- 1)その他の不具合
- 機器の破損/変形、閉塞、接続外れ
- 2)重大な有害事象
- 組織の損傷、感染等

【保管方法及び有効期間等】

- 1.保管の条件
- 室温下で、水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。
- 2.有効期間
- 包装上に記載(自己認証(当社データ)による)。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元:
日本コヴィディエン株式会社
カスタマーサポートセンター:0120-917-205