

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 精液注入用子宮カテーテル 34077000

** スカイアイ


再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 再滅菌禁止
3. 患者及び製品に過剰な力を加えない。予め使用可能か確認すること。

* 【形状・構造及び原理等】

1. 形状

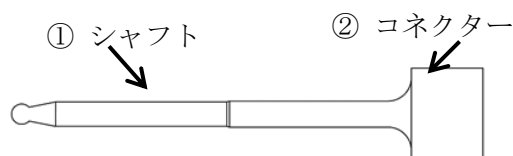

2. 原材料

ポリエチレン

【使用目的又は効果】

本品は、子宮内に挿入し、精子を子宮内に送入するために用いる器具である。本品は滅菌済みであり単回使用である。

【使用方法等】

1. 使用前点検

- 1) 本品は滅菌済みであり、再使用できません。包装開封後は直ちに使用してください。
- 2) 滅菌パックの点検、本品の外観の点検をしてください。異常が認められたときには使用しないでください。
- 3) 患者を砕石位の体位にて膣鏡を用いて内診を行ってください。
- 4) 患者の外陰部及び膣内を滅菌生理食塩水等で洗浄清拭してください。
- 5) コネクターに 6% テーパの筒先を持つ注射筒を接続してください。注射筒が付属されている場合、付属の注射筒を接続してください。
- 6) 無菌操作下で洗浄濃縮精子を先端部より吸引してください。

2. 使用時

- 1) 本品のシャフトより子宮頸管に挿入してください。
- 2) 本品のシャフトを子宮内部に挿入後、ゆっくりと注射筒のプランジャーを押して、子宮腔内に洗浄濃縮精子を注入してください。
- 3) 注入後、本品を子宮からゆっくりと引き抜いてください。

3. 使用后

- 1) 医療廃棄物として適切に処理してください。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 使用前に必ず添付文書をお読みください。
- 2) 手技に精通した術者が本品を使用してください。
- 3) 使用に適さない患者には使用しないでください。
- 4) 使用期限を過ぎたものは使用しないでください。
- 5) 使用直前に開封してください。
- 6) 感染等を防止のため、必ず手袋を着用ください。
- 7) 滅菌袋が破損しているものや、製品に異常が認められたものに関しては使用しないでください。
- 8) 操作においては、無菌的に行い、細菌等に対する予防措置は十分に行ってください。
- 9) 患者及び本品に過剰な力を加えないでください。予め使用可能かを確認ください。
- 10) 本品に改造はしないでください。
- 11) 使用中は患者状態を常に確認し、異常が見られた場合、使用を中止してください。

2. 使用上の重要な注意

- 1) 本品の開封前は滅菌済みです。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- 1) 水濡れに注意し、高温・多湿な場所及び直射日光を避けて、清潔な状態で保管してください。

2. 有効期間・使用の期限

- 1) 製品ラベルに使用期限を記載されています。ご確認ください。

【包装】

個包装

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社北里コーポレーション
〒416-0932 静岡県富士市柳島 100 番地 10
TEL: 0545-65-7122 FAX: 0545-65-7128

製造業者 株式会社北里コーポレーション

** 【お問い合わせ先】

株式会社北里コーポレーション
TEL: 0120-457-454 (フリーダイヤル)
FAX: 0120-111-471
salesupport@kitazato.co.jp