

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管  
一般医療機器 精液注入用子宮カテーテル 34077000

## ホワイトアイ

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】


1. 再使用禁止
2. 再滅菌禁止
3. 製品に過剰な力を加えない。予め使用可能か確認すること。

#### 【形状・構造及び原理等】

##### \*\*1. 形状

\*

- ① カテーテル ② コネクター

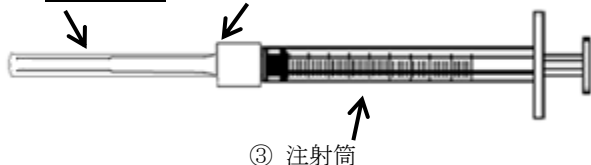

③ 注射筒

##### \*\*2. 原材料

ポリエチレン、シリコーン

#### 【使用目的又は効果】

本品は、子宮内に挿入し、精子を子宮内に送入するために用いる器具である。本品は滅菌済みであり単回使用である。

#### 【使用方法等】

##### 1. 使用前点検

- 1) 本品は滅菌済みであり、再使用できません。包装開封後は直ちに使用してください。
- 2) 滅菌パックの点検、本品の外観の点検をしてください。異常が認められたときには使用しないでください。

##### 2. 準備

- 1) 患者を碎石位の体位にて陰鏡を用いて内診を行ってください。
- 2) 患者の外陰部及び膣内を滅菌生理食塩水等で洗浄清拭してください。

##### \*\*3. 使用方法

- 1) 注射筒にゆっくりと精液を吸い上げます。  
(注意) 精液を吸いにくい場合は、10～30 分ほど放置してから吸ってください。
- 2) 仰向けになって本品のカテーテルを膣内に挿入し、ゆっくりと注射筒を押して、膣内に精液を注入してください。  
(注意) 膣内を傷つけないため、カテーテル先端のみ入れてください。
- 3) 精液を注入後、本品を膣内からゆっくりと引き抜いてください。  
(注意) 注入後 10 分ほど仰向けになって安静にしてください。

##### \*\* 4. 使用後

自治体の規則に従って処理してください。

#### 【使用上の注意】

##### \*\* 1. 重要な基本的注意

- 1) 使用前に必ず添付文書をお読みください。
- 2) 使用方法を理解した後本品を使用ください。
- 3) 使用に適さない方には使用しないでください。
- 4) 使用期限を過ぎたものは使用しないでください。
- 5) 使用直前に開封してください。
- 6) 感染等を防止のため、清潔な状態で使用してください。
- 7) 滅菌袋が破損しているものや、製品に異常が認められたものに関しては使用しないでください。
- 8) 操作においては、無菌的に行い、細菌等に対する予防措置は十分に行ってください。
- 9) 患者及び本品に過剰な力を加えないでください。予め使用可能かを確認ください。
- 10) 本品に改造はしないでください。
- 11) 使用中は患者状態を常に確認し、異常が見られた場合、使用を中止してください。

##### 2. 使用上の重要な注意

- 1) 本品の開封前は滅菌済みです。

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### 1. 保管方法

- 1) 水濡れに注意し、高温・多湿な場所及び直射日光を避けて、清潔な状態で保管してください。

##### 2. 有効期間・使用の期限

- 1) 製品ラベルに使用期限を記載されています。ご確認ください。

#### 【包装】

個包装

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社北里コーポレーション  
〒416-0932 静岡県富士市柳島 100 番地 10  
TEL:0545-65-7122 FAX:0545-65-7128

製造業者 株式会社北里コーポレーション

##### \*\* 【お問い合わせ先】

株式会社北里コーポレーション  
[salesupport@kitazato.co.jp](mailto:salesupport@kitazato.co.jp)