

ネオデント GM マルチピースアバットメント

【禁忌・禁止】

<適用患者>

次の患者には使用しないこと。

- ・本品の成分及び類似成分に対して過敏症の既往歴のある患者
- ・インプラント埋入部位の骨質・骨量がインプラントを支持するのに不十分な患者。[オッセオインテグレーションが得られず、脱落等の恐れがある。]
- ・出血性素因を有する患者。[異常出血を起こす恐れがあり、手術部位の治癒が不良になる恐れがある。]
- ・コントロールされていない糖尿病患者。[手術部位の治癒不良及び易感染性が高まる恐れがある。]
- ・一般的な口腔外科手術が禁忌とされる患者。[侵襲により疾患の悪化、既往症の再発もしくは術後の手術部位の治癒が不良になる恐れがある]
- ・骨の成長過程が完了していない患者。[顎骨形成不良の要因となる恐れがある。]
- ・悪性腫瘍等により放射線照射や化学療法を受けている患者。[手術部位の治癒が得られない恐れがある。]

<使用方法>

・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

本品は無歯顎又は部分無歯顎を有する患者の上顎骨及び下顎骨に埋植された歯科用インプラントフィクスチャに固定して、上部構造体の支台となる歯科用インプラントアバットメントである。

2. 形状

1) アバットメント

(1) GMアバットメント



(2) GMミニコンカルアバットメント（ストレート）



(3) GMミニコンカルアバットメント（アングル）



(4) GMマイクロアバットメント



2) 付属品

(1) ペーサルスクリュー

GMミニコンカルアバットメント（アングル）用



(2) ホルダー


GMミニコンカルアバットメント（ストレート）用



GMマイクロアバットメント用



(3) トランスファーアンドアライメントピン

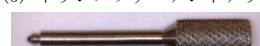

3. 作動原理

アバットメントはインプラントフィクスチャに装着し、上顎又は下顎において上部構造体（クラウン、ブリッジ又はパー固定式デンチャー）の支台となる。

4. 原材料

チタン合金、ポリプロピレン

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントフィクスチャに固定して上部構造体の支台となる歯科用インプラントアバットメントである。

【使用方法等】

1. 併用医療機器

本品はストローマン社が指定するネオデントインプラントコンポーネント並びに併用手術器具とのみ併用すること。インプラント接続部の略称(GM)と一致する構成品と組み合わせて使用する。

2. 使用前

1) 使用方法

本品は未滅菌品であるので、口腔内に入れる前に高圧蒸気滅菌を行うこと。

<推奨する滅菌条件>

高圧蒸気滅菌

方式	プレバキューム	滅菌温度	滅菌時間
重力置換型	－	132℃	3 分間
プレバキューム型	3 回	132℃	3 分間

滅菌後の製品は、保管せずすぐに使用すること。

3. 使用方法

本品を用いた歯科用インプラントの一般的な使用方法を以下に示す。

1) 暫間補綴物の装着

・インプラントの埋植後、適切な暫間補綴物を、ドライバーを用いて規定のトルクでインプラントに装着する。これらはインプラントを保護するだけでなく、歯肉形状を形成する役割を果たす。

2) 印象採得

・インプラントの安定後、印象コーピングを用いてインプラントの位置を正確に再現した印象を採得する。

3) 最終補綴物の装着

・インプラントの安定後、適切な補綴物を、ドライバーとトルクレンチを用いて以下の規定トルクでインプラントに装着する。

機器の種類	締め付け規定トルク
GM ミニコンカルアバットメント（ストレート）	32 Ncm
GM ミクロアバットメント	32 Ncm
GM アバットメント	20 Ncm
GM ミニコンカルアバットメント（アングル）	20 Ncm

・補綴物の歯肉マージンからの高さは最低 4mm を確保することを推奨する。

・バーニアアウトコーピング又はキャストブルコーピングを使用して最終補綴物又はコーピングを作製する。本品への補綴物の装着には既定のスクリュー（Neo アバットメントコーピングスクリュー[※]、Neo ミニコンカルアバットメントコーピングスクリュー[※]、ネオデント GM ミニコンカル/ミクロアバットメント オクルーザルスクリュー[※]）を用いること。
・キャストブルコーピングを使用して鋳接コーピングを作製する際は、以下の条件に基づき技工操作を行うこと。なお、コーピング自体に角度は付与しないこと。

キャストブルコーピング	最小径	Wax 厚さ		コーピング最大高さ
		金属部	モデリングエイド部	
Neo アバットメント コバルト・クロムコーピング [※]	φ3.30 mm	0.5 mm 以上	制限なし	10.00 mm
Neo ミニコンカルアバットメント コバルト・クロムコーピング [※]	φ3.00 mm		0.15 mm 以上	12.00 mm
Neo ミクロアバットメント コバルト・クロムコーピング [※]	φ3.00 mm		制限なし	10.00 mm

鋳接に使用する合金の規格：

JIS T6121 タイプ5を満たすコバルトクロム合金

※販売名：ネオデント GM インプラント上部構造材

認証番号：231AKBZX00025000

4) 通常荷重

・治癒状況、選択している指針等を考慮のうえ、上顎 4 ヶ月、下顎 3 ヶ月を目安として全咬合荷重を加えることができる。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- (1) 設計においては、インプラント及びアバットメントへの負荷及び周辺組織への影響を十分に考慮し、本品の種類及びサイズを選択すること。
- (2) 本品の装着には適切なインスツルメントを用いること。
- (3) 折損、変形などの原因になるため必要以上の力を加えないこと。
- (4) コーピングの作製においては、適切に作製されていることを確認すること。
- (5) 本品を装着する際は、フィクスチャの内面を十分洗浄すること。
- (6) 術中は患者の全身のおよび口腔内の状態を監視し、異常が認められた場合は治療の中止等を含め、患者の安全を確保すること。
- (7) 術後の定期的な診査を行い、必要に応じて適切な処置を講ずること。

【使用上の注意】

【使用注意（次の患者には慎重に適用すること）】

- (1) 咬合障害、パラファンクション(ブラキシズム等)を有する患者。[インプラント体や補綴物の破損により外傷が生じ、再手術が必要になる恐れがある。]
- (2) 周術期の喫煙者。[創傷の治癒が得られない恐れがある]
- (3) 放射線治療の既往歴がある患者。[手術部位の治癒が得られない恐れがある]
- (4) 長期間に及ぶステロイド療法実施患者あるいは抗凝固薬、抗血小板薬を使用している患者。[手術部位、周囲組織、又は患者の治癒機能に影響する場合がある。]

- (5)免疫抑制薬を使用している患者。〔手術部位の治癒及び予後に影響する
場合がある。〕 (6)治療に非協力的な患者、口腔衛生管理・術後管理が
できない患者〔術後のケアが困難になる恐れがある。〕

〔重要な基本的注意〕

- (1)インプラント治療を行う際には、「口腔インプラント治療指針」（公
益社団法人日本口腔インプラント学会編）等の最新情報を参考に行う
こと。

〔相互作用〕（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）

＜併用注意＞

- (1)電気メス・高周波メス等は手術時にインプラント体に接触しないよう
に注意すること〔意図しない発熱やスパークが発生する恐れがある〕

〔不具合・有害事象〕

- (1)不具合

- ・誤飲
- ・インプラント、アバットメント、他のコンポーネントやツールの損傷
- ・アバットメントや他のコンポーネントの締結部の緩み
- ・不適切な最終補綴物、クラウン、ブリッジ、オーバーデンチャー又は
その他の補綴物の不具合
- ・インプラントの破損
- ・インプラントの喪失(脱落)及び/又は撤去

- (2)有害事象

- ・掌跖膿疱症、扁平苔癬、皮膚炎などの歯科金属疹(遅発性金属アレルギー疾患)
- ・患者の咀嚼機能不全

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・本品は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
- ・常温・常湿で直射日光を避け、清潔な場所で保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: ストロマン・ジャパン株式会社

連絡先: 0120-689-930

外国製造業者: ネオデント社 (JJGC Indústria e Comércio de
Materiais Dentários SA - NEODENT)

外国製造業者国名: ブラジル