


機械器具 22 検眼用器具
一般医療機器 検眼レンズ（34653000）
トライアルレンズ（B）

【形状・構造及び原理等】

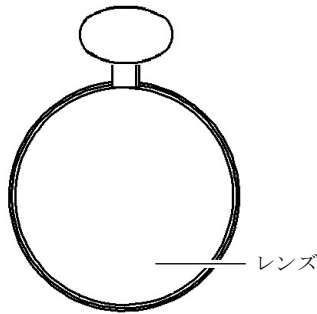

1. 構成

各構成品は単体または任意の組み合わせで出荷されます。単体の場合、その包装紙外側に種類、度数等を記載してあります。

基本構成

本器具は、次の各種レンズで構成されています。

- (1) マイナス球面レンズセット
- (2) プラス球面レンズセット
- (3) マイナス乱視レンズセット
- (4) プラス乱視レンズセット
- (5) プリズムレンズセット
- (6) 補助レンズセット

※詳細は最終ページの一覧表を参照のこと。

オプション

追加レンズ（各種）、トレイ（各種）、眼科用トレイ枠

2. 寸法及び質量

レンズ寸法：φ38mm（W）×4mm（D）×52mm（H）

質量：2.4kg（基本レンズセット）

3. 作動・動作原理

適切な度数のレンズを使用して網膜上に結像させることにより視力を補正します。

【使用目的又は効果】

使用目的

検眼レンズ

【使用方法等】

使用方法

- (1) 検眼装用テスト時に、被検者眼を矯正するためのレンズを選択し、仮枠に入れて使用します。
- (2) 使用後は、次の使用に支障がないように、トレイ等に収納し、清潔な状態で保管します。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・検査に先立ち、検査の目的、方法について十分に説明すること。

取り扱い

- ・レンズ面に傷が付いたり、指紋、ホコリ、その他で汚れないようにすること。

- ・使用後は、レンズをクリーニングし、ホコリが溜まらないようにトレイ等に収納すること。〔測定の信頼性が低下する恐れがあります。〕
- ・移動および運搬時は、必ず付属の梱包箱もしくはトレイに収納すること。
- ・強い振動・衝撃を与えないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 耐用期間

新規購入日から 8 年〔自己認証による〕

2. 貯蔵・保管

- ・水のかからない場所に保管すること。
- ・直射日光や湿度の高い環境を避け、室温にて保管すること。
- ・清潔で乾燥した場所に、荷重の掛からない状態で保管すること。
- ・化学薬品、有機溶剤の保管場所や腐食性ガスの発生する場所には保管しないこと。
- ・空气中に塩分、イオウ分、多量のホコリを含む場所には保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

保守・点検

使用者による保守点検事項

- ・使用後は、レンズをクリーニングし、割れや欠け、ヒビが無いことを確認すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 ニデック

住所：〒443-0038 愛知県蒲郡市拾石町前浜 34 番地 14

電話番号：0533-67-6151(代)

<レンズ内容詳細一覧表>

(－) 球面レンズ (SPH. -X. XX)				(＋) 球面レンズ (SPH. +X. XX)			
番号	リム 表示	基本 R/L	追加 R/L	番号	リム 表示	基本 R/L	追加 R/L
1501	0.12		〇〇	1601	0.12		〇〇
1502	0.25	〇〇		1602	0.25	〇〇	
1503	0.37		〇〇	1603	0.37		〇〇
1504	0.50	〇〇		1604	0.50	〇〇	
1505	0.75	〇〇		1605	0.75	〇〇	
1506	1.00	〇〇		1606	1.00	〇〇	
1507	1.25	〇〇		1607	1.25	〇〇	
1508	1.50	〇〇		1608	1.50	〇〇	
1509	1.75	〇〇		1609	1.75	〇〇	
1510	2.00	〇〇		1610	2.00	〇〇	
1511	2.25	〇〇		1611	2.25	〇〇	
1512	2.50	〇〇		1612	2.50	〇〇	
1513	2.75	〇〇		1613	2.75	〇〇	
1514	3.00	〇〇		1614	3.00	〇〇	
1515	3.25	〇〇		1615	3.25	〇〇	
1516	3.50	〇〇		1616	3.50	〇〇	
1517	3.75	〇〇		1617	3.75	〇〇	
1518	4.00	〇〇		1618	4.00	〇〇	
1519	4.25	〇〇		1619	4.25	〇〇	
1520	4.50	〇〇		1620	4.50	〇〇	
1521	4.75	〇〇		1621	4.75	〇〇	
1522	5.00	〇〇		1622	5.00	〇〇	
1523	5.25	〇〇		1623	5.25	〇〇	
1524	5.50	〇〇		1624	5.50	〇〇	
1525	5.75		〇〇	1625	5.75		〇〇
1526	6.00	〇〇		1626	6.00	〇〇	
1527	6.25		〇〇	1627	6.25		〇〇
1528	6.50	〇〇		1628	6.50	〇〇	
1529	7.00	〇〇		1629	7.00	〇〇	
1530	8.00	〇〇		1630	8.00	〇〇	
1531	9.00	〇〇		1631	9.00	〇〇	
1532	10.0	〇〇		1632	10.0	〇〇	
1533	11.0	〇〇		1633	11.0	〇〇	
1534	12.0	〇〇		1634	12.0	〇〇	
1535	13.0	〇〇		1635	13.0	〇〇	
1536	14.0	〇〇		1636	14.0	〇〇	
1537	15.0		〇〇	1637	15.0		〇〇
1538	16.0	〇〇		1638	16.0	〇〇	
1539	18.0	〇〇		1639	18.0	〇〇	
1540	20.0	〇〇		1640	20.0	〇〇	

注) 単体の場合、その包装紙外側にレンズの種類等を次のように記す。尚、X. Xは一覧表のリム表示欄の数字を意味する。

- ・(－) 球面レンズ：SPH. -X. XX
- ・(＋) 球面レンズ：SPH. +X. XX
- ・(－) 乱視レンズ：CYL. -X. XX RまたはL
- ・(＋) 乱視レンズ：CYL. +X. XX RまたはL
- ・プリズムレンズ：P. -X. XRまたはL

(－) 乱視レンズ (CYL. -X. XX)				(＋) 乱視レンズ (CYL. +X. XX)			
番号 (R/L)	リム 表示	基本 R/L	追加 R/L	番号 (R/L)	リム 表示	基本 R/L	追加 R/L
1551/1571	0.12		〇〇	1651/1671	0.12		〇〇
1552/1572	0.25	〇〇		1652/1672	0.25	〇〇	
1553/1573	0.50	〇〇		1653/1673	0.50	〇〇	
1554/1574	0.75	〇〇		1654/1674	0.75	〇〇	
1555/1575	1.00	〇〇		1655/1675	1.00	〇〇	
1556/1576	1.25	〇〇		1656/1676	1.25	〇〇	
1557/1577	1.50	〇〇		1657/1677	1.50	〇〇	
1558/1578	1.75	〇〇		1658/1678	1.75	〇〇	
1559/1579	2.00	〇〇		1659/1679	2.00	〇〇	
1560/1580	2.25	〇〇		1660/1680	2.25	〇〇	
1561/1581	2.50	〇〇		1661/1681	2.50	〇〇	
1562/1582	2.75	〇〇		1662/1682	2.75	〇〇	
1563/1583	3.00	〇〇		1663/1683	3.00	〇〇	
1564/1584	3.50		〇〇	1664/1684	3.50		〇〇
1565/1585	4.00		〇〇	1665/1685	4.00		〇〇
1566/1586	4.50		〇〇	1666/1686	4.50		〇〇
1567/1587	5.00		〇〇	1667/1687	5.00		〇〇

プリズムレンズ (P. -X. X)				
名称	番号 (R/L)	リム 表示	基本 R/L	追加 R/L
0.50 プリズム	1701/1711	0.5△	〇〇	
1.00 プリズム	1702/1712	1.0△	〇〇	
1.50 プリズム	1703/1713	1.5△	〇	〇
2.00 プリズム	1704/1714	2.0△	〇	〇
3.00 プリズム	1705/1715	3.0△	〇	〇
4.00 プリズム	1706/1716	4.0△	〇	〇
5.00 プリズム	1707/1717	5.0△	〇	〇
6.00 プリズム	1708/1718	6.0△		〇〇

補助レンズ (リム表示)				
名称	番号	リム 表示	基本 R/L	追加 R/L
平面レンズ	1751	0A	〇	
遮蔽板	1752	BL	〇	
ピンホール	1753	PH	〇	
スリット	1754	SS	〇	
レッドフィルター	1756	RF	〇	
グリーンフィルター	1757	GF	〇	
* 偏光板	1763	PF	〇〇	
レッドマドックスロッド	1758	MR		〇
ホワイトマドックスロッド	1759	MR		〇

- ・補助レンズ：以下以外はリム表示と同様。
- ・偏光板：P F RまたはL
- ・レッドマドックスロッド：RM
- ・ホワイトマドックスロッド：WM