


医療用品 6 視力表及び色盲検査表

一般医療機器 視力表（16800000）

3 m用視力表 LC－3 S

＊ ＊ 【形状・構造及び原理等】

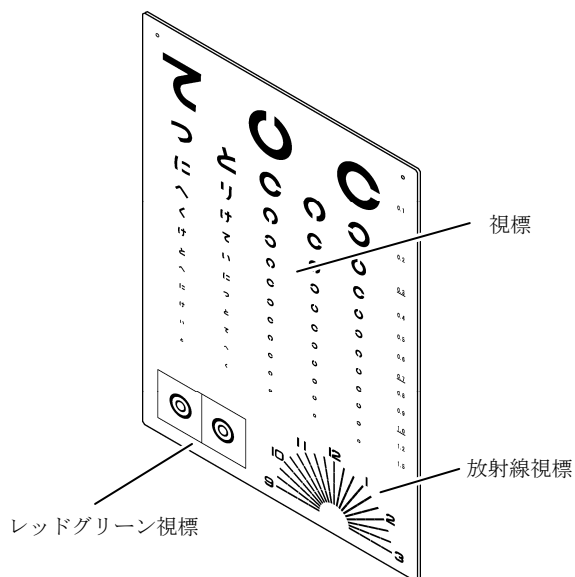

1. 構成

基本構成

本体、取扱説明書

＊ 2. 体に接触する部分の組成

＊ 視力用視標、レッドグリーン視標、放射線視標：塩化ビニル樹脂

3. 寸法及び質量

＊ 寸法：420mm（縦）×280mm（横）×1mm（厚み）

質量：170g

＊ 4. 作動・動作原理

検査距離 3m で視力検査を行うために視標を呈示する視標板で、表面に検査視標が印刷されています。

詳細は装置付属の取扱説明書の○仕様を参照のこと。

＊ ＊ 【使用目的又は効果】

使用目的

視力検査に用いる視力表

詳細は装置付属の取扱説明書の○概要を参照のこと。

＊ ＊ 【操作方法等】

1. 環境条件

温度：+10～+40℃

湿度：30～85%（結露なきこと）

2. 使用方法

基本的な操作は(1)→(2)→(3)の流れとなります。

(1) 準備

始業点検を行います。

(2) 測定

被検者から 3m 離れた位置に本品を呈示し、視標を視認させ検眼を行います。

(3) 終了

次回の使用に支障がないように、ケースに収納する等、清潔な状態で保管します。

詳細は装置付属の取扱説明書の○使用方法、○仕様を参照のこと。

＊ ＊ 【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

・測定に先立ち、測定の目的、方法について十分に説明すること。

取り扱い

・視標が汚れたときは、ティッシュペーパーなどの柔らかなもので力を入れずに拭くこと。

・清掃時にアセトン、シンナー等の薬品を使用しないこと。

〔視標の印刷面が消えてしまう恐れがある。〕

詳細は装置付属の取扱説明書の○使用上の注意を参照のこと。

＊ ＊ 【保管方法及び有効期間等】

1. 環境条件

温度：-20～+60℃

湿度：10～95%（結露なきこと）

2. 耐用期間

新規購入日から 3 年〔自己認証による〕

3. 貯蔵・保管

・表面に傷がつかないように保管すること。

〔視標精度が損なわれる恐れがある。〕

・水のかからない場所に保管すること。

・直射日光や湿度の高い環境を避け、室温にて保管すること。

・清潔で乾燥した場所に、荷重の掛からない状態で保管すること。

・化学薬品、有機溶剤の保管場所や腐食性ガスの発生する場所には保管しないこと。

・空气中に塩分、イオウ分、多量のコロリを含む場所には保管しないこと。

・器具が結露しないようにすること。

詳細は装置付属の取扱説明書の○仕様、○保管に関する注意を参照のこと。

＊ ＊ 【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

項目	頻度
視標のクリーニング	必要時

取扱説明書を必ずご参照ください。

****・**本器具には定期的な保守点検はありません。使用前の始業点
検で視標表面に汚れ、傷等がないことを点検すること。

詳細は装置付属の取扱説明書の○保管に関する注意を参照のこと。

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売元：株式会社ニデック

電話番号：0533-67-6151(代)

取扱説明書を必ずご参照ください。