

販売名：丸山式コイルブラックアイ

類別：機械器具 80 はりまたはきゅう用器具
一般医療機器(クラスI) 一般名称：家庭用貼付型接触粒 (JMDN コード: 71026000)


【警告】

1. 小児及び監督を必要とする方の手の届かない場所に保管すること。
2. 誤飲を防ぐために小児に使用しないこと。
万一、飲込んだ場合は、すぐに医師の診断を受け、指示に従うこと。
3. 本品の使用目的以外には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】



コイル本体

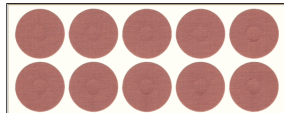

貼付用シール

1. 形状

- ・本体直径：13mm ±10% ・本体厚み：2.9mm ±10%

2. 動作原理

- ・突起部による圧迫でコリを緩解する。


【使用目的、効能又は効果】

貼付用シールによって、本品の突起をしている面を身体のコリの部分に貼付することで圧迫し、「コリの緩解」を目的とする。
本品は家庭にて使用する。

【品目仕様等】

1. 本体外形寸法：表示値 ±10%以内であること。
2. 本体外観：割れ、破損がなく突起部側にて銅線が見えないこと。

【操作方法又は使用方法等】

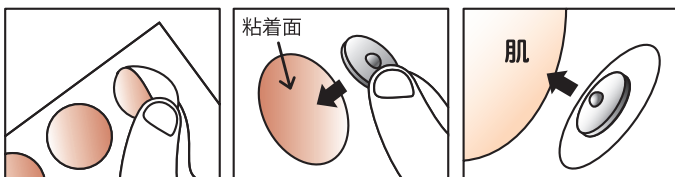

1. 貼付用シールをはがし本体フラット部分をセットします。
2. コリを感じる部分に本体突起部分をあて、貼付用シールで固定します。
3. 使用期間の目安は1～2日です。
4. 本品はくり返し使用出来ます。

※貼付位置については、末尾のイラストを参照ください。

【使用上の注意】

1. 医師の治療を受けている人や下記の人は医師と相談のうえで使用ください。
 - ① 心臓に障害のある人。
 - ② 妊娠初期の不安定期又は出産直後の人。
 - ③ 糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害による知覚障害のある人。

- ④ 皮膚に感染症及び又は創傷のある人。

- ⑤ 体温 38℃以上(有熱期)の人。

例 1. 急性炎症症状〔けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など〕の強い時期。

例 2. 衰弱しているとき。

- ⑥ ねんざ(捻挫)、肉離れなど、急性〔とう(疼)痛性〕疾患の人。

2. 使用しても効果が現れない場合、医師又は専門家に相談してください。

3. 使用する前には、次のことに注意してください。

- ① 本品に割れなどがないかを点検し、割れなどがある場合は使用しないでください。

- ② 本体から銅線が出ている場合は使用しないでください。

4. 使用中には、次のことにご注意ください。

- ① 身体に異常を感じたときには、使用を直ちに中止してください。

- ② 装着部に発しん(疹)、発赤、かゆみなどの症状があらわれた場合は使用を直ちに中止してください。

- ③ 他の治療器と同時に使用しないでください。

- ④ 貼付用シールに粘着性が弱くなった場合は、新しい貼付用シールと交換してください。

5. 使用後及び保管には、次のことにご注意ください。

- ① 機器を廃棄する時には、お住まいの市町村の廃棄方法に従ってください。

【取扱い上の注意】

- ・機器は改造しないでください。

【保守・点検に係わる事項】

- ・常に使用前後の点検を励行し、機器に異常が発見された場合はすぐに使用を中止してください。
- ・機器は改造しないでください。

【包装】

1. コイル本体 6 個
2. 貼付用シール 30 枚 (10枚/3シート)

【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等】

製造販売業者：愛知電子工業株式会社

住 所：愛知県名古屋市天白区池見 2-88

電 話：052-835-0055

製造業者：愛知電子工業株式会社


総販売業者：株式会社 ユニカ

住 所：宮城県仙台市太白区あすと長町 4-2-10

電 話：022-304-1162


丸山式コイルブラックアイを貼る場所

視力低下・疲れ目

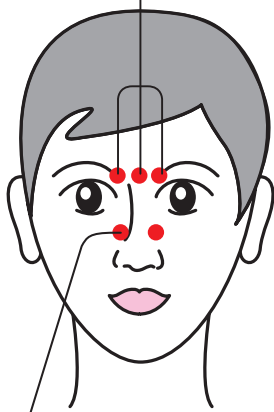

鼻の不調

小鼻のやや上に左右1枚ずつコイルを貼ります。

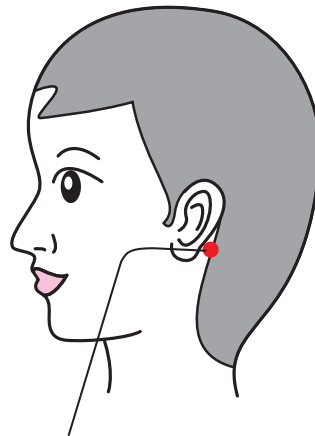

A点


耳鳴り・肩こり

耳の後ろ側にある骨の膨らみ(乳様突起)の下の部分または 指1本分のところで痛みのある部分。左右1枚ずつコイルを貼ります。

首の痛み・肩こり

首筋や肩を指で押してみて痛む所にコイルを貼ります。

痛む所が多い場合は耳の後ろ(A点)に左右1枚ずつコイルを貼ります。

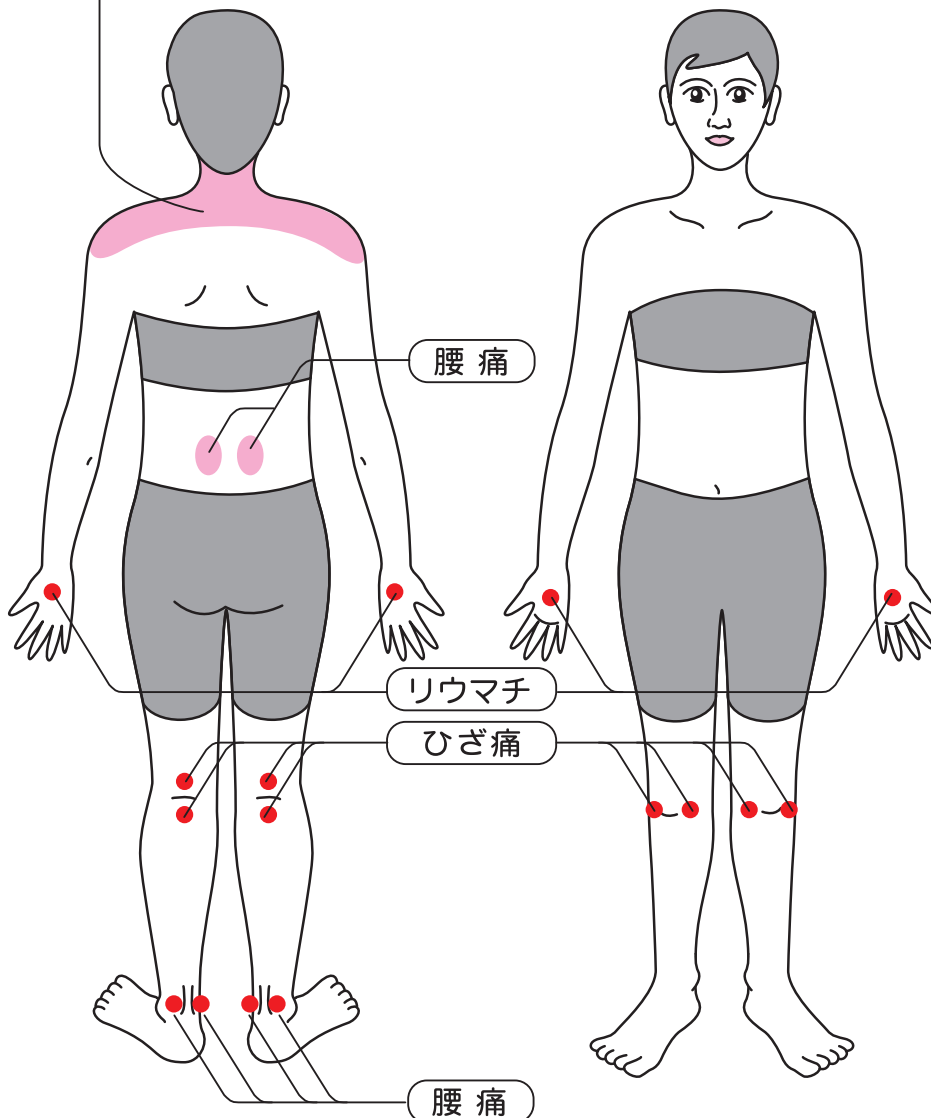

腰痛

リウマチ

ひざ痛

腰痛