

歯科材料 06 歯科用印象材料
 一般医療機器 歯科印象採得用器材 70887000

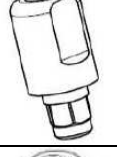
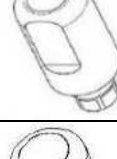
ベゴ キャドポジショナー

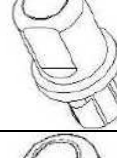
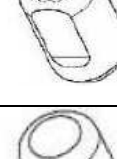
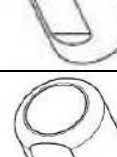
再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 1) 本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- 2) 再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

品名	形状
STRAU_TL_4.8/6.5	
STRAU_BL_3.3	
STRAU_BL_4.1/4.8	
XIVE_3.3	
XIVE_3.8	
XIVE_4.5/5.5	
NOBEL_ACT_3.5	
NOBEL_ACT_4.3/5.0	

NOBEL_REP_3.5	
NOBEL_REP_4.0/4.3	
NOBEL_REP_5.0	
NOBEL_BRE_3.5	
NOBEL_BRE_3.75/4.0	
NOBEL_BRE_5.0	
3I_INT_3.4	
3I_INT_4.0/5.0	
3I_EXT_3.4	

3I_EXT_3.75/4.0/5.0	
ASTRA_AQUA_3.5/4.0	
ASTRA_LILAC_4.5/5.0	
ZIMME_TSV_3.7/4.1	
CAMLO_3.3	
CAMLO_3.8	
CAMLO_4.3	
CAMLO_5.0/6.0	

【使用目的又は効果】

本品は印象採得に使用する器具である。
 本品はCAD/CAMによるスキャン工程において個々のインプラントやアナログの位置と方向を表し、CAD/CAM ソフトウェアでCAD/CAM 修復物の正確な位置を定めるために用いる。

【使用方法等】

本品を埋入されたインプラントアナログ等へ締結してスキャンニングを行います。

【使用方法に関する注意】

- 1) 本品を口腔内で使用する場合は、使用前に本品が清浄で消毒がなされていることを確認すること。
- 2) 洗浄剤や消毒液は歯科用に適したものを使用すること。
- 3) 本品をインプラントアナログ等に正確にセットすること。
- 4) スキャンニングに際しては、使用する CAD/CAM 装置の取扱説明書等をよく読んでから行うこと。

【使用上の注意】

- 1) 損傷、変形などのあるものは使用しないこと。
- 2) 本品を口腔内で使用する場合は、必ず吸引や誤飲を予防するための手段を用いること。
- 3) 万が一誤飲してしまった場合は、速やかに医療機関に問い合わせ、適切な処置を受けること。

【保管方法及び使用期間等】

* [保管方法]

- 1) 高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。
- 2) 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 : 株式会社ニッシン (選任製造販売業者)
 住所 : 〒621-0001
 : 京都府亀岡市旭町樋ノ口 88
 電話番号 : 0120-571939 (フリーダイヤル)
 電話受付時間 月～金 (祝日を除く)
 午前 10 : 00～午後 5 : 00
 製造元 : ベゴ ブレーマ ゴールドシュレーゲライ
 ウイルヘルム ヘルプスト ゲ エム ベ
 ハ ウンド コ カゲ
 BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH &
 Co. KG
 国名 : ドイツ
 販売元 : 株式会社アイキャスト
 電話番号 : 0120-228582 (フリーダイヤル)
 電話受付時間 月～金 (祝日を除く)
 午前 10 : 00～12 : 00 午後 1 : 00～5 : 00