

機械器具74 医薬品注入器
*一般医療機器 薬液調整用針 70379000

溶解液注入針

(TN-12)

再使用禁止


【禁忌・禁止】

○再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、溶解液と各種製剤を混ぜあわせる時に用いられる合成樹脂製の滅菌済み溶解液注入針である。

本品には合成樹脂の本体に合成樹脂の針が組み込まれており、針部先端を保護するためのキャップと瓶の口部にセットするためのアダプターが付備されている。

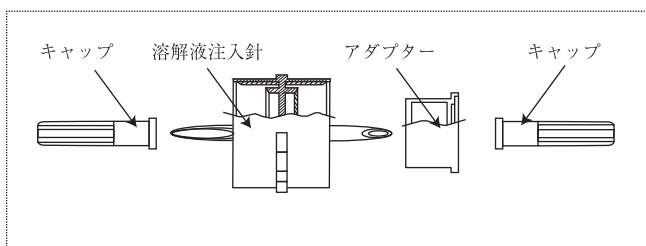


溶解液注入針の形状・構造


*【使用目的、効能又は効果】

本品は、薬剤を容器から他の薬液容器に移すために用いる用具である。


【操作方法又は使用方法等】

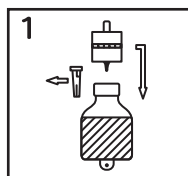


1. キャップを外し、溶解液ボトルに真っ直ぐ刺入します。

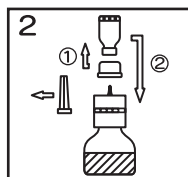

2. キャップを外し、アダプターを取り付けた薬剤瓶を上から真っ直ぐ刺入します。

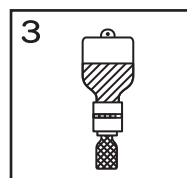

3. 逆立にすると液が移注します。

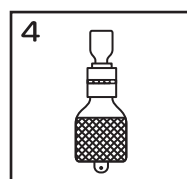

4. 再び逆立にすると、溶解液ボトルに薬液が移ります。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- (1) 万一包装が破損、汚損している場合や、製品に破損等の異常が認められた場合は使用しないこと。
- (2) 誤って針を指に刺さないよう注意すること。
- (3) 包装を開封したらすぐに使用し、使用後は安全な方法で廃棄すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

貯蔵・保管方法

水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管。

【包装】

1箱 20個入り

*【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売（問い合わせ先）

ニプロ株式会社

大阪市北区本庄西3丁目9番3号

電話番号：06-6375-6709（医療推進部）

製造

ニプロ医工株式会社



ニプロ株式会社