

機械器具 74 医薬品注入器
一般医療機器 薬液調整用針 70379000

溶解移注針


(TN-9-32N)

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、溶解液と各種薬剤を混ぜ合わせる時に用いられる滅菌済み溶解液注入針である。
本品には合成樹脂の本体に金属製の移注針が同時成形により組み込まれている。

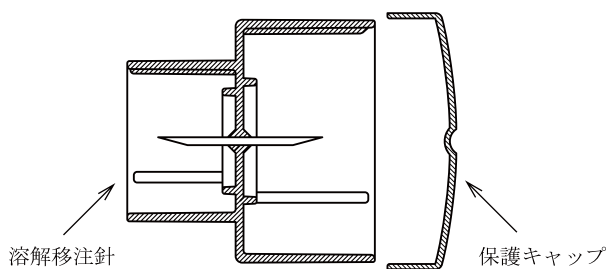


〔溶解移注針の形状・構造〕


【使用目的、効能又は効果】

本品は、薬剤を容器から他の薬液容器に移すために用いる用具である。


【操作方法又は使用方法等】

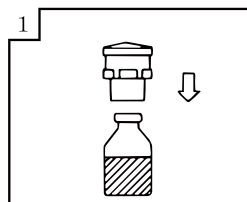

1. 移注針の保護キャップのついている側を上にし、針を溶剤瓶ゴム栓の中央部に真っ直ぐ刺し込みます。

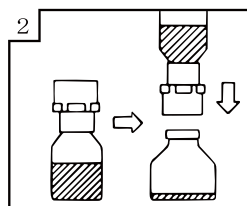

2. 保護キャップをはずし、溶剤瓶と移注針を逆さにし、薬剤瓶ゴム栓の中央部に真っ直ぐ刺し込むと溶剤が移注します。

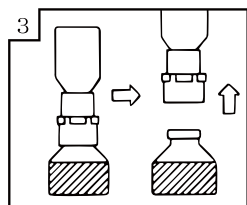

3. 空になった溶剤瓶を移注針といっしょに引き抜きます。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 使用は1回限りとし、使用後は直ちに廃棄すること。
- 併用する医薬品の添付文書を確認し、それぞれの使用方法、使用上の注意に従って使用すること。
- 包装を開封したらすぐ使用し、使用後は直ちに安全な方法で廃棄すること。
- 包装が破損、汚損している場合や、製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- 誤って針を指に刺さないよう注意すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法
水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。
2. 有効期間・使用の期限
包装に記載の使用期限欄を参照のこと（自己認証による）。

【包装】

- 1 個入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売（お問い合わせ先）
ニプロ株式会社
大阪市北区本庄西3丁目9番3号
電話番号：06-6375-6709（医療推進部）

製造

ニプロ医工株式会社



ニプロ株式会社