

機械器具55 医療用洗浄器
*一般医療機器 洗浄剤注入用具 70463000

局所洗浄用ノズル


再使用禁止

【禁忌・禁止】

○再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は合成樹脂製の生体用洗浄器具であって本体及びキャップで構成されている。

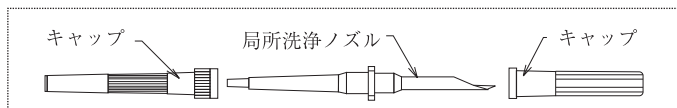


局所洗浄用ノズルの形状・構造

*【使用目的、効能又は効果】

本品は、洗浄剤を注入する器具である。

【操作方法又は使用方法等】

1. 包装を切口部より開封し製品を取り出します。
2. 本品の短い方のキャップを外し、刃面を確認した後、洗浄用薬液の入った容器のゴム栓等に刃面を刺通します。
3. 噴射口側のキャップを外します。
4. 本品を洗浄する患部に向けます。
5. 洗浄用薬液の入った容器を圧迫し、薬液を患部に噴射し洗浄します。

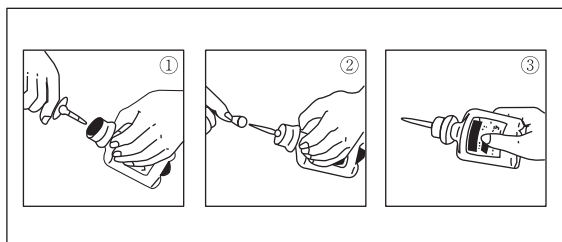

【使用上の注意】

重要な基本的注意

万一包装が破損、汚損している場合や、製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法
水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保存。
2. 使用期限
包装の使用期限を参照〔自己認証（自社データ）による〕。

【包装】

1箱100個入り

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売

ニプロ株式会社（お問い合わせ先）
大阪市北区本庄西3丁目9番3号
電話番号：06-6375-6709（医療推進部）

製造

ニプロ医工株式会社

販売提携

大塚製薬株式会社
東京都千代田区神田司町2-9

販売提携

株式会社大塚製薬工場
徳島県鳴門市撫養町立岩字芥原115