

機械器具47 注射針及び穿刺針
一般医療機器 通気針 70199000

通 気 針


再使用禁止

**（血漿分画製剤用）

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 人体への注射、採血、輸血、採液には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

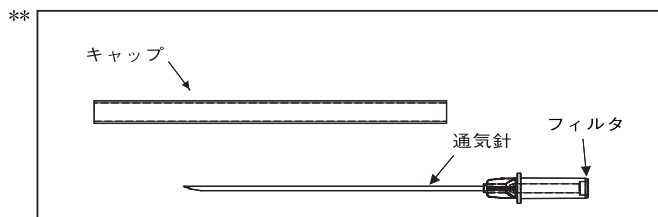

通気針の形状・構造

【使用目的、効能又は効果】

本品は、輸液瓶等から輸液する際、瓶内に通気されるために使用する針である。チューブ及びフィルタ付きもある。

* 【品目仕様等】

- 引抜強さ
針基から針管を引き抜く方向に69Nの荷重を加えたとき、引き抜けない。

【操作方法又は使用方法等】

1. 製剤バイアルに点滴チューブの針を刺し、バイアルを逆さまにつるしてください。
- **2. 本品のフィルタの部分を指で蓋をした状態のまま、本品を製剤バイアルに差し込み、フィルタ部分の指先を放してください。

* 〈使用方法に関連する使用上の注意〉

1. 本品の針部には直接手を触れないこと。
2. キャップを外すときは、針先がキャップに触れないよう注意すること。針先まくれ等の原因となり穿刺しにくくなる場合がある。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- *○開封は使用直前に行うこと。
○包装が破損、汚損している場合や、製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- *○本品を一般針としては使用しないこと。
- *○本品に過度の負荷をかけないよう注意すること。〔本品又は栓が破損し、液漏れ等が発生するおそれがある。〕
- *○プラスチック製品なので、低温時の取扱いには注意すること。
〔針基又はフィルタ等が破損するおそれがある。〕
- *○併用する医薬品及び医療機器の添付文書を確認後、それぞれの使用方法、使用上の注意に従って使用すること。
- *○使用後は、感染防止に留意し、安全な方法で廃棄すること。
尚、本品にキャップをかぶせる場合は、誤刺に注意し、慎重に行うこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法
水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。
- *2. 有効期間・使用の期限
個包装、又は箱の使用期限欄を参照のこと（自己認証による）。

** 【包装】

1本、又は100本、1000本／箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売：

ニプロ株式会社
大阪市北区本庄西3丁目9番3号
電話番号：06-6372-2331（代表）

製造： ニプロ医工株式会社

お問い合わせ先：

ニプロ株式会社（東京営業部）
東京都文京区本郷4丁目3番4号
電話番号：03-5684-5611



ニプロ株式会社