

ニプロルアーアダプター

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- ※○未滅菌の真空採血管と組合わせて使用しないこと。
- ※○採血終了後、採血管に採血針が刺さったままの状態で駆血帯を外さないこと。[駆血帯を外すことによる圧力の変動により、採血管内の内容物等が患者の体内に逆流する恐れがある。]
- ※○ホルダーは患者ごとの使用とし、使用後は廃棄すること。[ホルダーに血液が付着した場合は、交差感染のおそれがあるため。]

【形状・構造及び原理等】

本品は真空採血時に使用するアダプターであり、一般の注射針及び翼状針等に接続することが出来る。

〈各部の名称〉

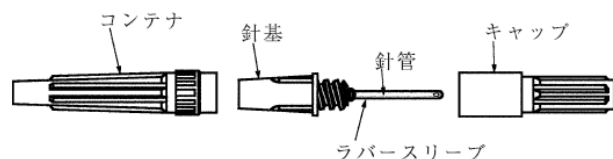

※【使用目的、効能又は効果】

2つの器具を組み合わせる固定位置に保持するために、又は2つの器具を接続するために使用する単回使用器具をいう。

※【品目仕様等】

本品は真空採血管10本に連続して穿刺し、13kPaの圧力を1分間かけたとき、血液汚染につながるような連続的な血液漏れがないものである。

【操作方法又は使用方法等】

1. 容器の両端を持ち、回転させて開封して下さい。
[注意] 開封は使用直前に行うこと。
2. キャップを外して、針基を専用ホルダーにねじ込んで下さい。
※ [注意] キャップを外す際には、キャップをラバースリーブに接触させないように真っ直ぐ外すこと。
[キャップをラバースリーブに接触させてしまった場合、針がラバースリーブ側面を貫通し、血液が漏れる可能性がある。]
[注意] ホルダーとの接続がしっかりとされていない場合、うまく採血が出来ないことがあるので、使用前に必ずしっかりと接続されていることを確認すること。
- ※ 3. 駆血帯をかけた後に、皮膚の消毒を行って下さい。
- ※ 4. まっすぐ引くようにしてコンテナを外し、他の医療機器と接続して下さい。
[注意] コンテナを外すときは、ホルダーへ確実にねじ込まれたことを確認すること。
- ※ 5. 採血針を血管に穿刺したら、採血管をホルダーにまっすぐ完全に押し込んで下さい。
[注意] 必ず滅菌済み真空採血管を使用すること。
- ※ 6. 規定量の血液が採れるまで状態を保って下さい。
- ※ 7. 採血の血流が停止したら、直ちに採血管をホルダーから外して下さい。
- ※ 8. 連続採血する場合には、ホルダーを固定したまま採血管を取り替えて下さい。
- ※ 9. 採血終了後、採血管をホルダーから抜去した後に駆血帯を外して下さい。
- ※ 10. 使用後は感染防止に注意し、そのまま廃棄して下さい。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

○外観が変形したものは使用しないこと。

※○採血ホルダーはニプロ製ホルダーを使用すること。

[ニプロ製ホルダーを使用しなかった場合には、本品がホルダーから抜け出る場合がある。]

※○他の医療機器に接続して使用する場合、それぞれの使用方法、使用上の注意に従って使用すること。

※○万一、包装が破損、汚損している場合や、製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。

○使用後は、感染防止に留意し安全な方法で処分すること。

※○ルアーアダプターから血液漏れが生じた際は、採血針を抜去し、新しい採血針、ルアーアダプター及びホルダーと交換すること。[針先でラバースリーブの側面部を貫通させると、ラバースリーブが正常に戻らず、血液漏れが生じる可能性がある。]

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵方法

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿をさけて保管すること。

2. 使用の期限

内箱の使用期限欄を参照のこと（自己認証による）。

【包装】

100本/箱

※【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売（お問い合わせ先）

ニプロ株式会社

大阪市北区本庄西3丁目9番3号

電話番号：06-6372-2331（代表）

製造

ニプロ医工株式会社